

Руководство по использованию держателей

Перед использованием держателей прочитайте данное руководство. В нем указана важная информация о схемах загрузки и конфигурациях с держателями, которые обеспечивают оптимальное использование стерилизационной камеры. Также представлена информация о чистке, уходе и дополнительных принадлежностях.

1 Назначение

Держатели предназначены для лотков, стерилизационных контейнеров MELAstore-Box и прочих стерилизационных контейнеров.

Паровые стерилизаторы серии Evolution класса Premium-Plus поставляются с держателями E Plus. Паровые стерилизаторы класса Pro и S поставляются с держателями A.

1.1 Совместимость

Держатели совместимы с оборудованием следующих классов

Держатель A, A Plus, B, D

Класс устройства	Тип устройства
Pro-Class / Classic	Vacuklav 23 B+, 24 B+, 24 B/L+, 30 B+, 31 B+
	Vacuklav 23-B, 24-B, 24-B/L, 30-B, 31-B
S-Class / Euroklav	Euroklav 23 VS+, 29 VS+, 23 S+
	Euroklav 23V-S, 29V-S, 23-S, 29-S
Premium-Plus-Class Evolution Premium-Plus-Class	Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+
Premium-Class	Vacuklav 40-B, 41-B, 43-B, 44-B

Держатель C, C Plus, D Plus, E Plus, F Plus

Класс устройства	Тип устройства
Premium-Plus-Class Evolution Premium-Plus-Class	Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+
Premium-Class	Vacuklav 40-B, 41-B, 43-B, 44-B

2 Краткое описание вариантов загрузки держателей

Далее представлена информация о классе оборудования для каждого держателя, а также возможные варианты загрузки. Соблюдайте максимальное количество загрузки, указанное в руководстве по эксплуатации соответствующего парового стерилизатора.

		Pro-Class, S-Class ³⁾	Premium-Plus-Class ⁴⁾			Глубина камеры						Стерилизационные контейнеры								Стерилизационные биксы		Стандартные лотковые кассеты		MELAstore-Boxes ⁵⁾	
			Артикул		коротк	длинн	15 K	15 M	15 G	17 K	17 M	17 G	23 M	23 G	28 M	28 G	17 R	23 R		100	200				
●	–	Держатель A	40233	короткий	5	5	3	–	–	3	–	–	–	–	2	1	2	1	3	3	–				
			40244	длинный	–	5	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	–				
●	–	Держатель A Plus	82625	короткий	5	–	3	–	–	3	–	–	–	–	2	1	2	1	3	3	–				
			82635	длинный	–	5	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	–				
●	●	Держатель B	40234	короткий	4	–	4	–	–	3	–	–	–	–	2	1	2	1	4	–	–				
			40224	длинный	–	4	6	3	2	6	–	–	–	–	–	2	1	3	2	4	–	–			
–	●	Держатель C	40232	короткий	6	–	3		–	3	–	–	–	–	2	1	2	1	3	3	–				
			40242	длинный	–	6	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	–				
–	●	Держатель C Plus	81375	короткий	6	–	3		–	3	–	–	–	–	2	1	2	1	3	3	–				
			81385	длинный	–	6	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	–				
●	●	Держатель D	46840		4	–	4	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	2	2	2				
–	●	Держатель D Plus	82645	короткий	2/+2 ¹⁾	–	4/+2 ¹⁾	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	2/+2 ¹⁾	2/+2 ¹⁾	2/+2 ¹⁾				
			82655	длинный ²⁾	–	2/+2 ²⁾	6/+2 ²⁾	2	1	4	2	1	2	–	2	–	–	–	2/+2 ²⁾	2/+2 ²⁾	2/+2 ²⁾				
–	●	Держатель E Plus	82400	короткий	6/+2 ¹⁾	–	6	–	–	3	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–				
			82700	длинный	–	6/+2 ²⁾	9	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	–	–	–				
–	●	Держатель F Plus	82665	короткий	3/+2 ¹⁾	–	6/+2 ¹⁾	–	–	2	–	–	–	–	2	1	2	–	3/+2 ¹⁾	3/+2 ¹⁾	–				
			82675	длинный	–	3/+2 ¹⁾	9/+2 ²⁾	3	2	4	2	1	2	1	2	1	3	–	3/+2 ¹⁾	3/+2 ¹⁾	–				

1) Данный держатель может вместить два дополнительных узких лотка (глубиной 27 см)

2) Данный держатель может вместить два дополнительных узких лотка (глубиной 40 см)

3) Также совместим с серией Classic и предыдущим поколением Euroklav

4) Также совместим с серией Evolution класса Premium-Plus и классом Premium

5) Стерилизационные контейнеры MELAstare-Box можно использовать только в оборудовании с фракционным вакуумированием (например, классы Premium-Plus, Pro).

3 Общие требования техники безопасности



При использовании дополнительных принадлежностей соблюдайте следующие требования техники безопасности. Используйте дополнительные принадлежности только в целях, указанных в руководстве по эксплуатации.

- Держатель необходимо держать строго горизонтально при извлечении из парового стерилизатора. В противном случае загрузка может соскользнуть.
- При загрузке держателя непосредственно в паровой стерилизатор и при изъятии загрузки отдельно из парового держателя убедитесь, что держатель не выскользнет.
- Не прикасайтесь голыми руками к стерильным инструментам, камере и деталям камеры. Детали могут быть горячими.
- Снимайте стерильные инструменты, используя соответствующее оборудование (например, устройство для поднятия лотка или защитные перчатки), чтобы избежать ожогов.

4 Применение



Соблюдайте указания по использованию держателей, приведенные в руководстве пользователя к паровому стерилизатору.

4.1 Стандартный держатель


Держатель А

Артикульный номер 40233 (для камеры глубиной 35 см)

Артикульный номер 40244 (для камеры глубиной 45 см)

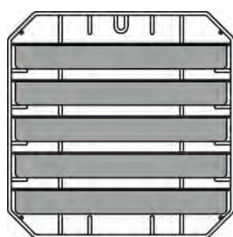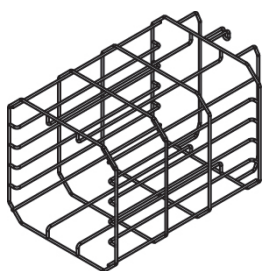

На 5 лотков


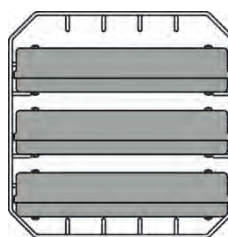


На 3 лотков На 3 стерилизационных контейнера MELAstore-Box 100 (держатель поворачивается на 90°).

Держатель В

Артикульный номер 40234 (для камеры глубиной 35 см)

Артикульный номер 40224 (для камеры глубиной 45 см)

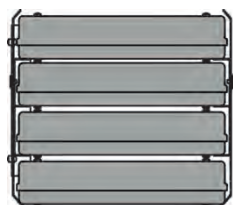
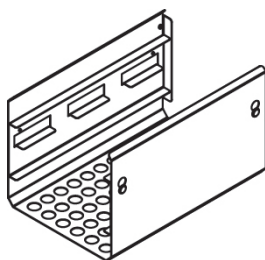


На 4 стандартные лотковые кассеты (или 4 лотка)


Держатель C

Артикульный номер 40232 (для камеры глубиной 35 см)

Артикульный номер 40242 (для камеры глубиной 45 см)

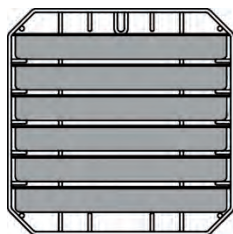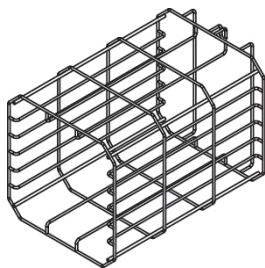



На 6 лотков

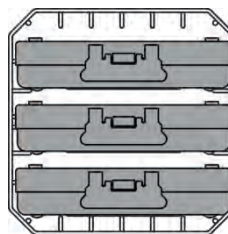


На 3 стерилизационных контейнера MELAstore-Box 100 (держатель поворачивается на 90°).

Держатель D

Артикульный номер 46840 (для камер глубиной 35 см и 45 см)

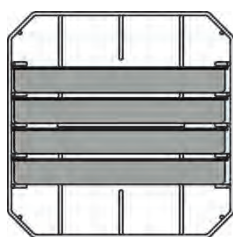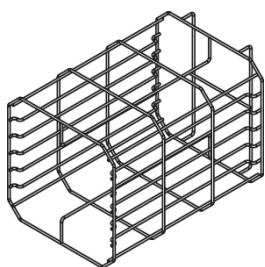

На 4 лотка

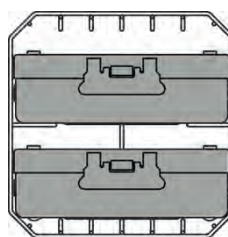

На 2 лотков На 2 стерилизационных контейнера MELAstore-Box 200 (держатель поворачивается на 90°).



4.2 Держатели Plus

Держатели Plus снабжены скользящими скобами по краям. Они защищают стенки камеры от царапин и облегчают вставку и изъятие держателя во время загрузки и разгрузки. В комплект поставки держателей входят сменные скользящие скобы. Перед первым использованием снимите пакет со скользящими скобами. Немедленно замените скользящие скобы, имеющие видимые следы износа. См. раздел [Замена скользящих скоб](#) ► Страница 7].


Держатель A Plus

Артикульный номер 82625 (для камеры глубиной 35 см)

Артикульный номер 82635 (для камеры глубиной 45 см)

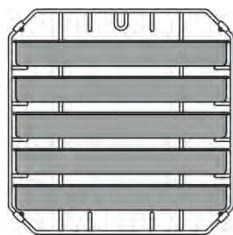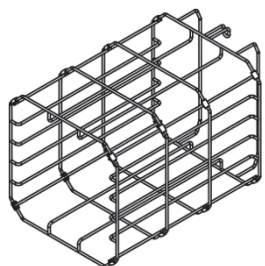

На 5 лотков


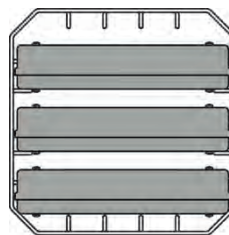


На 3 лотков На 3 стерилизационных контейнера MELAstore-Box 100 (держатель поворачивается на 90°).


Держатель C Plus

Артикульный номер 81375 (для камеры глубиной 35 см)

Артикульный номер 81385 (для камеры глубиной 45 см)

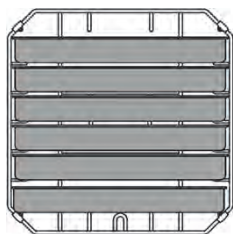
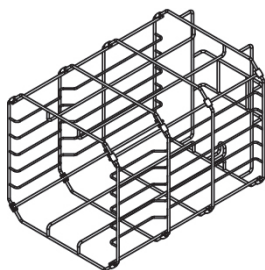


На 6 лотков

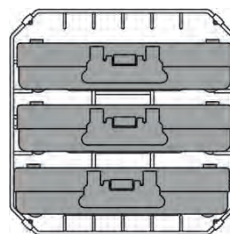На 3 лотков На 3 стерилизационных
контейнера MELAstore-Box 100
(держатель поворачивается на 90°).**Держатель D Plus**



Артикульный номер 82645 (для камеры глубиной 35 см)

Артикульный номер 82655 (для камеры глубиной 45 см)

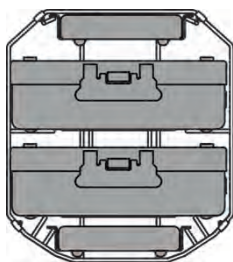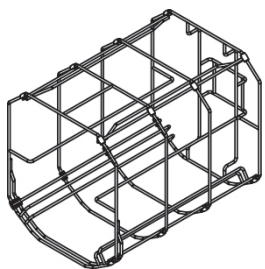На 2 стерилизационных контейнера MELAstore-Box 200
или 2 стерилизационных контейнера MELAstore-Box 100
и 2 узких лотка**Держатель E Plus**

Артикульный номер 82400 (для камеры глубиной 35 см)

Артикульный номер 82700 (для камеры глубиной 45 см)

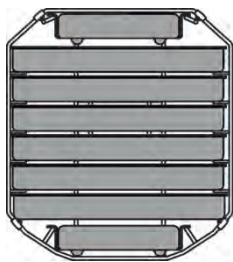
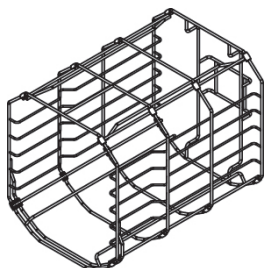


На 6 лотков или 2 узких лотка

Держатель F Plus

Артикульный номер 82665 (для камеры глубиной 35 см)

Артикульный номер 82675 (для камеры глубиной 45 см)

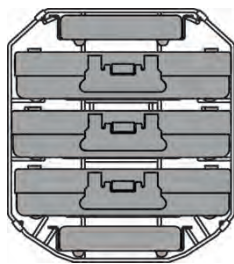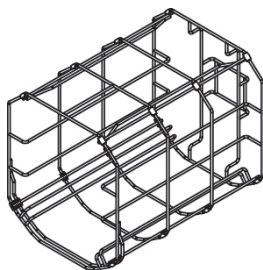

На 3 стерилизационных контейнера MELAstore-Box 100 и
2 узких лотка

5 Чистка и обслуживание

Каждую неделю проверяйте держатель на наличие загрязнений, отложений и повреждений.

При обнаружении загрязнений выньте лотки или кассеты из камеры. Почистите загрязненные элементы.


При чистке держателей для загрузки, лотков и т.д. соблюдайте следующие рекомендации:

- ▶ Убедитесь, что стерилизационная камера не горячая.
- ▶ Используйте мягкую безворсовую ткань.
- ▶ Промокните ткань чистящим спиртом и постарайтесь удалить загрязнения.
- ▶ Не допускается применять чистящие средства, содержащие хлор или уксус.
- ▶ Мягкое, не агрессивное очищающее средство для нержавеющей стали с уровнем 5-8 pH необходимо использовать только для стойких загрязнений.
- ▶ После чистки держателя удалите остатки очищающей жидкости.
- ▶ Не используйте жесткие предметы для чистки, например металлические щетки.

5.1 Замена скользящих скоб

При замене скользящих скоб со следами износа выполните следующие действия:

1. Снимите поврежденную скобу, осторожно потянув ее вверх с помощью небольшой шлицевой отвертки. Убедитесь, что жгуты не гнутся.

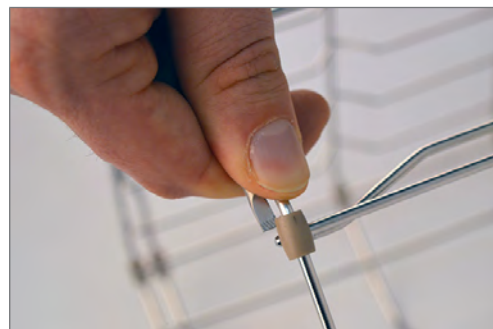

2. Прижмите новую скобу на пересечении жгутов на металлической решетке, пока не послышится щелчок.



6 Дополнительные и запасные детали

6.1 Дополнительные детали

Дистрибьютор может предоставить указанные детали и краткую информацию о дополнительных деталях.

Категория	Деталь	№ для заказа (зависит от глубины камеры)	
		35 см	45 см
Лотки	Поддон	00280	00230
	Поддон, узкий	01320	01310
	Устройство для поднятия лотка	28885	
Держатель упаковки	Держатель пленки	22410	22420
Стерилизационный контейнер с одноразовым бумажным фильтром, по стандарту DIN EN 868-8	15K (18 x 12 x 4,5 см)	01151	
	15M (35 x 12 x 4,5 см)	01152	
	15G (35 x 12 x 8 см)	01153	
	17K (20 x 14 x 5 см)	01171	
	17M, для котла глубиной 45 см (41 x 14 x 5 см)	---	01172
	17G, для котла глубиной 45 см (41 x 14 x 9 см)	---	01173
	23M, для котла глубиной 45 см (42 x 16 x 6 см)	---	01231
	23G, для котла глубиной 45 см (42 x 16 x 12 см)	---	01232
	28M (32 x 16 x 6 см)	01284	
	28G (32 x 16 x 12 см)	01285	
Стандартные лотковые кассеты, перфорированные	- С фильтрующей тканью (29 x 19 x 4 см)	00289	
	- Без фильтрующей ткани (29 x 19 x 4 см)	00286	
Система MELAstore	MELAstore-Tray 50 (18 x 11,8 x 3 см)	01180	
	MELAstore-Tray 100 (27,5 x 17,6 x 3 см)	01181	
	MELAstore-Tray 200 (27,5 x 17,6 x 4,3 см)	01182	
	MELAstore-Box 100 (31,2 x 19 x 4,6 см)	01191	
	MELAstore-Box 200 (31,2 x 19 x 6,5 см)	01192	

6.2 Запасные детали

Категория	Деталь	№ для заказа
Держатели Plus	Скользящие скобы для держателей Plus, 10 шт.	81235