

СЕРІЯ DF

ТЕХНОЛОГІЯ // ФІЛЬТРАЦІЇ / ВИТЯЖКИ / СЕРЕДОВИЩА





Серія DF

Безпека праці та охорона здоров'я

Компанія TBH розробила спеціальну конструкцію системи для використання систем серії DF в стоматологічній/ медичній/ естетичній галузях, щоб задовольнити високі вимоги до гігієни і чистоти. Фільтрувальні та витяжні системи захищають пацієнтів, медичний персонал і лікарів від потенційно інфекційного повітря, тобто повітря, забрудненого мікробами, бактеріями/ вірусами і частинками або аерозолями. Щоб зберегти якомога більше частин системи від забруднення, важливі просте і надійне

очищення/ дезінфекція, а також зручна заміна фільтра. Фільтр пацієнта InLine - це попередній фільтр в елементі захоплення. Він знаходиться у витяжній шафі поруч з пацієнтом. Він вловлює і фільтрує частинки / аерозолі, що з'являються і надійно відділяє їх. Захисну сітку та витяжку слід очищати відповідно до гігієнічної концепції (див. Посібник з експлуатації та обслуговування). Це гарантує, що мікроби / бактерії / віруси не можуть бути перенесені від одного пацієнта до іншого.



Захоплює до 100% частинок




Чим ближче витяжна система знаходиться до місця викиду, тим ефективніше вловлювання і тим менше частинок збирається в повітрі або на поверхнях.

*Захоплення найкраще здійснювати на відстані до 10 см (приблизно ширини руки) від вихідної точки.



Ваша перевага в безпеці

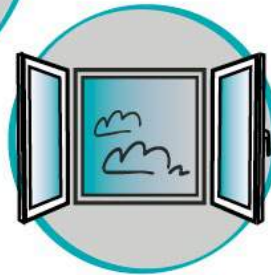

- TBH має більш ніж 25-річний досвід і знання в галузі фільтрації і витяжних технологій.
- Концепція систем TBH має відповідне схвалення відповідно до ISO 15012-1 ("W3") та фільтрує надтонкі небезпечні частинки.
- Високоякісні фільтри схвалені відповідно до EN1822 зі ступенем розділення H13 (99,95% MPPS = 0,1-0,3 мкм).
- Фільтри для пацієнтів InLine гарантують дотримання вимог гігієни в процедурному кабінеті.

W 3	ISO 15012-1 $\eta \geq 99\%$	W 3
-----	---------------------------------	-----

Якщо хворіють лікарі або медичний персонал, робота в практиці не може бути виконана належним чином. У гіршому випадку практику можуть навіть закрити інспектори охорони здоров'я:

➔ **витрати, яких можна уникнути!**

Відповідно до TRBA 250, директива DGUV 109-002 (Німеччина)






Технічні особливості фільтра пацієнта InLine

Високотехнологічний полікарбонат медичної якості

- Стійкий до високих температур – до 121 ° C для автоклавування
- Покращена стійкість для багатьох дезінфікуючих засобів
- Підвищена стійкість для лужного та ферментативного очищувача
- Розроблено для очищення в дезінфікуючих засобах для споліскування

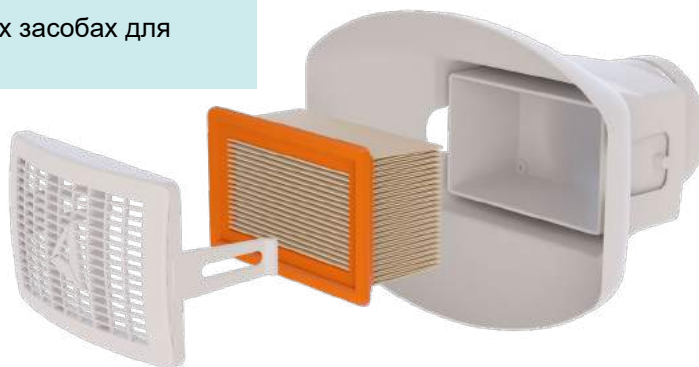

Покращує гігієну завдяки фронтальній фільтрації.

- Захищає користувача і пацієнта від біоплівки і зворотних потоків з витяжного рукава.
- Запобігає забрудненню витяжного рукава.
- Збільшує інтервали очищення витяжного рукава і системи фільтрації.

Зменшує витрати на обслуговування і очищення.

- Просте очищення витяжного рукава
- Менші витрати на фільтри післяпотоківих фільтрів витяжних систем за рахунок менших інтервалів заміни



Концепція гігієни ТВН

При спілкуванні і диханні виділяються аерозолі, які можуть бути заразними і респіраторними. Залежно від лікування також виділяються частинки зі шкіри або порожнини рота.

- Тільки ефективна витяжна здатність і фільтрація в поєднанні з очищенням та дезінфекцією поверхонь захищають від перенесення вірусів/ бактерій від одного пацієнта до іншого
- Змінюйте фільтр пацієнта InLine після кожного пацієнта.
- Очищуйте захисну сітку після кожного пацієнта в термодезінфекторі.
- Очищуйте витяжну шафу після кожного пацієнта шляхом дезінфекції тампоном з дезінфікуючими серветками.
- Очистіть витяжку в кінці робочого дня в термодезінфекторі.



Концепція фільтра ТВН



3 + 4 у поєднанні зі
2-ступеневим фільтром



- 1** Фільтр пацієнта **InLine** захоплює аерозолі
- 2** **Фільтрувальне полотно** поглинає вологу
- 3** **Основний фільтр** забезпечує ступінь розділення
- 4** **Активоване вугілля** у DF10 або **активоване вугілля/ВАС** в DF230 фільтруючих газах/запахах

ЛЮДИНА / СЕРЕДОВИЩЕ / МАШИНИ

Обсяг поставки



DF 10



Ілюстрація

DF 230



Ілюстрація

- Повністю зібраний (вкл. ролики для мобільного використання)
- Шнур живлення
- Фільтрувальне обладнання
- Витяжний рукав, включаючи витяжну шафу із InLine


- Педальний перемикач
- Додаткові фільтрувальні полотна (3 штуки)
- Фільтр пацієнта InLine (50 штук)
- Захисні сітки (3 штуки)

Технічні дані



	ОДИНИЦЯ	DF 10	DF 230
Ефективна швидкість потоку повітря	м³/г	20-200	100-300
Напруга	В	100-240	100-240
Частота	Гц	50/60	50/60
Потужність двигуна	кВт	0,6	0,6
Клас захисту	-	1	1
Тип приводу		безпер. робота	безпер. робота
Рівень звуку	дБ(А)	прибл. 64	прибл. 53
Вага	кг	24	45
Розміри (ВхШхГ) Висота системи без витяжного рукава	мм	510x300x300	700x350x440
Колір (корпус)	RAL	7035	7035
Колір (кришки)	RAL	7037	7035


Дані замовлення

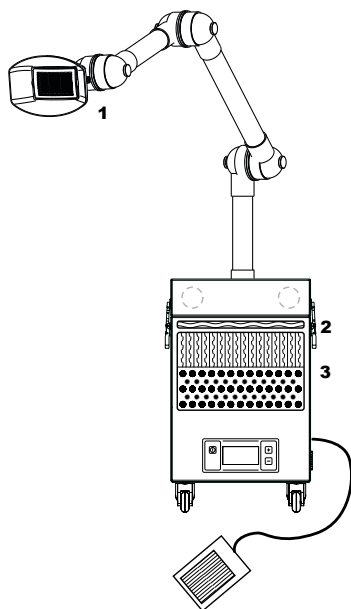

DF 10

СТАНДАРТ

НАЗВА	АРТ-№
DF 10 100-240В 50/60Гц	90471

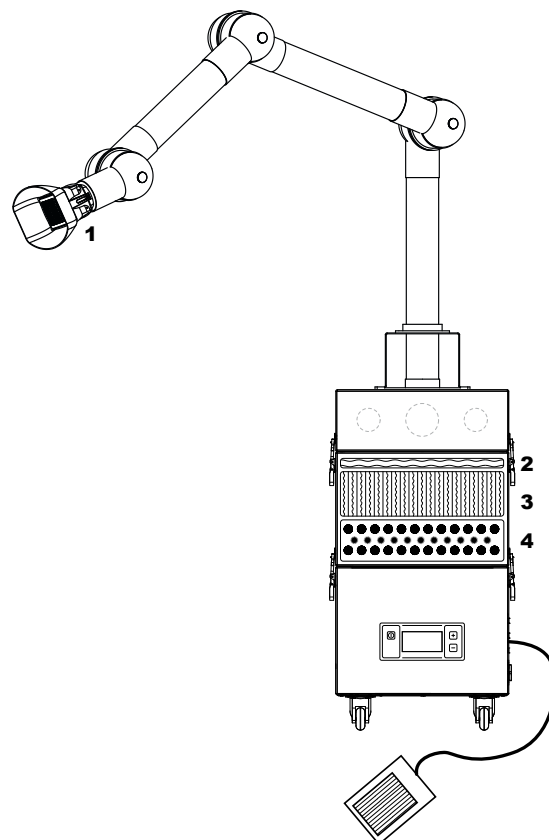

DF 230

СТАНДАРТ

НАЗВА	АРТ-№
DF 230 100-240В 50/60 Гц	90472

НАЗВА	АРТ-№
Фільтр пацієнта InLine (105 шт.)	20285
Полотно попереднього фільтра (20 шт.)	11141
2-ступеневий фільтр (Фільтр частинок + фільтр з активованим вугіллям)	11140

1

2

3

НАЗВА	АРТ-№
Фільтр пацієнта InLine (105 шт.)	20285
Полотно попереднього фільтра (10 шт.)	10040
Фільтр частинок	10013
Фільтр з активованим вугіллям	10004

1

2

3

4



Акcesуари



ЗАСТОСУВАННЯ	ВИЗНАЧЕННЯ	АРТ-№
DF 10 DF230	Захисна сітка для витяжної шафи з фільтром пацієнта InLine (упаковка з 2 шт.)	20286



ЗАСТОСУВАННЯ	ВИЗНАЧЕННЯ	АРТ-№
DF 10	Витяжна шафа з фільтром пацієнта InLine (вкл. 1х фільтр пацієнта InLine, 4х захисних сіток)	20289*
DF 230	Витяжна шафа з фільтром пацієнта InLine (вкл. 1х фільтр пацієнта InLine, 4х захисних сіток)	20290*

* Підходить для модернізації вже куплених фільтрувальних та витяжних систем.
Витяжну шафу можна просто прикріпити до з'єднання витяжного рукава.




ЗАСТОСУВАННЯ	ВИЗНАЧЕННЯ	АРТ-№
DF 10	Набір очищення витяжного рукава 50 (вкл. щітку для очищення з ручкою, 10х пластикових пакетів)	20291
DF 230	Набір очищення витяжного рукава 75 (вкл. щітку для очищення з ручкою, 10х пластикових пакетів)	20292



ЗАСТОСУВАННЯ	ВИЗНАЧЕННЯ	АРТ-№
DF 10	Щітка для очищення 50мм (упаковка з 3 шт.)	20315
DF 230	Щітка для очищення 75мм (упаковка з 3 шт.)	20316



ЗАСТОСУВАННЯ	ВИЗНАЧЕННЯ	АРТ-№
DF 10 DF230	Пластиковий пакет витяжного рукава 50/75 (упаковка з 10 шт.)	20293

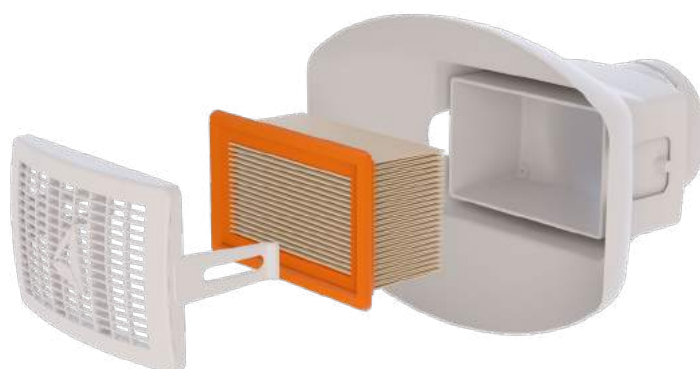


Ілюстрація




Ілюстрація

Технічні креслення

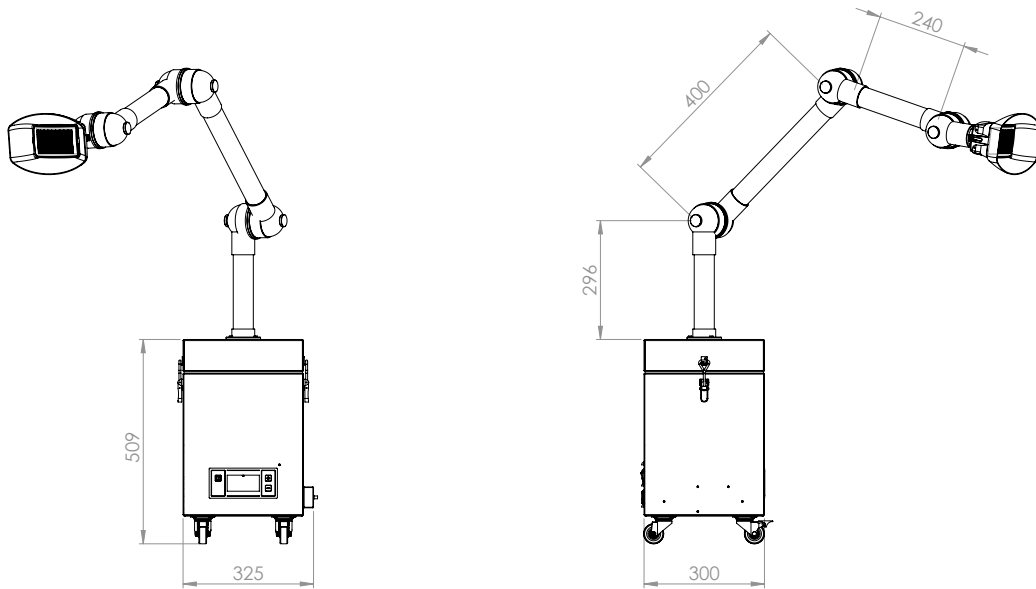

DF 10


Діапазон

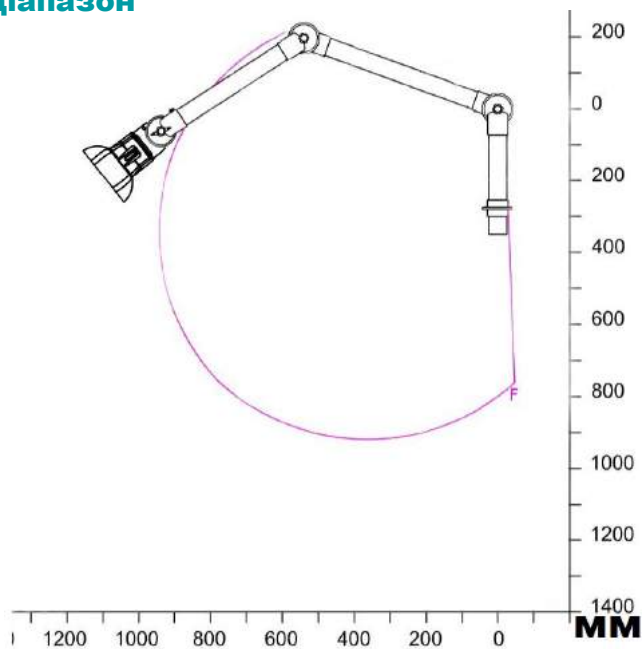

F: Modell 50-4737-1-4 / 5 / -50


ЛЮДИНА / СЕРЕДОВИЩЕ / МАШИНИ

Технічні креслення

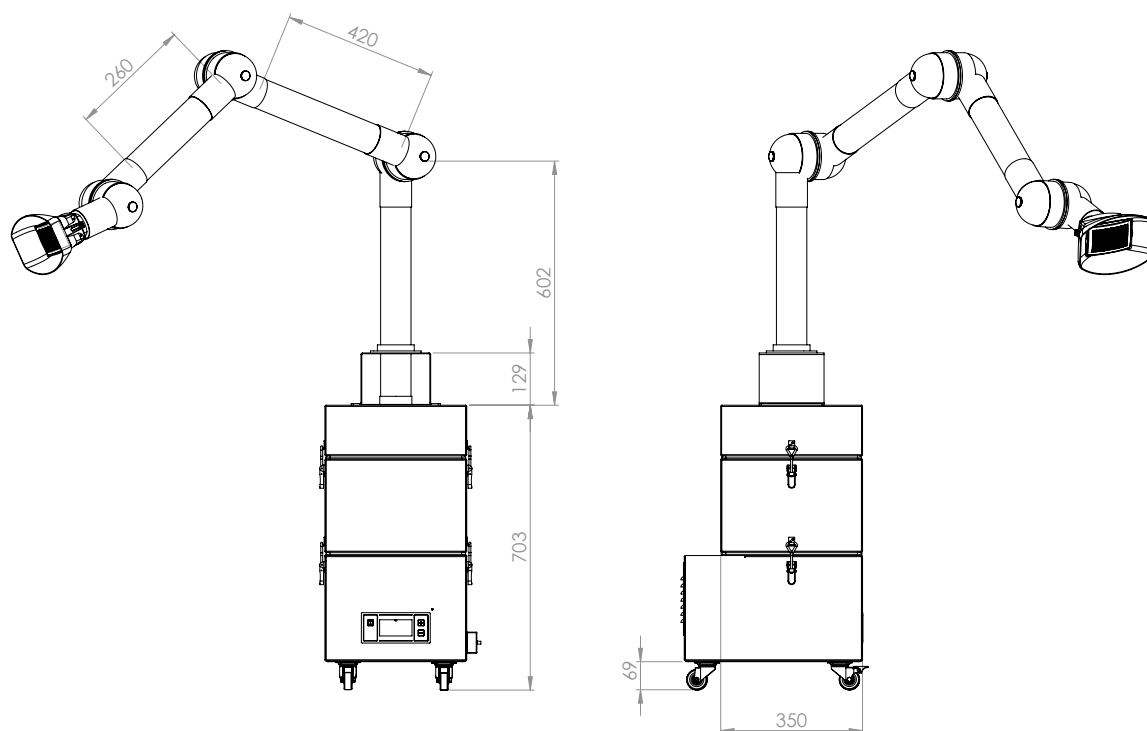

DF 230

Діапазон

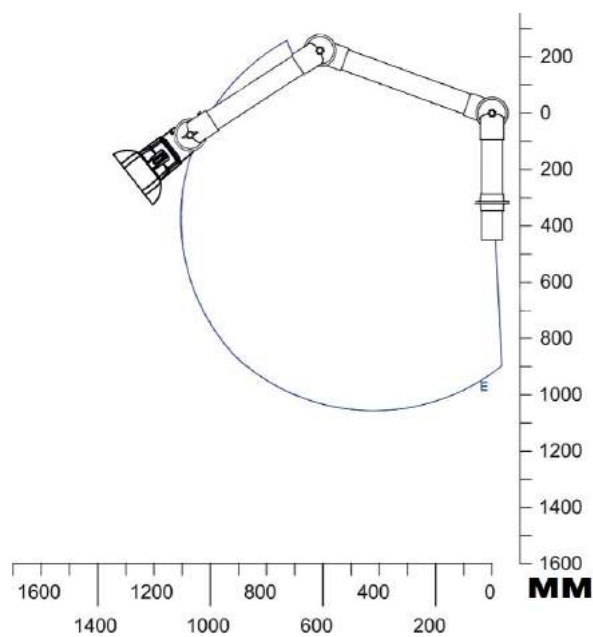

■ E: Modell 75-5545-1-4 / -5

ЛЮДИНА / СЕРЕДОВИЩЕ / МАШИНИ



ТЕХНОЛОГІЯ // ФІЛЬТРАЦІЇ / ВИТЯЖКИ / СЕРЕДОВИЩА

TBH GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 8
D-75334 Straubenhardt
Tel. +49 (0) 7082 / 9473 0
Fax +49 (0) 7082 / 9473 20

www.tbh.eu



Додаткова інформація про серії



Офіційний представник: ПП Галіт

📍 вул. 15 квітня 6Є, с. Байківці, Тернопільська обл. 47711

☎ 0-800-505-998

✉ office@galit.te.ua

🌐 www.galit.te.ua