


Elmasonic Med - це серія ефективних ультразвукових очисних пристроїв, пов'язаних з надійним попереднім очищенням медичних, стоматологічних та хірургічних інструментів та імплантатів. З ультразвуковою частотою 37 кГц можна видалити навіть найважче забруднення*

Очисні пристрої Elmasonic Med, що підходять для різних застосувань, мають об'єм баків від 3 до 90 літрів. Спеціальні хімічні засоби, розроблені компанією ELMA разом із практичними аксесуарами, такими як кошики, підставки для лотків тощо, забезпечують найкращі результати очищення.

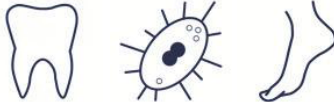

Розроблено для	Медичні центри • Лікарні • Стоматологічні практики • Центральні відділи стерильного постачання • Стоматологічні лабораторії • Студії татуювання та пірсингу • Салони по догляду за ногами.	
Очищає	Хірургічні, медичні або стоматологічні інструменти • Протези та імплантанти • Інструменти з галузей ортопедії, татуювання та пірсингу.	
Видаляє	Залишки крові, тканин і кісток • Жири • Виділення • Очистки зубів • Зубний камінь • Базалеві відкладення • Альгінати та штукатурки • Шліфувальні та полірувальні пасти • Віск • Флюс • Цементи • Мозолі та залишки шкіри • Інші забруднення.	

Термодезінфектор MELATHERM 10 Evolution

Це високотехнологічна мийно-дезінфекційна машина від компанії MELAG, розроблена спеціально для очищення та дезінфекції медичних інструментів.

Це обладнання особливо підходить для лікарень, стоматологічних клінік та інших медичних закладів, де надзвичайно важливе дотримання найвищих стандартів гігієни. Завдяки використанню тепла, мийних засобів та інтенсивного змивання, MELATHERM 10 Evolution видаляє мікроорганізми та забруднення, готуючи інструменти до подальшої стерилізації.

MELAtherm 10 Evolution	
БАЗОВА ВЕРСІЯ	Прилад, розташований під столом
Зовнішні розміри (Ш x В x Г)	60 см x 82 x 68 см
Робоча камера (Ш x В x Г)	46,5 см x 40,5 x 45 см
Вага	80 кг
Живлення	3Н, змінний струм, 230В/400В / 50Гц / 3x16 А / 9,3 кВт
Код	ME20021-DTB (230В) ME20020-DTA (400В)



Основні переваги та функції MELATHERM 10 Evolution:

- Компактність і місткість: пристрій займає мінімум місця, легко інтегрується з наявним обладнанням, при цьому вміщує багато інструментів за цикл.
- Ефективна дезінфекція: спеціальна система розпилення й контроль температури забезпечують ретельне очищення за медичними стандартами.
- Зручне управління: сенсорний дисплей дозволяє легко обирати програми та контролювати процес, зменшуючи ризик помилок.
- Енергоефективність: оптимізовані цикли споживають мінімум води й електроенергії, що знижує витрати та зменшує вплив на довкілля.
- Інтеграція з системами звітності: пристрій автоматично документує дані, що полегшує звітність і контроль якості.

Термодезінфектор MELATHERM 10 Evolution - це не просто обладнання для дезінфекції, а комплексне рішення для безпечної, ефективної та економічної обробки медичних інструментів. Висока технологічність, компактний дизайн та інтуїтивно зрозуміле управління роблять його ідеальним вибором для медичних установ будь-якого профілю медицини. Завдяки своїм перевагам, таким як енергоефективність, велика місткість та можливість інтеграції з внутрішніми системами закладу, MELATHERM 10 Evolution оптимізує процеси очищення та дезінфекції, одночасно знижуючи витрати на ресурси.

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАТОРІЙДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

Careclave — це компактний і простий у використанні автоклав. Він поєднує передові технології стерилізації з інтуїтивно зрозумілим управлінням, забезпечуючи надійний та ефективний процес стерилізації.

Careclave оптимізований для економії простору, швидких циклів і легкості у використанні, що робить його ідеальним рішенням для професіоналів.

Автоклави серії Careclave мають 3 програми для режиму Careclave:

- Care-Therm – зовнішнє та внутрішнє очищення/16-18 хв
- Care-S – 134°C час витримки 3,5 хв/12-23 хв
- Care-B Kombi – зовнішнє та внутрішнє очищення та дод. стерилізація 134°C час витримки 3,5 хв/33-34 хв

Та 4 програми для режиму Vacuklav:

- Universal-B – 134°C, час витримки 5,5 хв / 13-22 хв.
- Schon-B – 121°C, час витримки 20,5 хв / 27-37 хв.
- Quick-S – 134°C, час витримки 3,5 хв / 9-15 хв.
- Prions-B – 134°C, час витримки 20,5 хв / 28-37 хв.



CARECLAVE	
Розміри (Ш x В x Г)	48 x 50 x 65,3 см
Вага	69 кг
Розміри / Об'єм камери	Ø 25 x 35 см довжини / 18 л.
Об'єм завантаження камери	Макс. 11 кг інструментів / 2кг текстилю
Об'єм загрузки Carebox	Макс. 8. Інструменти з порожнистим корпусом
Живлення	220-240 В, 50 Гц, 3 кВт
Підключення стисненого повітря	4-80 бар
Подача води	Макс. 350C 1-10 бар. Потрібна додаткова обробка води
Код	ME10618

Cliniclave 45 — це висококласний автоклав, розроблений для великих медичних установ, таких як лікарні та клініки, де потрібен ефективний і надійний процес стерилізації. Завдяки інноваційним технологіям, цей автоклав забезпечує чіткий контроль температури та тиску, що гарантує високий рівень стерилізації.



Основні переваги Cliniclave 45:

- Висока продуктивність: швидке оброблення великої кількості інструментів завдяки великій місткості.
- Інноваційна технологія: система контролю температури і тиску для найвищих стандартів стерилізації.
- Легкість у використанні: зрозумілий інтерфейс для простоти роботи.
- Надійність і довговічність: виготовлений із високоякісних матеріалів для тривалого терміну служби.
- Безпека: системи безпеки для автоматичного вимкнення в разі неполадок.
- Екологічність: Енергоефективні технології, що знижують вплив на довкілля.

Cliniclave 45 M — це автоклав для стерилізації великої місткості, розроблений для медичних установ, таких як клініки та лікарні, де потрібна надійність і ефективність в обробці інструментів. Завдяки своїм великим розмірам камери, він дозволяє стерилізувати великі обсяги інструментів за один цикл, що ідеально підходить для медичних закладів з високим обсягом роботи.



Основні переваги Cliniclave 45 M:

- Велика місткість: простора камера для стерилізації великої кількості інструментів, ідеально для медичних закладів.
- MECLA control: забезпечує стабільні результати стерилізації для максимальної безпеки.
- Ефективна робота: швидкі цикли стерилізації зменшують час простою і підвищують продуктивність.
- Енергоефективність: оптимізує енергоспоживання при високих стандартах стерилізації.

	Cliniclave 45	Cliniclave 45 M
Розміри (Ш x В x Г)	65 x 160 x 91 см	65 x 160 x 153 см
Розміри / Об'єм камери	Глибина 72 см, Ø 44 , об'єм 105 л.	Глибина 134 см, Ø 44 , об'єм 200 л.
Об'єм завантаження камери	Макс. 35 кг інструментів / 7 кг текстилю	Макс. 70 кг інструментів / 14 кг текстилю
Вага без завантаження	255 кг	315 кг
Робоча вага	275 кг	370 кг
Напруга та частота	3x380-415 В, 50/60 Гц, 10.500 Вт, 16 А	3x380-415 В, 50/60 Гц, 13.500 Вт, 32 А
Код	ME10045LS	ME10048LS

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

MELAG постійно вдосконалює стерилізацію з **Vacuclave® 550**, який оснащений великою 50-літровою камерою. Цей автоклав забезпечує енергоефективну стерилізацію, економить час і гроші, та вміщує до 25 кг інструментів на 16 лотках.

Vacuclave 550		
	Робота 15 amp	Робота 13 amp
Розміри (Ш x В x Г)	63,6 x 59,0 x 71,5 см	
Вага	98 кг (робоча вага до 127 кг)	
Розміри / Об'єм камери	Ø 45 x 38 см, 53 л.	
Кількість завантаження	25 кг без упаковки, 11 кг в упаковці, 15,5 кг зMELAstore, 3.5 кг текстилю	17,5 кг без упаковки, 9 кг в упаковці, 14 кг зMELAstore, 2 кг текстилю
Об'єм завантаження камери	8 кг інструментів /2 кг текстилю.	
Потужність		
Живлення	220-230 В / 50-60 Гц / 2.700 Ват	
Код	ME10550	



Vacuclave® 550 гарантує швидку стерилізацію великої кількості інструментів з широким набором програм:

Програми		Час роботи (від min. до max. навантаженого) DRYtelligence® **	Сушіння	
			DRYtelligence® **	Контрольоване за часом
Universal-B	134 °C, час витримки: 5,5 хв	13 – 43 хв	> 4 хв	13 хв
Quick-S	134 °C, час витримки: 3,5 хв	12 – 33 хв	> 4 хв	13 хв
Gentle-B	121 °C, час витримки: 20,5 хв	25 – 62 хв	> 4 хв	13 хв
Prion-B	134 °C, час витримки: 20,5 хв	28 – 58 хв	> 4 хв	13 хв

* Час роботи в 13 amp може бути збільшений до 10 хвилин
 ** DRYtelligence® автоматично адаптує процес сушіння до вашого завантаження. Завдяки розумному сушінню завжди досягаються оптимальні результати сушіння.

Преміум-автоклав з системою DRYtelligence забезпечує швидку стерилізацію парю. Цей пристрій ідеально підходить для обробки упакованих інструментів за 20 хвилин за допомогою швидкої програми «В», а неупакованих — всього за 10 хвилин, включаючи фракціонований попередній вакуум і осушування.

Автоклави серії Vacuclav мають 5 програм:

- Універсальна програма 134°C / 2 бар.
- Швидка програма «В» 134°C / 2 бар.
- Швидка програма «S» 134°C / 2 бар.
- Антипріонна програма 134°C / 2 бар.
- М'яка програма 121°C / 1 бар.

2 контрольні програми:

- Вакуум-тест.
- Тест «Боуї-Дік».



Vacuclav® 40B+ Evolution

Технічні характеристики	Vacuclav 40 B+ Evolution (з підключенням)	Vacuclav 41 B+ Evolution (автономний)	Vacuclav 43 B+ Evolution (автономний)	Vacuclav 44 B+ Evolution (з підключенням)
Розмір та об'єм резервуару	25 x 35 см / 18 л		25 x 45 см / 23 л	
Об'єм завантаження	до 9 кг інструментів / до 2 кг текстилю		до 9 кг інструментів / до 2,5 кг текстилю	
Зовнішні розміри (ШхВхГ)	46 см x 50 см x 55 см Висота з дисплеєм – 56 см Ніжки автоклаву розраховані на стільницю глибиною 50 см		46 см x 50 см x 68 см Висота з дисплеєм – 56 см Ніжки автоклаву розраховані на стільницю глибиною 60 см	
Вага	55 кг	60 кг	69 кг	64 кг
Живлення	220-240В / 50-60 / 3400 Вт			
Код	ME10080	ME10081	ME10083	ME10084

Автоклави серії Vacuclav належать до класу «В» відповідно до європейського стандарту EN 13060 і працюють на основі попереднього вакууму.

Спочатку з камери відкачується повітря за допомогою потужного вакууму, після чого кілька разів впускається і знову відкачується водяна пара. Це забезпечує повне видалення повітря перед початком стерилізації з камери, упакованих пористих інструментів та текстильних виробів. Для ефективного осушування, що важливо для тривалого зберігання стерилізованого матеріалу, Vacuclav створює вакуум наприкінці процедури. Датчики і сучасні мікропроцесорні засоби контролюють параметри тиску та температури для надійної стерилізації.



Автоклави MELAG Prime Line, такі як Vacuclave 318 і 323, забезпечують відмінне співвідношення ціни та якості з інноваціями для підвищення продуктивності, покращеного сушіння та повної відстежуваності.

VACUCLAVE 318 і VACUCLAVE 323:

- Стерилізація класу B:
 - Vacuclave 323:** стерилізація до 8 кг на 5 лотках за 16-31 хвилину (плюс сушіння).
 - Vacuclave 318:** стерилізація до 7 кг на 5 лотках за 15-27 хвилин (плюс сушіння).
- Сушіння DRYtelligence: процес сушіння з скороченням часу до 80%.
- Сенсорний дисплей: інтуїтивний сенсорний екран з LED підсвічуванням.
- Схвалення ProContro: автентифікація користувача та друк етикеток з штрих-кодом без додаткового програмного забезпечення.
- Підключення та реєстрація даних: збереження параметрів стерилізації через USB або мережу для відповідності вимогам.
- Автономна концепція: вбудовані резервуари для води та ефективне повітряне охолодження без охолоджувальної води.
- Енергозберігаючий режим Power Save: нагрівання та дисплей переходять у режим очікування між стерилізаціями.
- Рутинна концепція EasyCare: зручна заміна фільтрів, очищення бака та водопостачання.

Vacuclave 318

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	48 кг
Розміри / Об'єм камери	Ø 25 см x 35 см. 17 л.
Об'єм завантаження камери	7 кг інструментів /1,8 кг текстилю
Потужність	2.100 Вт
Живлення	220 - 230 В, 50 - 60 Гц.
Код	ME10318



Vacuclave 323

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	49 кг
Розміри / Об'єм камери	Ø 25 см x 45 см. 23 л.
Об'єм завантаження камери	8 кг інструментів /2 кг текстилю.
Потужність	2.100 Вт
Живлення	220 - 230 В, 50 - 60 Гц.
Код	ME10323

Автоклави MELAG Pro-Class отримали оновлення! Модель Pro Line має камери об'ємом 17 літрів (Vacuclave 118) та 23 літри (Vacuclave 123), забезпечуючи ефективну та ресурсозберігаючу стерилізацію.

VACUCLAVE 118 І VACUCLAVE 123:

- Потужний вакуумний процес класу В:
 - Vacuclave 118:** стерилізація до 5 кг на 5 лотках за 15-27 хвилин (плюс сушіння).
 - Vacuclave 123:** стерилізація до 6 кг на 5 лотках за 16-31 хвилину (плюс сушіння).
- Сенсорний дисплей: сенсорний екран з LED підсвічуванням для легкого керування.
- Підключення та реєстрація даних: збереження параметрів стерилізації через USB або мережу для відповідності вимогам.
- Автономна концепція: інтегровані резервуари для води та ефективне повітряне охолодження для роботи без охолоджувальної води.
- Енергозберігаючий режим Power Save: нагрівання та дисплей переходять у режим очікування між стерилізаціями.
- Рутинна концепція EasyCare: зручні оптимізації для заміни фільтрів, очищення бака та водопостачання.

Vacuclave 118

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	48 кг
Розміри / Об'єм камери	∅ 25 см x 35 см. 17 л.
Об'єм завантаження камери	5 кг інструментів /1,8 кг текстилю.
Потужність	2.100 Вт
Живлення	220 - 230 В, 50 - 60 Гц.
Код	ME10118



Vacuclave 123

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	49 кг
Розміри / Об'єм камери	∅ 25 см x 45 см. 23 л.
Об'єм завантаження камери	6 кг інструментів /2 кг текстилю.
Потужність	2.100 Вт
Живлення	220 - 230 В, 50 - 60 Гц.
Код	ME10123

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАТОРІЙДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ

Автоклави Pro Line класу S є доступною альтернативою для клінік, які не потребують автоклавів класу B. Модель Vacuclave® 123 S стерилізує навіть упаковані інструменти з простими порожнистими корпусами, як-от ножиці та тримачі голок. Інтуїтивне управління через сенсорний дисплей Smart-Touch дозволяє легко користуватися пристроєм навіть у рукавичках, а вбудовані USB та мережеві інтерфейси забезпечують швидку реєстрацію даних.

Автоклави доступні з об'ємом камер 17 та 23 літри, можуть стерилізувати до 5 кг інструментів на 5 лотках за 13-25 хвилин (плюс сушка), що робить їх зручними та швидкими в роботі.



Vacuclave 118 s

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см (для поверхні шириною 60 см)
Вага	46 кг
Розміри / об'єм камери	35 см, Ø 25 см / 17 літрів
Об'єм завантаження камери	макс. 4 кг інструментів / 1 кг текстилю
Потужність	2100 Вт
Живлення	220-230 В, 50-60 Гц
Код	ME10118S

Vacuclave 123 s

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см (для поверхні шириною 60 см)
Вага	47 кг
Розміри / об'єм камери	45 см, Ø 25 см / 23 літри
Об'єм завантаження камери	макс. 5 кг інструментів / 1 кг текстилю
Потужність	2100 Вт
Живлення	220-230 В, 50-60 Гц
Код	ME10123S



NEW

Vacuclave 105 - базовий автоклав Pro Line класу В забезпечує безпечну, зручну та швидку стерилізацію.

- Стерилізація до 2 кг на 2 лотках за 7-15 хвилин (плюс сушіння) в камері 4,7 л.
- Регульоване сушіння: налаштування тривалості залежно від типів вантажу.
- Сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, доступний навіть у медичних рукавичках.
- Підключення та реєстрація даних: збереження результатів через USB чи мережу, або друк з MELAprint 80.
- Автономність: зовнішні контейнери для води і повітряне охолодження без охолоджувальної води.
- Енергозбереження Power Save: нагрівач і дисплей переходять у режим очікування між стерилізаціями.



Чемпіон за співвідношенням ціни та якості: **Vacuclave 305** Prime Line пропонує відмінні результати сушіння та розширені функції затвердження циклів.



- Інтелектуальне сушіння DRYtelligence: оптимальні результати завдяки алгоритму.
- ProControl: затвердження циклів і автентифікація користувачів на дисплеї без додаткового ПО.
- Друк етикеток зі штрих-кодом: MELAprint 80 для маркування та контролю стерилізації.

	Pro line	Prime line
	Vacuclave 105	Vacuclave 305
Розміри (Ш x В x Г)	30 x 30 x 59 см (для поверхні шириною 60 см)	
Вага	28 кг	
Розміри / Об'єм камери	8 x 2,3 x 31 см. 4,7 л.	
Об'єм завантаження камери	Max 2 кг інструментів / 0,45 кг текстилю	
Потужність	2.100 Вт	
Живлення	200-230 В / 50-60 Гц	
Код	ME10105	ME10305

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОГО ПАКУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Пакувальний пристрій **Melaseal 100+** дозволяє надійно запакувати простерилізований інструмент, щоб захистити його від повторного забруднення в процесі зберігання.

MELaseal® 100+	
Зовнішні розміри	41,5 x 22 x 15 см
Вага	5,4 кг
Живлення	230 В / 50 Гц / 300 Вт
Код	ME10211



Пакувальний пристрій **MELaseal 200** поєднує функції MELaseal 100+ з перевагами машин роликового типу, відповідаючи стандарту EN ISO 11607-2.



Пристрій готується до роботи за 90 секунд, а процес герметизації триває лише 2 секунди, забезпечуючи безперервний режим. MELaseal 200 оснащений дисплеєм, USB-портами, сенсорними клавішами, системою обліку користувачів і можливістю прямого зв'язку з ПК, що робить його еталоном у своєму класі.

MELaseal 200+	
Розміри (В x Ш x Г)	15 x 41,5 x 24 см
Вага	5,4 кг
Живлення	200-240 V, 50/60 Hz
Код	ME10120

MELaseal 300 — це компактний, вискоефективний пакувальний пристрій із Smart-Touch дисплеєм, що підходить для будь-якої лінії стерилізації. Апарат готовий до роботи вже за 90 секунд, а завдяки автоматичній подачі плівки він забезпечує безперервний процес пакування великого обсягу інструментів без затримок.

MELaseal 300 поєднує швидкість і надійність, забезпечуючи якісне запаювання, а енергозберігаючі технології знижують витрати на обслуговування, роблячи цей пристрій економічно вигідним для медичних установ.

MELaseal 300+	
Розміри (В x Ш x Г)	16 x 36 x 17,5 см
Вага	5,6 кг
Живлення	200-240 V, 50/60 Hz
Код	ME10300



МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБОРАТОРІЙДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

MELAfol (плівки для СТЕРИЛЬНОГО ПАКУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ)

Код ME0502	ширина 5 см, довжина рулона 200 м
Код ME0752	ширина 7,5 см, довжина рулона 200 м
Код ME01002	ширина 10 см, довжина рулона 200 м
Код ME01502	ширина 15 см, довжина рулона 200 м
Код ME02002	ширина 20 см, довжина рулона 200 м
Код ME02502	ширина 25 см, довжина рулона 200 м

ДЛЯ ЕКОНОМНОГО ВИРОБНИЦТВА ДИСТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ:

MELAdest 65 забезпечує найбільш економічне та недороге виробництво високоякісної дистильованої води для автоклавів і інших цілей медичної практики.



Meladest 65

Зовнішні розміри	25 x 38 см
Об'єм	4 л
Вага	4,2 кг
Продуктивність	приблизно 0,7 л/год
Живлення	230 В / 50 Гц / 800 Вт
Код	ME01065

Chamber Protect

Набір для очищення камер MELAG

Надійне очищення та тривалий захист, завдяки якому ваш автоклав сяє. Новий набір для очищення камер MELAG видаляє навіть невидимі для ока забруднення і, таким чином, зберігає камеру від знебарвлення та відкладень.

Користуйтеся перевагами набору Chamber Protect під час очищення камери та лотків раз на тиждень:


- Засіб для очищення з 50 серветками без ворсу та 1 тканиною з мікрофібри.
- Особливо дбайливий до матеріалу камери та ущільнювача дверцят.
- Схвалено в результаті обширних випробувань на сумісність матеріалів.
- Ідеально підходить до всіх парових стерилізаторів MELAG.



Код: ME01081



При регулярному
використанні
Chamber Protect

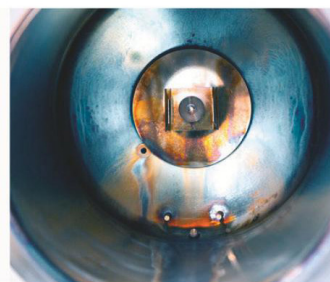


Без регулярного
очищення камери



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програмне забезпечення **MELAttrace** – це рішення для швидкого та надійного ведення документації і затвердження всієї звітності в сфері обробки інструментів. У програму внесенні етапи очищення, дезінфекції та стерилізації. Кожен протокол має захист від фальсифікування.

Інтерфейс MELAttrace розрахований на використання як сенсорного екрану, так і мишки.

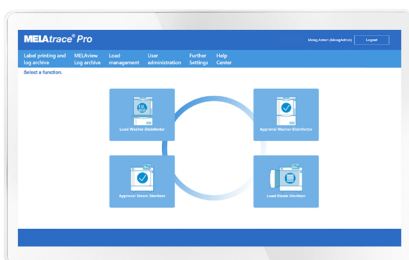

MELAttrace

Процесор	1 GHz (x86) чи 1,4 GHz (x64), 2 GHz Multi-Core (рекомендовано)
Оперативна пам'ять	1 GB RAM, 4 GB RAM (рекомендовано)
Пам'ять на диску	7 GB простору для інсталяції
	USB порт
	Інтернет з'єднання
ОС	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Windows Server 2012
Програмне забезпечення	Microsoft .NET Framework 3.5/4.5/4.6, Adobe Acrobat Reader
	Windows Media Player
	MELAvue 3 (включено в доставку)
Код	ME21138

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАТОРІЙДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

ПРИНТЕР ДЛЯ ДРУКУ ЕТИКЕТОК PREMIUM-КЛАСУ

MELAprint 60 сумісний з автоклавами класу Premium, Cliniclave та MELAtrase. Він підключається безпосередньо до мережевого інтерфейсу автоклаву і до існуючої комп'ютерної мережі. Після завершення програми стерилізації на екрані автоклаву відображаються етикетки для ідентифікації інструментів. Для роботи не потрібен додатковий ПК або зовнішнє програмне забезпечення.



MELAprint 60

Розміри (ВхШхГ)	15,5 x 20,5 x 16 см
Електричний роз'єм	змінний струм 110-240 В ±10 %, 50/60 Гц
Температура навколишнього середовища	5 – 45°С
Відносна вологість повітря	20 – 90 % (при 40 °С)
Метод друку	термічний
Роздільна здатність при друці	203 dpi
Швидкість друку	150 мм/с
Ширина друку	макс. 80 мм
Довговічність надрукованих етикеток	25 років (при оптимальних умовах)
Код	ME01160
Етикетки MELAprint 60	ME41942

РУЧНИЙ СКАНЕР ШТРИХ-КОДІВ

Цей ручний сканер штрих-кодів підключається до USB-порту робочого ПК та призначений для зчитування штрих-кодів промивальних касет MELAstore-Trays або стерилізаційних контейнерів MELAstore-Boxes в MELAtrase для прив'язки завантаження до циклу MELAtherm або до автоклаву.

З цим ручним сканером ви також можете зчитувати штрих-коди MELAprint 60, щоб прив'язати цю інформацію до записів про пацієнтів.

Поставка, що включає в себе тримач – код **ME01110**.



GALIT


КАСЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Касети для стерилізації GALIT виготовлені за унікальною технологією, яка надає їм матовий вигляд і усуває гострі кромки. Вони виготовлені з нержавіючої сталі та оснащені силіконовими вставками.


Касети мають відтягуючий зажим для фіксації інструментів, який надійно тримає їх у закритому положенні. Силіконові вставки доступні у шести кольорах: фіолетовий, жовтий, пурпурний, червоний, синій і зелений.



ДЛЯ ТРЬОХ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 5,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.003-00

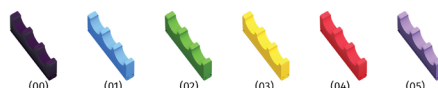


ДЛЯ П'ЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 7,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.005-04

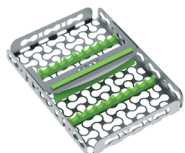

ДЛЯ ДЕСЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 13,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.010-02



ДЛЯ П'ЯТНАДЦЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 19,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.015-01

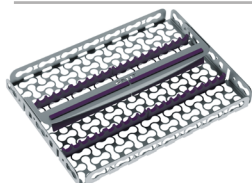

ДЛЯ ДВАДЦЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 25,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.020-05



*останні дві цифри кода вказують на колір силіконових встав

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКА

АПАРАТ
VECTOR

ІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯ

ДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ

ДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

Прайс | Ультразвукові ванни Elma

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	1097278 1108916 2070300000 1117632	Ультразвукова ванна Elmasonic Med 30 ✓ Корзина для Elmasonic Med 30 ✓ Вставна кришка для двох склянок для Elmasonic Med 30 ✓ Дві склянки з кришкою і кільцем 600 мл	60 260
2	1100677 1113050 2070930000 1117632	Ультразвукова ванна Elmasonic Med 60 ✓ Корзина для Elmasonic Med 60 ✓ Вставна кришка для двох склянок для Elmasonic Med 60 ✓ дві склянки з кришкою і кільцем 600 мл	98 040

Прайс | Стерилізаційне обладнання MELAG

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	ME10045LS ME11056 ME04517 ME04520 ME00260 ME01056 ME01145 ME80550 ME46891 ME28887	Великий стерилізатор для медичних закладів Cliniclave 45 - Установка зворотного осмосу MELAdem ®56 - Стелаж на дві корзини або чотири піддони - Два лотки - Корзина для інструментів - Пристрій перекривання води - Завантажувальний візок - Напрямна рейка „comfort“ для Cliniclave 45 - Контактний лотік для розміщення партії - Гак для витягування	2 435 300
2	ME10048LS ME11057 ME04517 ME04520 ME00260 ME01056 ME01145 ME80570 ME46891 ME28887	Великий стерилізатор для медичних закладів Cliniclave 45 M - Установка зворотного осмосу MELAdem ®56M - Два стелажі на дві корзини або чотири піддони - Чотири лотки - Дві корзини для інструментів - Пристрій перекривання води - Завантажувальний візок - Напрямна рейка „comfort“ для Cliniclave 45M - Два контактних лотіки для розміщення партії - Гак для витягування	2 790 620
3	ME10618 ME21778 ME21774 ME84740 ME82400 ME00280 ME10708 ME02607	Стерилізатор паровий Careclave - Тримач короткий для 4 коротких і 2 вузьких лотків - три короткі лотки (18,5 x 13,5) - олія для догляду - Тримач для піддонів E plus - три стандартних піддони (29 x 19) - Carebox blue - вісім адаптерів в асортименті	876 570
4	ME10550 ME22606	Стерилізатор паровий Vacuclave 550 пристрій для витягування VC550 vst.	1 099 410

	ME22485 ME00550 ME00280 ME00230 ME01047	• кронштейн висувний VC550 • два лотка Vacuclave 550 • десять лотків Vacuclave 550 коротких • два лотка Vacuclave 550 довгих • Підготовка води Meladem 47	
5	ME20021 ME00197	Термодезінфектор MELAtherm 10 DTB Evolution (230V) • Базовий кошик	690 270
6	ME20020 ME00197	Термодезінфектор MELAtherm 10 DTA Evolution (400V) • Базовий кошик	690 270
7	ME10052 ME40246 ME00246	Стерилізатор паровий Vacuklav 24BL+ • Тримач лотків C для Vacuklav 24 BL+ • Шість лотків (54 x 19cm)	423 600
8	ME10118 ME00280 ME82620	Стерилізатор паровий Vacuclave 118 • Три лотки (29 x 19cm) • Тримач для лотків A plus	238 510
9	ME10123 ME00230 ME82630	Стерилізатор паровий Vacuclave 123 • Три лотки (42 x 19cm) • Тримач для лотків A plus	237 290
10	ME10318 ME00280 ME82620	Стерилізатор паровий Vacuclave 318 • Три лотки (29 x 19cm) • Тримач для лотків A plus	276 150
11	ME10323 ME00230 ME82630	Стерилізатор паровий Vacuclave 323 • Три лотки (42 x 19cm) • Тримач для лотків A plus	295 930
12	ME10080 ME82400 ME00280	Стерилізатор паровий Vacuklav 40 B+ Evolution • Тримач для лотків • Шість лотків (29 X 19)	479 190
13	ME10081 ME82400 ME00280	Стерилізатор паровий Vacuklav 41 B+ Evolution • Тримач для лотків • Шість лотків (29 X 19)	479 190
14	ME10083 ME82700 ME00230	Стерилізатор паровий Vacuklav 43 B+ Evolution • Тримач для лотків • Шість лотків (42 X 19)	520 410
15	ME10084 ME82700 ME00230	Стерилізатор паровий Vacuklav 44 B+ Evolution • Тримач для лотків • Шість лотків (42 X 19)	520 410
16	ME10211 ME10111	Пакувальна машина MELAseal 100+ • Тримач рулонів Comfort	42 900
17	ME10120 ME10111	Пакувальна машина MELAseal 200 • Тримач рулонів Comfort	66 480
18	ME10300	Пакувальна машина MELAseal 300	103 320
19	ME00142	Тримач рулонів Flex для MELAseal 300	23 970
20	ME71490	Ніжка для тримача рулонів MELAseal 300	1 450
21	ME00141	Робочий стіл Comfort для MELAseal 300	29 440
22	ME77750	Робочий стіл Standart для MELAseal 300	12 250
23	ME01065	Дистилятор MELAdest 65	20 990
24	ME01160	Принтер для друку етикеток MELAprint® 60	41 330
25	ME41942	Етикетки MELAprint 60	11 580
26	ME01144	Принтер для друку етикеток MELAprint® 44 log printer	34 760
27	ME01075	Гелікс тест MELAcontrol Pro	11 440
28	ME01047	Установка зворотного осмосу MELAdem 47	72 140
29	ME01038	Установка зворотного осмосу MELAdem 53	77 620

30	ME01081	Набір для очищення камер Chamber Protect	2 660
31	ME02002	MELAfol 2002 (20 cm x 200 m)	3 060
32	ME01002	MELAfol 1002 (10 cm x 200 m)	1 870
33	ME00502	MELAfol 502 (5 cm x 200 m)	1 310
34	ME02502	MELAfol 2502 (25 x 200 m)	3 830
35	ME01502	MELAfol 1502 (15 cm x 200 m)	2 480
36	ME00752	MELAfol 752 (7,5 cm x 200 m)	1 530
37	ME11630	Очисний засіб MEtherm 51	4 740
38	ME11621	Нейтралізатор C MEtherm 55	3 580
39	ME11627	Ополіскувач MEtherm 61	1 170
40	ME01110	Сканер штрих коду	9 470
41	ME10118S ME00280 ME82620	Стерилізатор паровий Vacuclave 118S • Три лотки (29 x 19cm) • Тримач для лотків A plus	205 940
42	ME10123S ME00230 ME82630	Стерилізатор паровий Vacuclave 123s • Три лотки (42 x 19cm) • Тримач для лотків A plus	230 960
43	ME10105 ME23446	Швидкий автоклав Vacuclave 105 • Два лотки	174 640
44	ME10305 ME23446	Швидкий автоклав Vacuclave 305 • Два лотки	187 650
45	ME10105SB ME23446	Швидкий автоклав SteriHero Speed+ • Два лотки	165 440

Дата: 21.04.2026