



Компанія Acteon – це світовий лідер у виробництві оптичних і рентгенівських систем візуалізації, стоматологічного програмного забезпечення, ультразвукового обладнання та точних інструментів.

Компанія Acteon надає комплексні, інтуїтивно зрозумілі рішення для робочого процесу, які ставлять технології на службу людям і допомагають медичним працівникам відновлювати здоров'я пацієнтів ефективно, результативно та економічно.

Acteon пропонує прилади, які підходять для всіх видів допомоги від консервативної стоматології до кісткової хірургії. Системи панорамної візуалізації Acteon дозволяють стоматологам без зусиль досягти найвищого рівня якості стоматологічної допомоги.

Компанія GALIT є уповноваженим представником АСТЕОН Group в Україні і розповсюджує продукцію з рекомендованими виробником цінами.




Sopix 2

Система для радіовізіографії з високою роздільною здатністю. Завдяки використанню CCD сенсорів SOPIX 2 дозволяє отримати висококонтрастні знімки з високою точністю зображення, що є необхідним для встановлення точного діагнозу пацієнта. Сенсор здатний отримати 100 000 знімків. Для уникнення помилки, кабель спеціально підсилений в його найбільш навантаженій частині. У сенсора заокруглені кути для комфорту пацієнта. На бокові грані сенсора нанесена біла лінія для кращої видимості при позиціонуванні в роті пацієнта.

Завдяки ексклюзивній системі E.C.S. – системі управління експозицією – SOPIX 2 може компенсувати недочасу чи перевищення часу експозиції, навіть якщо час експозиції дуже малий. Для отримання знімків необхідно виставити таймер один раз, автоматичний контроль витримки запобігає преекспозиції сенсора, що дозволяє завжди отримувати знімки високої якості.


Драйвера SOPIX 2 відповідають міжнародному стандарту TWAIN і працюють на програмному забезпеченні Windows.

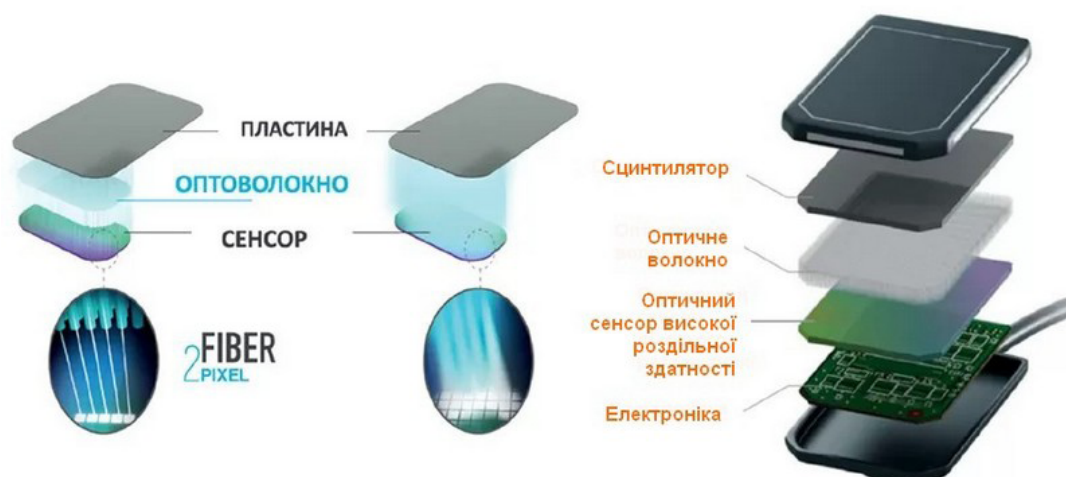



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SOPIX. РОЗМІР 1:	
Датчик розміру №1	38,9 x 24,9 x 5,3 мм, 1,5 Мп
Технологія сенсору	CMOS з CSI синтілятором і оптоволоконном
Активна поверхня	600 мм² (20 x 30 мм)
Теоретична роздільна здатність	25 пл/мм
Фактична роздільна здатність	18 пл/мм
Кількість пікселів	1,5 млн (1000 x 1500)
Довжина кабелю датчика	0,7 м
Довжина кабелю контролеру	3 м
Швидкість отримання знімку	2,5 сек.
Режим осцилоскопу для швидкої діагностики рентгена і режим виміру вольтару на датчику:	
Twain	сумісний
Розмір контролеру	27,5 x 98 x 13
Вага	18 гр
USB	5V
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Датчик, USB2 контролер, USB кабель довжиною 3,7 м, тримач датчика, 10 чохлів для датчика, ПО Sopro Imaging і ліцензія.	

Windows	S_802_0004
Mac	S_802_2000
SOPIX 2	S_802_0014
SOPIX 2 INSIDE	S_802_5012

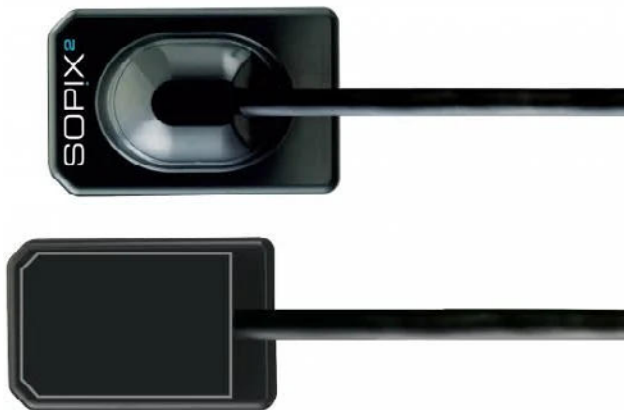

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

ФАНТОМИ
FRASACO

TECNODENT

КОМПРЕСОРИ ТА
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

BIEN AIR

ПРОДУКЦІЯ
YOSHIDA

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ
DÜRR DENTAL

ELMA

МОНИТОРИ
NEOVO

МІКРОМОТОРИ
IONUX

ОСВІТЛЕННЯ

КАМЕРИ
FUTUDENT

ASTEON

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ
ІМПЛАНТОЛОГІЇ

АПАРАТ
VECTOR

МІКРОСКОПИ
LABOMED

FUSSEN

ZIRKONZAHN

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

X-mind DC – сучасний інтраоральний високочастотний рентген з мікропроцесорним управлінням і сенсорним пультом дистанційного керування (можливість підключення 2х рентгеновських апаратів).

X-Mind DC поєднує у собі найкращі характеристики, європейський дизайн, а також простоту у використанні та обслуговуванні. Він відрізняється від рентгенів попереднього покоління малою вагою, високою стабільністю і кращим захистом від перепадів електроживлення.

Променева доза для пацієнта знижена на 50% за рахунок меншого часу експозиції. Рентген X-mind DC повністю сумісний з будь-якими радіовізіографами.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Варіанти виконання:	настінний, стельовий, мобільний
Споживана потужність	1,4 kVA
Фокусна відстань	31 см
Довжина плеча	80 см
Трубка	Toshiba DG-073B-DC
Поворот конуса	на 395°
Фокальна пляма	0,7 мм
Час експозиції змінюється	від 0,02 до 3,2 с
Анодний струм	4-8 мА
Вибір робочої напруги	60-70 кВ
Загальна фільтрація	2 мм
Вага рентгену	25 кг
Вага голови рентгену	5,5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Комплект з рентгеновською головою, конус, плече, таймер, пульт дистанційного керування.

X-MIND unity - модернізована рентген система із запатентованою ACE технологією.

При роботі з візіографами SOPIX INSIDE та SOPIX 2 INSIDE доза опромінення знижується вдвічі.

В рентгені X-MIND unity проведено попереднє налаштування для підключення візіографів серії SOPIX INSIDE. Датчики візіографів SOPIX INSIDE та SOPIX 2 INSIDE просто підключаються безпосередньо до рентгену через USB роз'єм, що дозволяє візіографу ефективно керувати часом експозиції та зменшує ризик падіння датчика.

Доза радіації менша до 52%, у порівнянні зі звичайними візіографами. Відсутність зайвих дротів підвищує комфорт в роботі.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Варіанти виконання:	настінний, мобільний
Класифікація	Клас 1, тип В
Максимальний час експозиції	2 сек
Живлення	100/240В – 50/60 Гц.
Вага	23 кг
Рентген труба	60/65/70 кВ/7 мА (Toshiba D-041)
Таймер	керується мікропроцесором
Фокальна пляма	0,4 мм
Кріплення плеча знизу з довгим конусом і плечем	80см
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Комплект з рентгенівською головою 60/65/70 кв, плавний позиціонер, таймер і настінний кронштейн	



SERVOTOME

Високочастотний електрокоагулятор для ортодонції, пародонтології і хірургії порожнини рота. Servotome допомагає зберегти біологічні тканини: тонкий і рівний зріз забезпечує швидке загоєння.


РОЗСІЧЕННЯ ТА КОАГУЛЯЦІЯ:

Для одночасного розтину тканин і гемостазу при оперативних втручаннях в щелепнолицьовій ділянці. Безкровне операційне поле дає хірургу хороший огляд, що скорочує час і підвищує ефективність втручання. Таким чином рани залишаються відкритими короткий час, що знижує ризик інфікування.

ЕЛЕКТРОПРОВІДНИЙ БРАСЛЕТ

Безпека та зручність:

- Проста фіксація.
- Невеликий розмір для уникнення концентрації тепла.
- Прямий контакт зі шкірою.
- Легко дезінфікується.

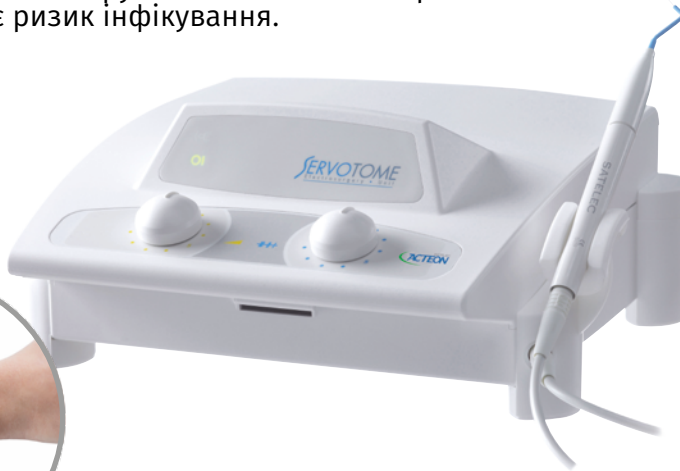

Розміри (Ш x В x Г)	250 x 110 x 240 мм
Вага	1,2 кг
Код	F57210
Комплект постачання: Базовий блок, наконечник з кабелем, що автоклавується, бокс з 10 електродами, заземлюючий браслет.	

Piezotome Cube


Високопотужний, надійний та універсальний пристрій для проведення операцій з імплантації та кісткової хірургії.


Переваги продукту:

- Чергування частот високої та низької інтенсивності: збереження м'яких тканин.
- Лінійні п'єзоелектричні коливання, контрольована амплітуда наконечника: високоточний зріз.
- Потужність інтуїтивно адаптована до опору, що зустрічається.
- Потік зрошення досягає кінця наконечника незалежно від орієнтації. Зовнішня лінія зрошення.
- Швидкі та точні інвазивні процедури: зменшення болю та набряку, менше анальгетиків.

В комплект поставки входить:

- Пристрій Piezotome Cube
- Наконечник Piezotome Cube LED
- Педаль управління
- Набір насадок Essential II – 6 насадок (B51 Slim II, B54 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II)
- Динамометричний ключ
- Іригаційна лінія
- Тримач для іригаційної лінії
- Тримач для наконечника Piezotome Cube LED

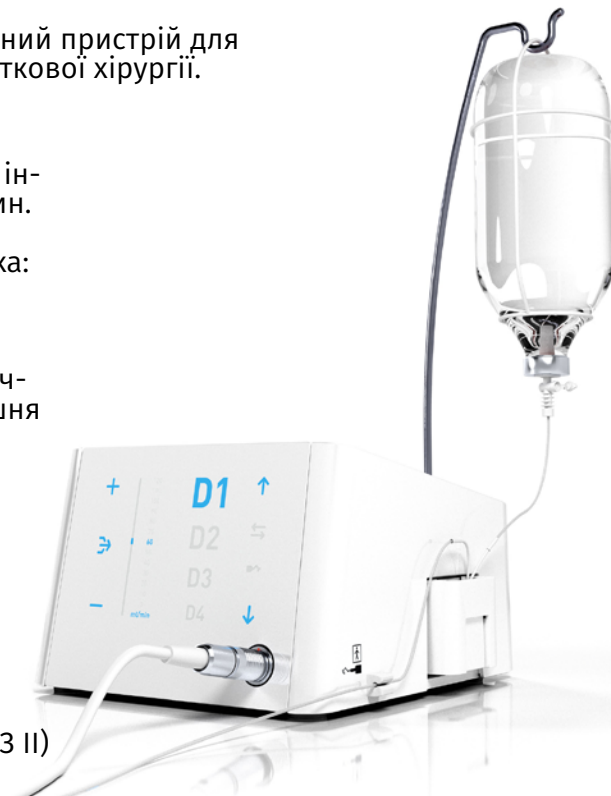

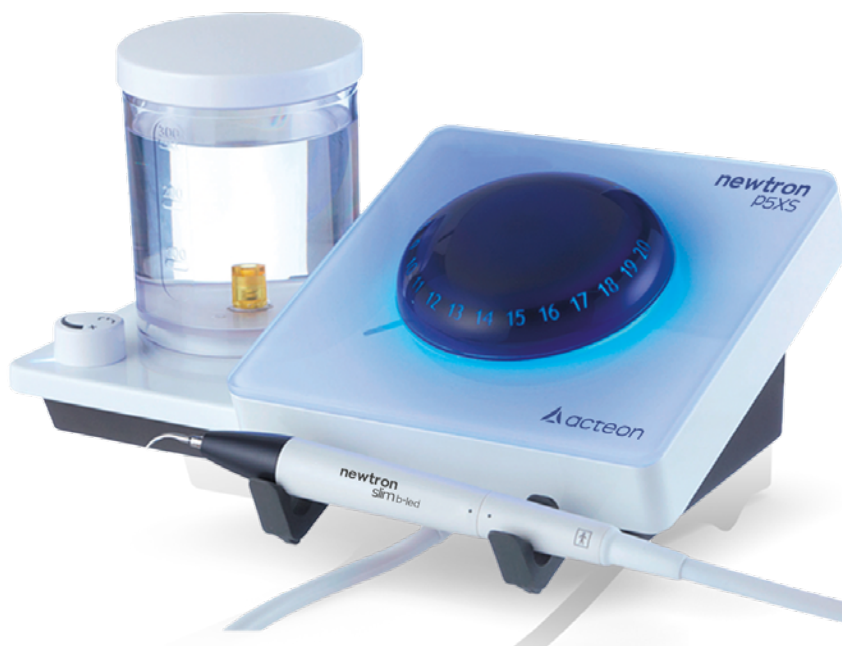

NEWTRON P5XS B.LED - ефективний і комфортний ультразвуковий скалер із більш ніж 80 унікальними насадками.

Скалер **Newtron P5 BLED** допомагає зберегти зуби та м'які тканини завдяки контрольованому ультразвуковим коливанням, особливій якості сталі його наконечників та зрошенню, що досягає кінця наконечника.

Лінійні та регулярні вібрації роблять лікування більш комфортним для пацієнта. Під час процедури м'які тканини зберігаються, не пошкоджуються ясна і зменшується руйнування емалі.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Частота ультразвуку	28-36 кГц
Вага приладу	2,1 кг
Розміри (Д x Ш x В)	260 x 185 x 140 мм
Розмір наконечника	довж. – 110 мм, Ø18 мм
Вага наконечника	48 г
Кабель наконечника	2,04 м
Проста, незнімна педаль для ноги (розміри / вага)	70 x 30 x 100 мм /150 г
Код	F62115
Комплект поставки: Базовий блок, Newtron SLIM B.LED наконечник (блакитне LED кільце) з підсвічуванням, з кабелем, змінне біле B.LED кільце, контейнер 300 мл, рідкий маркер зубного нальоту F.L.A.G. для B.LED (набір 5 флаконів x 1.5 мл), динамометричний ключ (блакитний), що автоклавується, насадки N01, 1s, H3, невід'єднувана педаль для ноги, кабель живлення.	

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

ФАНТОМИ
FRASACO

TECNODENT

КОМПРЕСОРИ ТА
ВІДСМОКТЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

BIEN AIR

ПРОДУКЦІЯ
YOSHIDA

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ
DÜRR DENTAL

ELMA

МОНИТОРИ
NEOVO

МІКРОМОТОРИ
IONUX

ОСВІТЛЕННЯ

КАМЕРИ
FUTUDENT

ACTEON

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ
ІМПЛАНТОЛОГІЇ

АПАРАТ
VECTOR

МІКРОСКОПИ
LABOMED

FUSSEN

ZIRKONZAHN

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
ФАНТОМИ FRASACO
TECNO DENT
КОМПРЕСОРИ ТА ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
BIEN AIR
ПРОДУКЦІЯ YOSHIDA
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ DÜRR DENTAL
ELMA
МОНІТОРИ NEOVO
МІКРОМОТОРИ IONUX
ОСВІТЛЕННЯ
КАМЕРИ FUTUDENT
АСТЕОН
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ
АПАРАТ VECTOR
МІКРОСКОПИ LAVOMED
FUSSEN
ZIRKONZAHN
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

СКЕЙЛІНГ			
№1 F00246 Універсальна насадка для скейлінгу грубих над'ясенніх відкладень.		№2 F00247 Призначений для видалення значних над'ясенніх відкладень.	
№3 F00248 Видалення слідів і плям від тютюну, чаю, кави та ін.		10P F00253 Масштабування та планування коренів. Придатний для очищення кишень глибиною менше 2-3 мм.	
10X F00359 Для інтерпроксимального скейлінгу. Підходить для міжпроксимальних проміжків та над'ясеннього скейлінгу.		10Z F00254 Для під'ясенного скейлінгу. Рекомендується для очищення кишень середнього розміру (< 4 мм).	
№1S F00245 Для очищення ясен. Розроблено для над- та під'ясенного видалення накипу.			
КЮРЕТИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВІДКЛАДЕНЬ			
H1 F00366 Для препарування навколорізних каналів. Для видалення грануляційних тканин.		H2L F00367 Лівостороння насадка для препарування навколорізних каналів. Обробки фуркацій та дуже вузьких проміжків. Лікування абсцесів.	
H2R F00368 Правостороння насадка для препарування навколорізних каналів. Обробки фуркацій та дуже вузьких проміжків. Лікування абсцесів.		H3 F00369 Універсальна насадка для кюретки. Ідеальна насадка для початку лікування передніх зубів.	
H4L F00114 Лівий наконечник. Застосовується для обробки молярів і фуркацій.		H4R F00115 Правий наконечник. Застосовується для обробки молярів і фуркацій.	

СКЕЙЛІНГ - ГІГІЄНА

**PFU
F02170**

Для видалення зубних бляшок та безболісної профілактики в області періодонту. Універсальна.

**PFL
F02171**

Лівостороння насадка. Застосовується для видалення зубних плям та профілактики в області періодонту.

**PFR
F02172**

Правостороння насадка. Застосовується для видалення зубних плям та профілактики в області періодонту.



ОБРОБКА ІМПЛАНТАНТІВ (IMPLANT PROTECT)

**IP1
F02121**

Призначена для чищення абатменту імплантату та очищення витків різьблення.

**IP2L
F02122**

Лівостороння насадка. Призначена для чищення абатменту імплантату та очищення витків різьблення.

**IP2R
F02123**

Правостороння насадка. Призначена для чищення абатменту імплантату та очищення витків різьблення.

**IP3L
F02124**

Лівостороння насадка. Для очищення витків мікрорізьблення в кортикальній частині імплантату.

**IP3R
F02125**

Правостороння насадка. Для очищення витків мікрорізьблення в кортикальній частині імплантату.



КОРЕКЦІЯ БІОПЛІВКИ (BDR)

**TK1-1S
F01001**

Застосовується для видалення зубного каменю в області періодонту.

**TK1-1L
F01004**

Застосовується для видалення зубного каменю в області періодонту.

**TK2-1L
F02162**

Лівостороння насадка. Застосовується для видалення зубного каменю в області періодонту.

**TK2-1R
F02161**

Правостороння насадка. Застосовується для видалення зубного каменю в області періодонту.



МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
ФАНТОМИ FRASACO
TECNODENT
КОМПРЕСОРИ ТА ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
BIEN AIR
ПРОДУКЦІЯ YOSHIDA
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ DÜRR DENTAL
ELMA
МОНІТОРИ NEOVO
МІКРОМОТОРИ IONUX
ОСВІТЛЕННЯ
КАМЕРИ FUTUDENT
АСТЕОН
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ
АПАРАТ VECTOR
МІКРОСКОПИ LAVOMED
FUSSEN
ZIRKONZAHN
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ОБРОБКА ІМПЛАНТАНТІВ (PERIOSOFT)

PH1 (x4) F00702

Універсальна насадка. Застосовується для обробки фронтальної групи імплантантів (блістер з 4 шт.)



PH2L (x4) F00705

Лівостороння насадка. Для догляду за імплантами. (Блістер з 4 шт.)



PH2R (x4) F00706

Правостороння насадка. Для догляду за імплантами. (Блістер з 4 шт.)



ПРЕЦИЗІЙНА ОБРОБКА ПЕРІОДОНТА

P2L F00090

Лівостороння насадка, застосовується для обробки апроксимальних поверхонь коренів премолярів та молярів.



P2R F00091

Правостороння насадка, застосовується для обробки апроксимальних поверхонь коренів премолярів та молярів.



ОБРОБКА КАНАЛУ

K10–21 (x4) F43710

Застосовується для первинної іригації.



K10–25 (x4) F43712

Застосовується для знезараження та чищення каналів. Ультразвукові файли (блістер з 4 шт.).



K15–21 (x4) F43715

Застосовується для фінішної іригації широких каналів.



K15–25 (x4) F43717

Застосовується для знезараження та чищення каналів. Ультразвукові файли (блістер з 4 шт.).



K25–21 (x4) F43725

Застосовується для фінішної іригації широких каналів.



K25–25 (x4) F43727

Застосовується для знезараження та чищення каналів. Ультразвукові файли (блістер з 4 шт.).



K30–21 (x4) F43730

Застосовується для фінішної іригації широких каналів із незакритою верхівкою.



K30–25 (x4) F43732

Застосовується для знезараження та чищення каналів. Ультразвукові файли (блістер з 4 шт.).



УЛЬТРАЗВУКОВА ІРИГАЦІЯ

**IRR 20-21 (x4)
F43807**

Ефективно чистить кореневий канал, створює кавітаційні ефекти та запобігає трансляції.

**IRR 20-25 (x4)
F43808**

Ефективно чистить кореневий канал, створює кавітаційні ефекти та запобігає трансляції.

**IRR 25-21 (x4)
F43805**

Застосовується для обробки та дезінфекції корневих каналів після їх механічної обробки та для пасивної ультразвукової іригації (блістер із 4 шт.).

**IRR 25-25 (x4)
F43806**

Використовується для обробки, очищення та дезінфекції корневих каналів після механічної обробки і для пасивної ультразвукової іригації (блістер із 4 шт.).



АПІКАЛЬНА ХІРУРГІЯ

**P14D
F00106**

Використовується для мікрохірургії. Рекомендована для препарування каналів різців.

**P15LD
F00107**

Лівостороння насадка, премоляри і моляри, застосовується для мікрохірургії.

**P15RD
F00108**

Правостороння насадка, премоляри і моляри, застосовується для мікрохірургії.

**S12-70D
F00118**

Рекомендується для лікування задніх ділянок, важкодоступних каналів або особливої орієнтації коренів.



ПЕРЕЛІКУВАННЯ

**ET40
F88012**

Застосовується для повторного ендолікування, вилучення уламків із прямих та глибоких каналів.

**ET40D
F88014**

Швидко очищує канали від obturating елементів та інструментальних уламків у середній та апікальній третині довгих та прямих каналів.

**ET20D
F88013**

Ефективно видаляє obturating елементи та уламки інструментів у середній та апікальній частині довгих та прямих каналів, особливо при твердих матеріалах.

**SO4
F88009**

Призначена для латеральної конденсації гутаперчі.



МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
ФАНТОМИ FRASACO
TECNODENT
КОМПРЕСОРИ ТА ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
BIEN AIR
ПРОДУКЦІЯ YOSHIDA
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ DÜRR DENTAL
ELMA
МОНІТОРИ NEOVO
МІКРОМОТОРИ IONUX
ОСВІТЛЕННЯ
КАМЕРИ FUTUDENT
АСТЕОН
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ
АПАРАТ VECTOR
МІКРОСКОПИ LAVOMED
FUSSEN
ZIRKONZAHN
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЕНДОДОНТІЯ/ПЕРЕЛІКОВУВАННЯ			
ET18D F88017 Ця насадка для видалення дентину, кальцифікацій, тимчасових та інших пломб у порожнині пульпарної камери, може використовуватися із іригацією.		ETBD F88020 Використовується для ендо-лікування та розпломбування каналів.	
ET25S F88021 Використовується для ендо-лікування в першій третині каналу, для розпломбування.		ET25 F88018 Використовується для ендо-лікування в глибині каналу, призначена для розпломбування та видалення уламків.	
ET25L F88022 Застосовується для ендо-лікування та розпломбування каналів.		ET20 F88011 Застосовується для ендо-лікування та розпломбування каналів.	
ETPR F88019 Застосовується для розпломбування каналів, видалення штифтів, кладок тощо.			
АПІКАЛЬНА ХІРУРГІЯ			
AS3D F00065 Для апікальної хірургії передніх зубів.		AS6D F00079 Для апікальної хірургії фронтальної групи зубів.	
AS9D F00067 Для складних випадків і дозволяє препарувати короневий канал до коронкової третини		ASLD F00080 Лівостороння насадка. Використовується для апікальної хірургії премолярів і молярів.	
ASRD F00081 Правостороння насадка. Використовується для апікальної хірургії премолярів і молярів.			

ПІДГОТОВКА ДОСТУПУ ДО КАНАЛУ

**CAP1
F88181**

Використовується для підготовки дна пульпарної камери з м'яким заокругленим кінчиком для уникнення перфорації камери пульпи.

**CAP2
F88182**

Інструмент для виявлення кореневих каналів, включаючи приховані, та для підготовки пульпарної камери й видалення дентинного шару.

**CAP3
F88183**

Насадка для розкриття каналів, видалення фрагментів, пошуку прихованих каналів, розцементування та видалення скловолоконних штифтів.



ФІНІШНА ОБРОБКА

**PM1
F02250**

Застосовується для обробки, полірування дентину.

**PM2
F02251**

Застосовується для обробки, полірування дентину.

**PM3
F02252**

Застосовується для обробки, полірування дентину.

**PM4
F02253**

Застосовується для обробки, полірування дентину.



ПОЛІРУВАННЯ

**PMV1
F02021**

Використовується для обробки вкладок, вінірів, дентину та апроксимальних поверхонь, також рекомендована для дитячої стоматології.

**PMV2
F02022**

Використовується для обробки вкладок, вінірів, дентину та апроксимальних поверхонь, і рекомендована для дитячої стоматології.

**PMV3
F02023**

Використовується для обробки вкладок, вінірів, дентину та апроксимальних поверхонь, і рекомендована для дитячої стоматології.

**PMV4
F02024**

Гладка поверхня для полірування при обробці вкладок, вінірів та препаруванні дентину. Рекомендована для дитячої стоматології.



МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
ФАНТОМИ FRASACO
TECNODENT
КОМПРЕСОРИ ТА ВІДСМОКТЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
BIEN AIR
ПРОДУКЦІЯ YOSHIDA
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ DÜRR DENTAL
ELMA
МОНИТОРИ NEOVO
МІКРОМОТОРИ IONUX
ОСВІТЛЕННЯ
КАМЕРИ FUTUDENT
АСТЕОН
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ
АПАРАТ VECTOR
МІКРОСКОПИ LABOMED
FUSSEN
ZIRKONZAHN
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

PMV5 F02025 Використовується при обробці вкладок, вінірів та препаруванні дентину, рекомендована для дитячої стоматології.		PMV6 F02026 Використовується при обробці вкладок, вінірів та препаруванні дентину, рекомендована для дитячої стоматології.	
ПОЛІРУВАННЯ			
PMS1 F02254 Використовується для препарування уступу. Алмазне покриття 76 мкм.		PMS2 F02255 Використовується для препарування уступу. Алмазне покриття 46 мкм.	
PMS3 F02256 Використовується для фінішного полірування та препарування уступу, а також для згладжування поверхні кукси перед відбитком.			
МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНЕ ПРЕПАРУВАННЯ			
EX1 F02040 Використовуєть для інвазивного видалення, алмазне напilenня.		EX2 F02041 Використовуєть для інвазивного видалення, алмазне напilenня.	
EX3 F02042 Використовуєть для інвазивного видалення, алмазне напilenня.		EX-R F02043 Форма - права півкуля. Застосовується для інвазивного видалення, алмазне напilenня.	
EX-L F02043 Форма - ліва півкуля. Застосовується для інвазивного видалення, алмазне напilenня.			
АПІКАЛЬНА ХІРУРГІЯ			
C20 F00113 Ковпачок, 10шт. F00397 Використовуєть-ся для конденсації коронок та встановлення вкладок та протезів.		5AE F00249 Використовується для видалення коронок з використанням охолодження під час розпломбування.	

ХІРУРГІЯ.ВІДКРИТИЙ СИНУС - ЛІФТИНГ

**SL1
F87311
F87511**

Використовується для формування кісткового вікна і згладжування гострих кутів.

**SL2
F87312
F87512**

Використовується для згладжування стінок кісткового вікна і точної остеопластики.

**SL3
F87313
F87513**

Використовується для відшарування слизової оболонки верхньощелепної пазухи в ділянці країв кісткового вікна.

**SL4
F87314
F87514**

Використовується для відшарування мембрани всередині пазухи. Під кутом 90°.

**SL5
F87315
F87515**

Використовується для відшарування мембрани всередині пазухи. Під кутом +/-135°.



ХІРУРГІЯ.ЗАКРИТИЙ СИНУС - ЛІФТИНГ

**TKW1
F87331
F87531**

Використовується для свердління та формування отвору в кістковій тканині верхньої щелепи. Діаметр: 1,35 мм.

**TKW2
F87332
F87532**

Використовується для свердління кісткової тканини та розширення пілотного отвору до дна верхньощелепної пазухи. Діаметр: 2,1 мм.

**TKW3
F87333
F87533**

Використовується для свердління кісткової тканини та розширення доступу до мембрани верхньощелепної пазухи. Діаметр: 2,35 мм.

**TKW4
F87334
F87534**

Використовується для свердління кісткової тканини та розширення входу каналу доступу до мембрани верхньощелепної пазухи. Діаметр: 2,80 мм.

**TKW5
F87335
F87535**

Використовується для відшарування мембрани під час закритого синусліфтингу. Діаметр: 3 мм.

**TKW6
F87538**

Використовується для відшарування мембрани під час закритого синусліфтингу. Діаметр: 4.2 мм.



МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
ФАНТОМИ FRASACO
TECNODENT
КОМПРЕСОРИ ТА ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
BIEN AIR
ПРОДУКЦІЯ YOSHIDA
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ DÜRR DENTAL
ELMA
МОНИТОРИ NEOVO
МІКРОМОТОРИ IONUX
ОСВІТЛЕННЯ
КАМЕРИ FUTUDENT
АСТЕОН
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ
АПАРАТ VECTOR
МІКРОСКОПИ LAVOMED
FUSSEN
ZIRKONZAHN
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ХІРУРГІЯ.ВИДАЛЕННЯ І ФРАГМЕНТАЦІЯ ЗУБІВ			
LC1 F87307 F87507 Використовуєть для проведення сепарації (синдесмотомії) і перирадикулярної остеотомії.		LC1-90 ° F87341 F87541 Робоча частина обертається на 90° для зручності в утруднених місцях, полегшуючи сепарацію між зубами, особливо на молярах.	
LC2 F87342 F87542 Насадка дозволяє працювати вузько між коренем та альвеолярною кісткою, уникнувши ризику пошкодження кортикальної пластинки.		LC2L F87343 F87543 Насадка з поворотом в ліво на 45° полегшує роботу в дистальних ділянках зубів та має тонку форму для комфортної роботи в обмежених просторах.	
LC2R F87344 F87544 Насадка з поворотом в право на 45° полегшує роботу в дистальних ділянках зубів та має тонку форму для комфортної роботи в обмежених просторах.		NINJA F87345 F87545 Обопільно-гостра насадка для розпилювання коренів, з лазерними позначками кожні 3 мм, особливо ефективна при гемсекції та ампутації коренів.	
ХІРУРГІЯ.ПОДОВЖЕННЯ КЛІНІЧНОЇ КОРОНКИ			
CE1 F87351 F87551 Використовується для остеопластики в області країв кісткової тканини.		CE2 F87352 F87552 Використовується для остеопластики в області країв кісткової тканини.	
CE3 F87353 F87553 Використовується для проведення тонкої остеотомії.			
ХІРУРГІЯ.РОЗЩЕПЛЕННЯ ГРЕБЕНЯ			
CS1 F87561 Використовується для проведення пілотної лінії остеотомії.		CS2 F87562 Використовується для проведення остетомії на глибину до 8 мм.	

CS3 F87563 Використовується для розрізання мезіальних та дистальних країв основного розрізу на глибину до 8 мм.		CS4 F87564 Використовується для розщеплення кісткової тканини на глибині 8 мм.	
CS5 F87565 Використовується для розщеплення кісткової тканини на глибині 8 мм.		CS6 F87566 Використовується для розщеплення кісткової тканини на глибині 8 мм.	

ХІРУРГІЯ.МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНЕ ОРТОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ

PZ1 F87571 Використовується для фронтальної кортикотомії.		PZ2L F87572 Повернута вліво заокруглена пила для латеральної кортикотомії.	
PZ2R F87573 Повернута вправо заокруглена пила для латеральної кортикотомії.		PZ3 F87574 Використовується для фронтальної кортикотомії при скупчених коренях зубів.	

ХІРУРГІЯ.ОСТЕОТОМІЯ/ОСТЕОПЛАСТИКА

BS1 F87301 Універсальна пила, для різання до 6 мм глибини.		BS2L/DS2R F87302/F87303 F87502/F87503 Лівостороння/Правостороння кутова пила для розрізання кортикальної кістки у гільці нижньої щелепи	
BS1S SLIM F87525 Призначена для глибоких розрізів кортикальної кістки перед імплантацією, ортодонтичних втручань та кісткової дистракції.		BS1L LONG F87527 Використовується для полегшення забору кісткових блоків з області гілки нижньої щелепи.	
BS1 RD F87557 Велика робоча поверхня 280° для комфортної роботи та спрощення доступу.		BS4 F87304 F87504 Використовується для остеопластики і збору кісткової тирси.	
BS5 F87305 F87505 Використовується для тонкої остеотомії.		BS6 F87306 F87506 Використовується для остеопластики, .	

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

ФАНТОМИ
FRASACO

TECNODENT

КОМПРЕСОРИ ТА
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

BIEN AIR

ПРОДУКЦІЯ
YOSHIDA

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ
DÜRR DENTAL

ELMA

МОНІТОРИ
NEOVO

МІКРОМОТОРИ
IONUX

ОСВІТЛЕННЯ

КАМЕРИ
FUTUDENT

ASTEON

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ
ІМПЛАНТОЛОГІЇ

АПАРАТ
VECTOR

МІКРОСКОПИ
LABOMED

FUSSEN

ZIRKONZAHN

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
ФАНТОМИ FRASACO
TECNODENT
КОМПРЕСОРИ ТА ВІДСМОКТЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
BIEN AIR
ПРОДУКЦІЯ YOSHIDA
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ DÜRR DENTAL
ELMA
МОНИТОРИ NEOVO
МІКРОМОТОРИ IONUX
ОСВІТЛЕННЯ
КАМЕРИ FUTUDENT
АСТЕОН
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ
АПАРАТ VECTOR
МІКРОСКОПИ LABOMED
FUSSEN
ZIRKONZAHN
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

	Набір універсальний У наборі - 6 основних наконечників АСТЕОН для витягування, нарощування коронок та п'єзоциркулярного препарування. Насадки: для екстракції (LC1 і LC2 II), розширення коронки (BS6, CE1 і CE3 II), та п'єзоцизії (PZ1 II).	F87539
	Базовий набір Piezotome Набір з популярними насадками для Piezotome ультразвукової кісткової хірургії. Насадки: BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2.	F87528
	Набір для кісткової хірургії Наконечники призначені для безпечної трансплантації блоків кістки та ремоделювання структур без ризику пошкодження м'яких тканин. Насадки: BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6	F87509
	Набір для розщеплення гребеня Наконечники безпечно розширюють гребінь, уникаючи ризику перелому кістки, що дозволяє негайно чи відкладено встановлювати імплантат після загоєння. Насадки: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6.	F87567
	Набір для синус-ліфтингу Набір для синус-ліфтингу забезпечує легкий та безпечний підйом бічного синуса. Насадки: SL1, SL2, SL3, SL4, SL5	F87510
	Набір для інтраліфтингу Внутрішній синус-ліфтинг з гребневим підходом дозволяє безпечно виконувати неінвазивні операції. Насадки: TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5	F87536
	Набір Piezocision Швидка та безпечна ортодонтична операція з подальшим ущільненням кістки. Насадки: PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3	F87576
	Набір для вилучення Набір призначений для видалення зубів мудрості, переломів коренів та репресованих зубів. Насадки: LC1, LC2, LC2L, LC2R, Ninja.	F87546

	Набір для імплантологічних процедур Набір забезпечує повне оброблення імплантатів під час лікування периімплантиту, включаючи нехірургічний підхід, і також ідеально підходить для їх чищення. Насадки: IP1, IP2L, IP2R, IP3L, IP3R.	F02120
	Набір ENDO SUCCESS Розроблений для процедур розширення коронки. Насадки: ET18D, ET20, ET25, ET25S, ET BD I ET PR.	F00737
	Набір для розширення коронки Розроблений для процедур розширення коронки. Насадки: BS6, CE1, CE2, CE3.	F87554
	Набір для масштабування Насадки для видалення зубного каменю на над'ясенні, під'ясенні (кишені малої глибини) та міжзубних областях. Насадки: 1, 1S, 10X і H3.	F00934
	Гігієнічний набір Набір для видалення зубного каменю на над'ясенні та під'ясенні (кишені малої глибини) та огляду кишень середньої глибини. Насадки: 1, 1S, 10Z, TK1-1S.	F00935
	Набір для пародонтології Мікро-насадки (кюрети) для чищення пародонтальних просторів передніх молярів і премолярів. Дистальна поверхня з кутом 90°, кінчик має 2 кола, безпечно видаляє відкладення, уникнувши пошкодження волокон сполучної тканини. Насадки: 1S, H3, H4L, H4R.	F00936
	Набір BDR Набір для пародонтальної профілактики включає 2 прямих зонди для простих випадків та 2 викривлених зонди для обробки всієї порожнини, включаючи складні випадки. Насадки: TK1-1S, TK1-1L, TK2-1L, TK2-1R.	F00937
	Набір PERIO PRECISION Для тонкого пародонту та інтерпроксимального чищення. Насадки: P2L, P2R, TK1-1S.	F00939

Прайс | Acteon

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	S_802_0014	Система рентгенівська стоматологічна цифрова SOPIX2, РОЗМІР 1	183 270
2	S_802_5012	Система рентгенівська стоматологічна цифрова SOPIX2 INSIDE, РОЗМІР 1	183 270
3	W1300001	Цифровий сенсор стоматологічної візуалізації U-SENSE SIZE 1	213 990
4	5.92.23219	Система рентгенівська DC X-MIND 230 Вольт, прямокутний конус, верхнє кріплення	148 030
5	5.92.23137	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, довгий конус, верхнє кріплення, довжина плеча 40 см	148 030
6	5.92.23138	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, довгий конус, верхнє кріплення, довжина плеча 80 см	148 030
7	5.92.23159	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, короткий конус, верхнє кріплення, довжина плеча 110 см	148 030
8	5.92.23139	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, довгий конус, верхнє кріплення, довжина плеча 110 см	148 030
9	5.92.23130	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, довгий конус, нижнє кріплення, довжина плеча 40 см	148 030
10	5.92.23132	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, довгий конус, нижнє кріплення, довжина плеча 110 см	148 030
11	5.92.23205	Система рентгенівська DC X-MIND 230 Вольт, довгий конус, кріплення для стелі	148 030
12	5.92.23165	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, прямокутний конус, кріплення на установку	148 030
13	5.92.23135	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, довгий конус, кріплення на установку, довжина плеча 40 см	148 030
14	5.92.23212	Система рентгенівська DC X-MIND 230 Вольт, прямокутний конус, мобільна стійка	166 160
15	5.92.23133	Система рентгенівська X-MIND DC, 230 Вольт, довгий конус, мобільна стійка, RAL9010	166 160
16	W0800102	Система рентгенівська X-Mind Unity з горизонтальним плечем верхнього монтажу з довжиною 40 см і коротким прямокутним конусом	196 370
17	W0800000	Система рентгенівська X-Mind Unity кріплення плеча зверху, з коротким конусом, плече 40 см	196 370
18	W0800001	Система рентгенівська X-Mind Unity кріплення плеча зверху, з коротким конусом, плече 80 см	196 370
19	W0800004	Система рентгенівська X-Mind Unity кріплення плеча зверху, з довгим конусом, плече 80 см	196 370
20	W0800002	Система рентгенівська X-Mind Unity кріплення плеча зверху, з коротким конусом, плече 110 см.	196 370
21	W0800013	Система рентгенівська X-Mind Unity кріплення плеча знизу, з довгим конусом, плече 80 см.	196 370
22	W0800011	Система рентгенівська X-Mind Unity кріплення плеча знизу, з коротким конусом, плече 110 см	196 370
23	W0800085	Система рентгенівська X-MIND Unity для монтажу на мобільну стійку, довгий конус, без горизонтального плеча	216 510
24	F57210	Коагулятор Satelec Servotome	93 650

25	F61104	Ультразвуковий скелер Newtron P5 B.LED	85 600
26	F62115	Ультразвуковий скелер NEWTRON P5 XS B.LED 230V з 3 насадками (1, 1S та H3)	115 810
27	F12281	Наконечник STER SP NEWTRON SATELEC	25 180
28	F12609	Наконечник LUMIERE A LEDS V3 SATELEC	28 200
29	F12901	Наконечник A MAIN NEWTRON SLIM	35 250
30	F12900	Наконечник NEWT SLIM B.LED BL BT	41 290
31	F12905	Наконечник NEWT SLIM B.LED BC BT	41 290
32	F12906	Наконечник NEWT SLIM B.LED BL+ BC BT	41 290
33	F50118	Piezotome CUBE	332 310
34	S_950_0001 + S_717_1000	Інтраоральна камера SOPROCARE S950 PAL + mini Dock U USB2.0 - Windows	320 990
35	S_617_0001 + S_717_1000	Інтраоральна камера SOPRO 617 PAL + Mini Dock U USB2.0 - Windows	243 520
36	201700	Riskontrol нестерильні насадки м'ятні (250шт/уп)	3 320
37	201664	Riskontrol нестерильні насадки білі (250шт/уп)	3 060
38	201770	Riskontrol стерильні одноразові насадки білі (100шт/уп)	2 060
39	200152	Адаптер DCI	6 140
40	200150	Адаптер LU INOX	6 140
41	200199	Адаптер LU NEW INOX	6 140

Дата: 20.04.2026