


GALIT

EXPERTS IN DENTISTRY

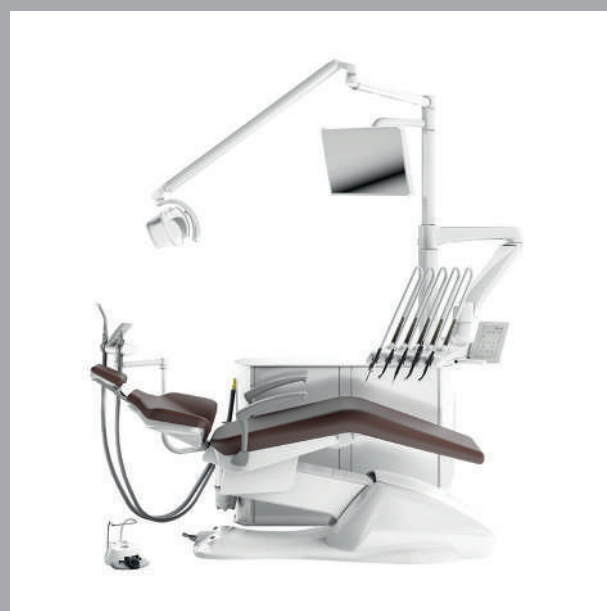

GALLANT AUTONOME

EXPERTS IN DENTISTRY

GALIT — визнаний лідер у виробництві медичного обладнання в Україні, завдяки унікальному поєднанню якісних європейських компонентів, універсальності та ергономічного дизайну.

ЕКСПЕРТНІСТЬ – ПОНАД УСЕ!

Чверть століття вектор бренду GALIT залишається незмінним — розробляти надійне та довговічне стоматологічне обладнання і надавати інноваційні експертні рішення для стоматологів-професіоналів у всьому світі. Ми дбаємо про довговічність наших продуктів і рішень, оскільки цінуємо довговічність стосунків з нашими клієнтами.

ЦІННОСТІ БРЕНДУ:

Якість – ми діємо у відповідності до міжнародних стандартів якості щодо медичних виробів.

Довіра – повага, сумлінність та щирість керують нашими діями.

Турбота – наші люди та клієнти надихають нас діяти віддано та пристрасно.

Інновації – ми застосовуємо останні технології для досягнення найкращих результатів.

Партнерство – ми співпрацюємо з лікарями-професіоналами та нашими партнерами, щоб перемагати разом.

Відданість – ми працюємо скрупульозно для забезпечення виняткових результатів з найкращим обслуговуванням клієнтів.

Нові можливості для стоматологічної практики

GALLANT AUTONOME – це автономна стоматологічна установка, що працює без підключення до зовнішніх комунікацій.

Це інноваційне рішення для стоматологічних кабінетів, що забезпечує максимальну гнучкість у виборі місця підключення обладнання. Усі необхідні системи інтегровані безпосередньо в гідроблок установки, що забезпечує її повну незалежність від зовнішніх інженерних мереж.



Потрібна лише розетка



Безшумна робота



Жодних комунікацій



Все в одному



Сервісна підтримка



Просте управління



Безпека



Гарантія

GALLANT AUTONOME

Одна розетка - повноцінний стоматологічний кабінет



Для роботи стоматологічної установки потрібне лише підключення до електромережі



Тиха робота без дискомфорту для лікаря і пацієнта.



GALLANT AUTONOME PRO



GALLANT AUTONOME




GALLANT AUTONOME CONSOLE

РІВЕНЬ ШУМУ			
 GALIT AUTONOME	 КУТОВИЙ НАКОНЕЧНИК СА 1:5L	 ТУРБІНА BORA 2 LED	 УНІВЕРСАЛЬНА КАНЮЛЯ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
51 дБ	58 дБ	59 дБ	63 дБ

РІШЕННЯ «ВСЕ В ОДНОМУ»




Автономні установки GALLANT AUTONOME не потребують підключення до водопроводу, систем подачі стисненого повітря, централізованого вакууму або каналізації.

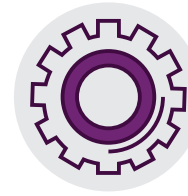

Усе працює автономно завдяки вбудованим у гідро-блок модулям, які забезпечують безперебійну роботу навіть у приміщеннях без стандартної стоматологічної інфраструктури.



Чисте повітря у кабінеті забезпечує HEPA фільтр.
Для дезінфекції або сервісного обслуговування достатньо зняти лише дві кришки на зручних фіксаторах.

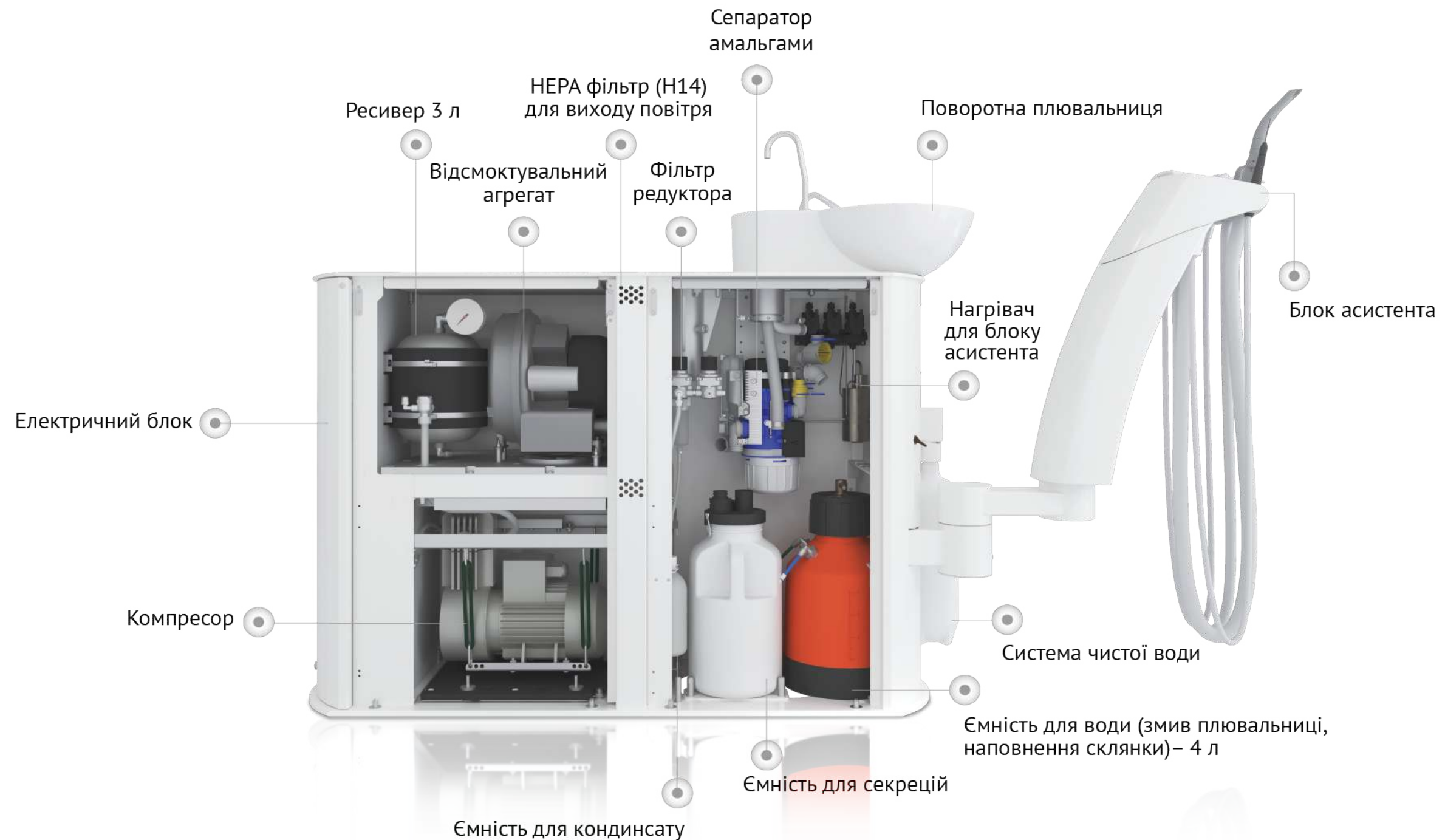



GALLANT AUTONOME

КРІСЛО ПАЦІЄНТА

Максимум комфорту,
мінімум зусиль

Крісло пацієнта є важливою та невід’ємною частиною стоматологічної установки. У GALIT ми подбали про те, щоб пацієнт відчував максимальний комфорт на кожному етапі лікування, а лікар міг повністю зосередитись на своїй роботі.

Усі стоматологічні установки GALIT оснащені ергономічними кріслами преміум класу від італійського виробника Tecnodent. Вони вирізняються продуманим дизайном, високою надійністю та комфортом, перевіреним європейськими стандартами.



Індивідуальний вибір кольору обшивки з палітри понад 25 варіантів. Для підвищеного комфорту, окрім стандартної обшивки, доступні варіанти з Soft Foam або Memory Foam.



Крісло може бути оснащено лівим або/та правим підлокітником для максимальної зручності пацієнта.



Додаткова функція Trendelenburg (синхронне піднімання ніг на 15° при опусканні спинки крісла на 90°) забезпечує правильний кровообіг.



Високоточний джойстик дозволяє просто і ефективно керувати кріслом без використання рук.

			
9002 Білий	300 40 20 Бузковий	3012 Персиковий	5003* Темно-синій
			
5011 Сталево-синій	6001 Бежево-сірий	7502 Антрацит	4009* Бузковий
			
3493 Бірюзовий	3016 Коралово-червоний	6033 М'ятно-зелений	8017 UM33** Коричневий замшевий
			
1300T Цинково-жовтий	1011 Світло-сірий	3491 Барвінково-синій	7021** Чорно-сірий сатин
			
1414 Червоний	5515 Яблучно-зелений	1604Т Бордовий	15141*** Металік-спаркл синій
			
3494 Шовковий сірий	5023 Пастельно-блакитний	1007 Чорний	14966*** Металік-спаркл зелений
			
1009 D Електричний синій	5510 Пурпурний		21366*** Платиновий

*Колір може відрізнатись від реального



GALLANT AUTONOME CONSOLE


Конструкція установок GALIT дозволяє лікарю-стоматологу обрати спосіб встановлення крісла пацієнта:



СТАЦІОНАРНЕ КРІСЛО

(модель Autonomie)

Класичне кріплення на підлозі для максимальної стабільності та надійної фіксації.

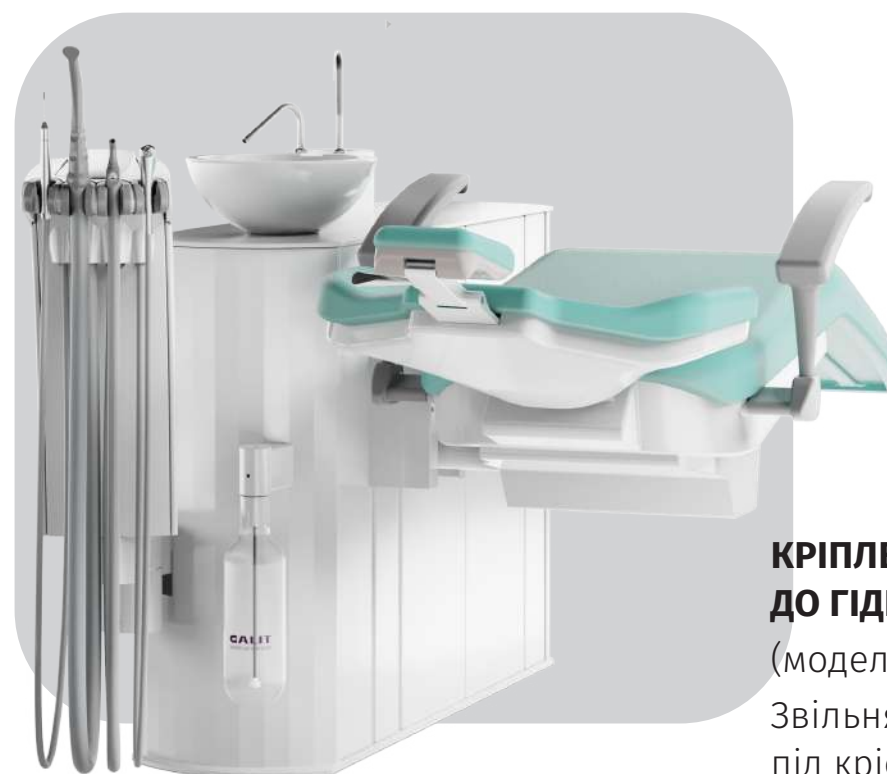

КРІПЛЕННЯ КРІСЛА ДО ГІДРОБЛОКУ

(модель Autonomie Console)

Звільняє додатковий простір під кріслом для комфортної взаємодії лікаря і пацієнта.



GALLANT AUTONOME CONSOLE

ПЛЮВАЛЬНИЦЯ

Керамічна чаша плювальниці з функцією обертання на 180° забезпечує зручність для асистента та максимальний комфорт для пацієнта під час лікувальних процедур.



БЛОК АСИСТЕНТА

Блок асистента DÜRR Comfort

Забезпечує ефективну взаємодію між стоматологом та асистентом — ключовий фактор для якісного та комфортного лікування.

Основні переваги:

- Регулювання кута нахилу тримачів інструментів.
- Легке переміщення блоку в горизонтальній площині.
- Можливість комплектації від 2 до 5 інструментів.



Блок асистента PRO

Завдяки продуманій ергономічній конструкції забезпечує зручне розташування інструментів і легке управління кріслом пацієнта.

Основні переваги:

- Можливість комплектації до 4 інструментів.
- Незалежна робота аспіраційної системи — слиновідсмоктувач та пило-відсмоктувач працюють окремо, що підвищує ефективність.
- Легке переміщення блоку в горизонтальній площині.



Ергономіка створена на основі досвіду



БЛОК ЛІКАРЯ З ВЕРХНЬОЮ ПОДАЧЕЮ ШЛАНГІВ

М'які балансувальні пружини забезпечують легкість і комфорт у роботі з інструментами. Рука лікаря не перевантажується навіть під час тривалих процедур.



БЛОК ЛІКАРЯ З НИЖНЬОЮ ПОДАЧЕЮ ШЛАНГІВ

Легкий контроль позиціонування та кута нахилу інструментів забезпечує максимальний комфорт і ергономіку під час роботи.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Для блоку лікаря передбачено два варіанти панелі управління: стандартна або сучасна сенсорна панель.

Стандартна панель управління

Дозволяє легко регулювати потужність усіх інструментів та змінювати положення крісла пацієнта. Усе під рукою для повного контролю процесу лікування.



Сенсорна панель управління

Інтуїтивний інтерфейс, розширені функціональні можливості та відображення всіх параметрів у реальному часі допомагають лікарю миттєво реагувати на зміни, працювати точніше і продуктивніше.



Повний контроль над робочим процесом - просто і легко.

ІНСТРУМЕНТИ

Блок лікаря стоматологічної установки GALIT може бути оснащений п'ятьма інструментами, підібраними згідно з побажаннями лікаря та стандартами сучасної стоматології. Усі інструменти розміщуються в зручному та звичному для лікаря порядку, що забезпечує комфорт під час роботи та сприяє підвищенню ефективності процедур.

Широкий вибір інструментів дозволяє налаштувати робоче місце відповідно до індивідуальних уподобань лікаря, а також до видів лікувальних процедур — від профілактики до хірургії. Таким чином GALIT гарантує гнучкість у виборі та ергономічність обладнання.





GALLANT AUTONOME PRO

СВІТИЛЬНИК

Усі стоматологічні установки GALIT оснащені світильниками від лідера ринку — італійської компанії FARO. Кожна модель забезпечує високоточне, рівномірне освітлення, зручне керування та знімні ручки для автоклавування.

Температурні режими:

5 700 K

Для точної передачі кольору зубів, протезування та терапії

5 000 K

Для ортодонції, терапії та дитячої стоматології

4 000 K

Для хірургії

2 700 K

Composave: без передчасного затвердіння



MAIA LED

Світлове поле: 170 x 95 мм.

Сила світлового потоку:
3 000 - 45 000 LUX на відстані 700 мм.

5 000 K

EVA LED TUNABLE WHITE

Світлове поле: 190 x 100 мм.

Сила світлового потоку:
3 000 - 50 000 LUX на відстані 700 мм.

5 700 K

5 000 K

4 000 K

2 700 K



B75. Стоматологічний режим:

Світлове поле: 200 x 100 мм.

Сила світлового потоку:
3 000 - 50 000 LUX на відстані 700 мм.

5 700 K

5 000 K

4 000 K

2 700 K

B75. Хірургічний режим:

Світлове поле: $\varnothing$ 250 мм.

Сила світлового потоку:
до 160 000 LUX на відстані 800 мм.

5 000 K

2 700 K



ПЕДАЛЬ КЕРУВАННЯ

Майстерність у деталях

В асортименті GALIT представлено педалі з різною функціональністю, що дозволяє обрати оптимальне рішення для конкретних потреб стоматолога.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕДАЛЬ З КАБЕЛЕМ:

- увімкнення/вимкнення стоматологічних інструментів;
- увімкнення/вимкнення спрею та продувки для стоматологічних інструментів;
- регулювання швидкості/потужності стоматологічних інструментів.



БЕЗПРОВІДНА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕДАЛЬ:

Удосконалена педаль оснащена безпроводним Bluetooth з'єднанням та високострумовою батареєю великої ємності, що гарантує довгий термін експлуатації (до 6 місяців).



ПНЕВМАТИЧНА ПЕДАЛЬ:

увімкнення/вимкнення стоматологічних інструментів



СТАНДАРТНЕ ВИКОНАННЯ

СТАЦІОНАРНИЙ ГІДРОБЛОК:
Стійка для світильника
Компресор DK50 з нержавіючим ресивером ємністю 5 л, конденсатовідділювачем з фільтром та автоматичним зливом конденсату, вбудованим в гідравлічний блок
Відсмоктувальний агрегат з НЕРА фільтром, вмонтованим у гідроблок
Ємність для води (6 л) для змиву плювальниці та наповнення склянки
Ємність (5 л) для секретій
Система чистої води з ємністю 2 л
БЛОК ЛІКАРЯ з верхньою або нижньою подачею шлангів на пантографічному важелі з пневмо-гальмом, включає:
Негатоскоп з LED підсвіткою
Пульт керування кріслом та установкою з регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та функцією Endo
КРІСЛО ПАЦІЄНТА STING базова версія (Tecnodent), включає:
Повністю електромеханічний підйом і рухи спинки
Програма для встановлення на «0» позицію
Програма для позиції спльовування
Джойстик для керування ногою на основі крісла
Аварійна зупинка на основі
Аварійна зупинка на спинці
Підголівник з подвійною артикуляцією UNI
Вузька спинка крісла


ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ДЛЯ БЛОКУ ЛІКАРЯ:
Блок лікаря нової конструкції
Пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор MCX LED (1000-40000 об/хв) Bien Air
Другий мікромотор MCX LED (1000-40000 об/хв) Bien Air
П'єзоелектричний скелер Compact piezo P2K з двома насадками Mectron
П'єзоелектричний скелер Compact piezo LED Mectron
П'єзоелектричний скелер Newtron LED Acteon
П'єзоелектричний скелер UDS-N6 LED Woodpecker
Пустер 3-х функційний DCI
Пустер 3-х функційний MINIMATE Luzzani Dental
Фотополімеризаційна лампа Starlight S × 5
Столик великий з силіконовим ковриком
Нагрівач води для інструментів блоку лікаря
Перестальник помпа Satelec
СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ (ДОДАТКОВО):
Мікромотор MX2 LED Bien Air
Другий мікромотор MX2 LED Bien Air
Мікромотор MXI LED Bien Air
Другий мікромотор MXI LED Bien Air


ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ДЛЯ БЛОКУ АСИСТЕНТА:
Блок асистента з пультом, слиновідсмоктувач та пиловідсмоктувач з фільтром Dürr Comfort
Блок асистента Pro з пультами, слиновідсмоктувачем та пиловідсмоктувачем
Пилевідсмоктувач
Слиновідсмоктувач
Пустер 3-х функційний DCI
Пустер 3-х функційний MINIMATE Luzzani Dental
Фотополімеризаційна лампа Starlight sx5 Mectron
Діатермокоагулятор
ДЛЯ ГІДРОБЛОКУ:
Важіль кріплення монітора (без кабелів) у зоні плювальниці
Металева плита на підлогу для кріплення установки та крісла
Серветниця
Цетральний клапан включення води
Цетральний клапан включення повітря
ОПЦІЇ СВІТИЛЬНИКА:
Світильник FARO MAIA LED
Світильник FARO EVA LED
Світильник FARO B75
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КРІСЛА:
Заміна крісла STING на крісло ECO NEXT (з підголівником UNI)
Заміна крісла STING на крісло 2009 NEXT (з підголівником UNI)
Заміна крісла STING на крісло VALE (з підголівником UNI,джойстиком)
Лівий / правий поворотний знімний підлокітник
Функція Trendelenburg (Підняття ніг на 15° при нахилі спинки крісла на 90°)
Додаткові три програми для крісла
Заміна обшивки крісла на SOFT FOAM
Заміна обшивки крісла на MEMORY FOAM
Килимок для захисту сидіння
ОПЦІЇ ПЕДАЛІ:
Педаль пневматична
Багатофункціональна педаль FARO
Безпроводна багатофункціональна педаль FARO

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ УСТАНОВКИ

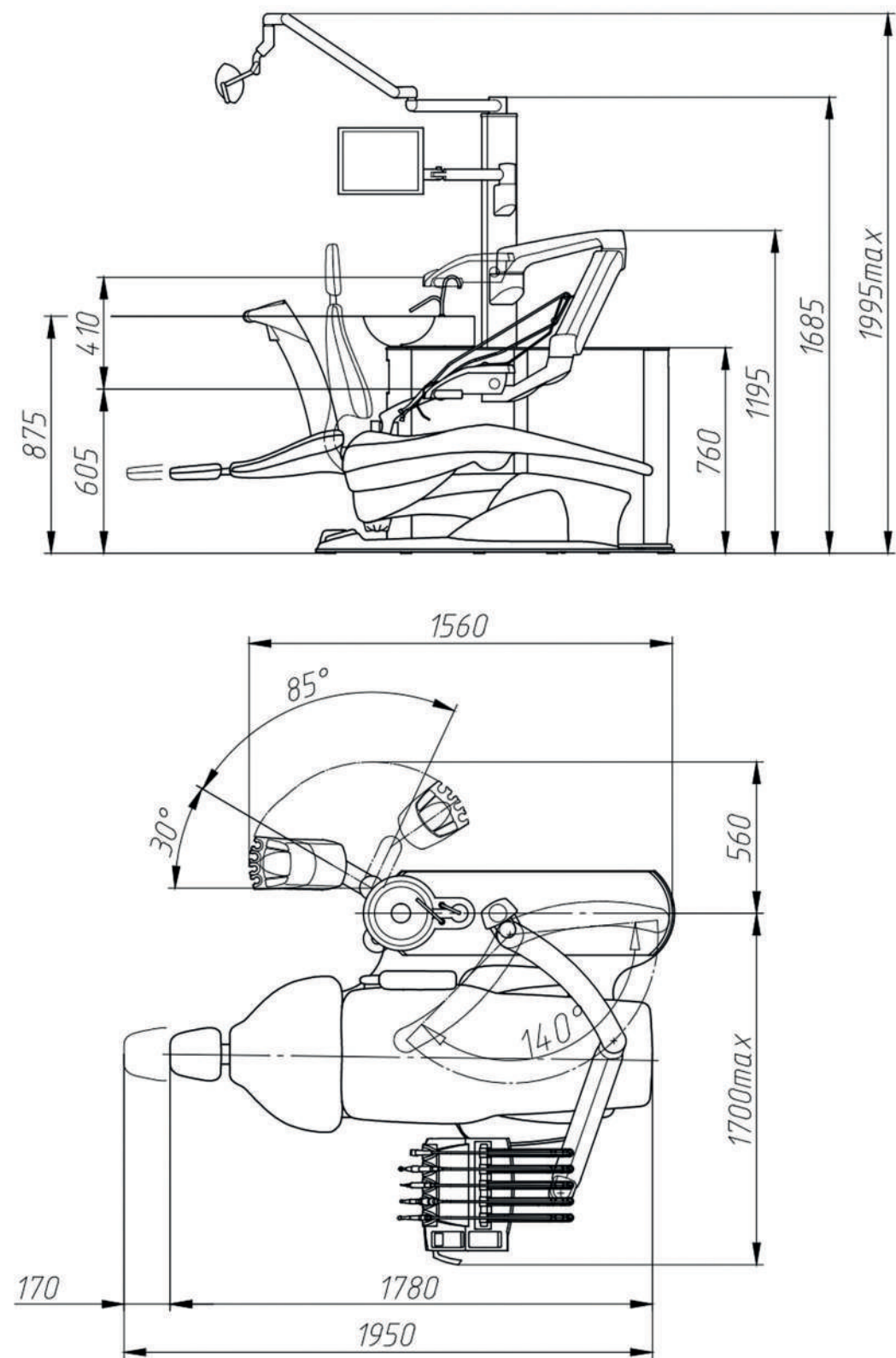

Габаритні розміри стоматологічної установки GALLANT AUTONOME із верхньою подачею інструментів та кріслом пацієнта ECO NEXT

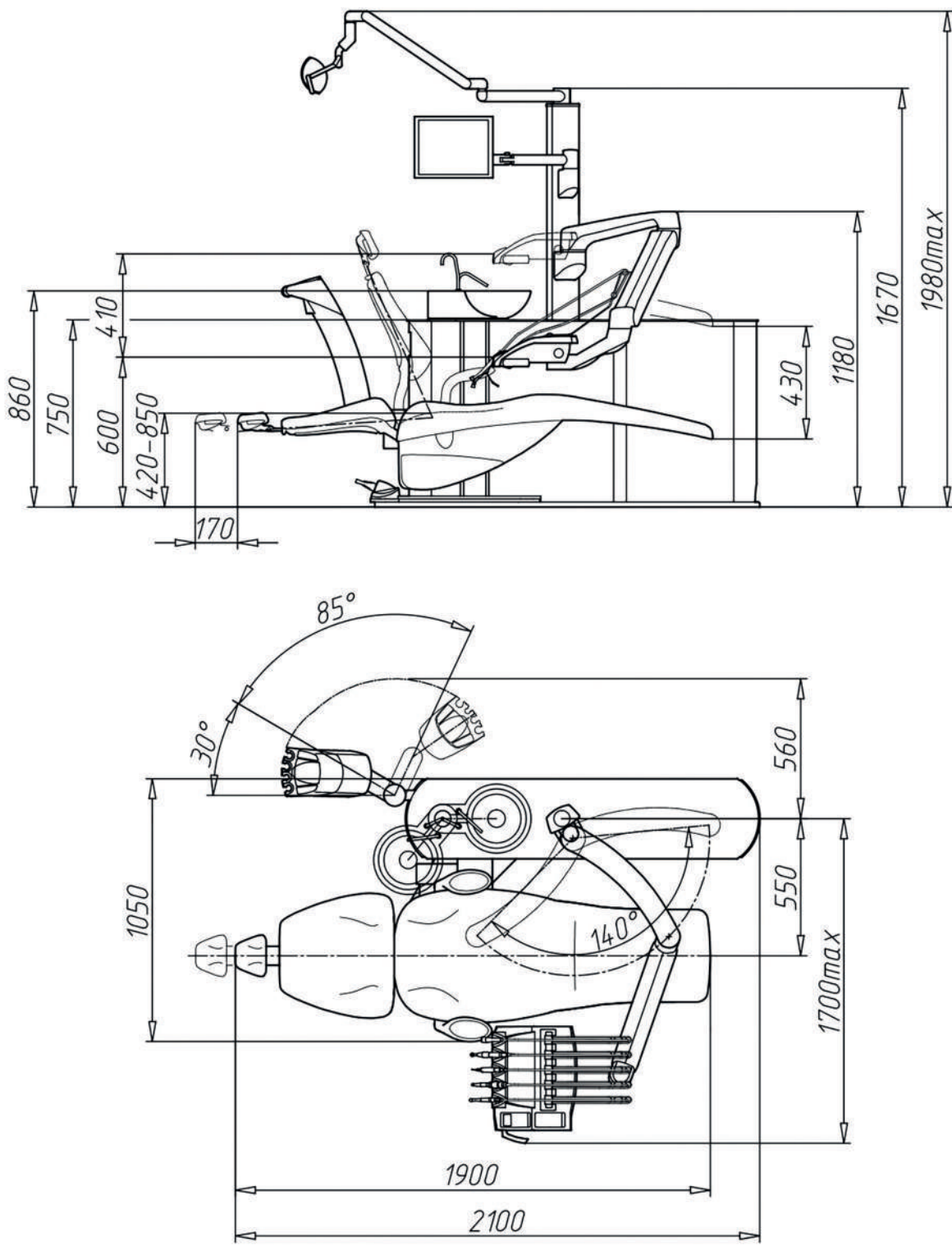

Габаритні розміри стоматологічної установки GALLANT AUTONOME із верхньою подачею інструментів та кріслом пацієнта STING

Сервісний набір для обслуговування стоматологічної установки
GALLANT AUTONOME
Артикул: 4.070.003

Сервісний набір для обслуговування стоматологічної установки
GALLANT AUTONOME CONSOLE
Артикул: 4.070.009



Заглушка (жовтого) фільтра
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 0725-100-02



Змінний картридж (жовтого) фільтра
пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни: 1 раз/3 місяці.

Артикул: 0725-041-60



HEPA фільтр
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 7119100010



Шланг пилевідсмоктувача
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 006.438.005-01



Шланг слиновідсмоктувача
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 006.438.004-01



Фільтр зворотного повітря
Поролон к25 Ø35x20
Періодичність заміни: 1 раз/3 місяці.

Артикул: 008.260.000



Екран плювальниці з сірою кришкою
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: vc-353-02b



Фільтр - елемент
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: AW20P-060S-7-40B



Фільтр пляшки СЧВ
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 005.886.010



Ущільнююче кільце СЧВ
20x24x2,5 (зелене)
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 94.3771.020-024-2,5



Гумові затискачі для каністри
періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 210400



Ущільнююче кільце СЧВ
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: AC-543-06



Ущільнююче кільце Ø 20мм
(комплект з 5 штук)
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 9000-402-54E



Випускний фільтр компресора
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 025200194-000



Якість, що вражає. Інновації, що надихають



Від проєкту до втілення, команда GALIT слідкує за кожним етапом роботи. При замовленні нестандартних опцій установки, першим кроком його виконання є технічне конструкторське рішення, тому клієнт отримує продукт із гарантією якості від виробника.

Виробничі площі GALIT становлять 5000 м кв. Наявність сучасних виробничих потужностей забезпечує максимальну точність і якість продукції, а також короткі терміни виконання замовлень.



Маючи професійний конструкторський відділ, сучасне обладнання, найкращих спеціалістів на виробництві, а також серед партнерів понад 30 відомих брендів стоматологічного обладнання, GALIT створює експертні рішення, що відповідають потребам та бажанням навіть найвибагливіших клієнтів.

Ми дбаємо про довговічність наших стоматологічних установок, оскільки цінуємо довговічність стосунків з нашими клієнтами!

EXPERTS IN DENTISTRY



GALIT

ПП «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці,
Тернопільський р-н, 47711, Україна

0 800 502 998

office@galit.te.ua
service@galit.te.ua



Версія: 202504015

Технічна специфікація чи зовнішній вигляд обладнання можуть бути змінені без попереднього узгодження.