


GALIT

EXPERTS IN DENTISTRY

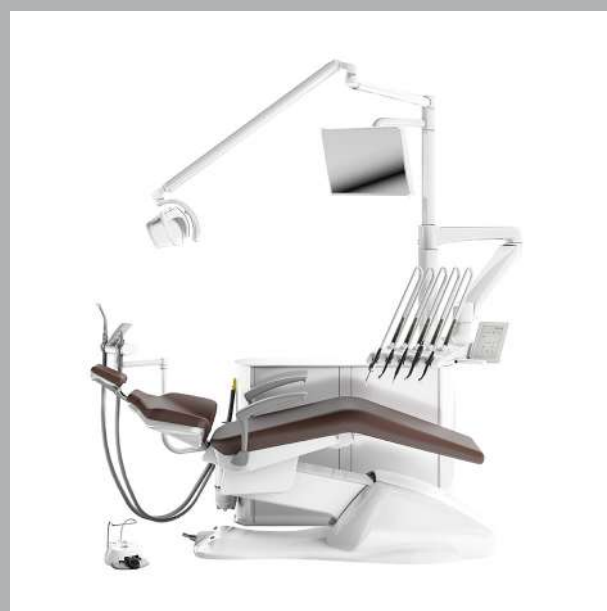

GALIT AUTONOME

Deutsch

GALIT - EXPERTS IN DENTISTRY

GALIT ist ein anerkannter Marktführer in der Herstellung medizinischer und dentaler Geräte aus der Ukraine. Diesen Status verdankt das Unternehmen der einzigartigen Kombination aus hochwertigen europäischen Komponenten, Vielseitigkeit und ergonomischem Design.

EXPERTISE ÜBER ALLES!

Ein Vierteljahrhundert über bleibt der Vektor der Marke GALIT unverändert: zuverlässige und langlebige Dentalgeräte zu entwickeln und innovative fachkundige Lösungen für Zahnärzte auf der ganzen Welt bereitzustellen. Wir legen einen großen Wert auf die Langlebigkeit unserer Produkte und Lösungen, da wir die Langlebigkeit unserer Beziehungen mit den Kunden zu schätzen wissen.

GALIT-WERTE:

Qualität — wir arbeiten nach den international anerkannten Qualitätsstandards für Medizinprodukte.

Vertrauen — Respekt, Sorgfalt und Aufrichtigkeit leiten unser Handeln.

Innovationen — wir verwenden die neuesten Technologien, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Partnerschaft – wir arbeiten eng mit Zahnärzten und unseren Handelspartnern zusammen, um gemeinsame Erfolge zu erlangen.

Engagement – wir schulen regelmäßig unsere Mitarbeiter und Partner, um den besten Service zu bieten.

Neue Möglichkeiten für Ihre Zahnarztpraxis

GALIT AUTONOME ist eine Behandlungseinheit, die ohne Anschlüsse an externe Leitungen betrieben werden kann.


Das ist eine innovative Lösung für Zahnärzte, die maximale Flexibilität bei der Entscheidung über den Anschlussort bietet. Alle erforderlichen Systeme sind unmittelbar in der Wassereinheit integriert, dadurch ist die Behandlungseinheit voll unabhängig von den externen Versorgungssystemen.




**Nur eine Steckdose
nötig**



Geräuschloser Betrieb

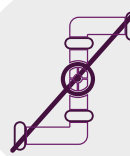

Keine Leitungen

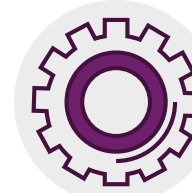

Alles in einem



Service Support



Einfache Bedienung



Sicherheit



Garantie

Eine Steckdose — eine vollwertige Zahnarztpraxis



Die Behandlungseinheit ist sofort einsatzbereit – einfach an das Stromnetz anschließen



Störgeräuschfreier Betrieb der Behandlungseinheit – maximaler Komfort für Zahnarzt und Patienten.

GERÄUSCHPEGEL			
			
GALIT AUTONOME	WINKELSTÜCK CA15L	TURBINE BORA 2 LED	UNIVERSELLE KANÜLE FÜR DEN STAUBSAUGER
51 dB	58 dB	59 dB	63 dB



GALIT AUTONOME PRO



GALIT AUTONOME




GALIT AUTONOME CONSOLE




GALIT AUTONOME MINI

ALL-IN-ONE LÖSUNG

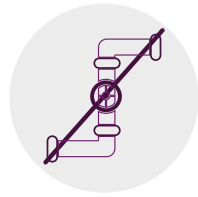

Die autonomen Behandlungseinheiten GALIT AUTONOME benötigen keine Anschlüsse an Wasser-, Druckluft-, zentrale Absaugung oder Abwasser.

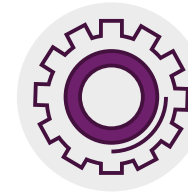


Alles funktioniert autonom dank der in die Wassereinheit eingebauten Module, die einen unterbrechungsfreien Betrieb auch in Räumen ohne übliche Dentalinfrastruktur gewährleisten.



Für saubere Raumluft sorgt der integrierte HEPA-Filter.

Für Desinfektion oder Wartung müssen lediglich zwei Deckel mit praktischen Magnetverschlüssen abgenommen werden.

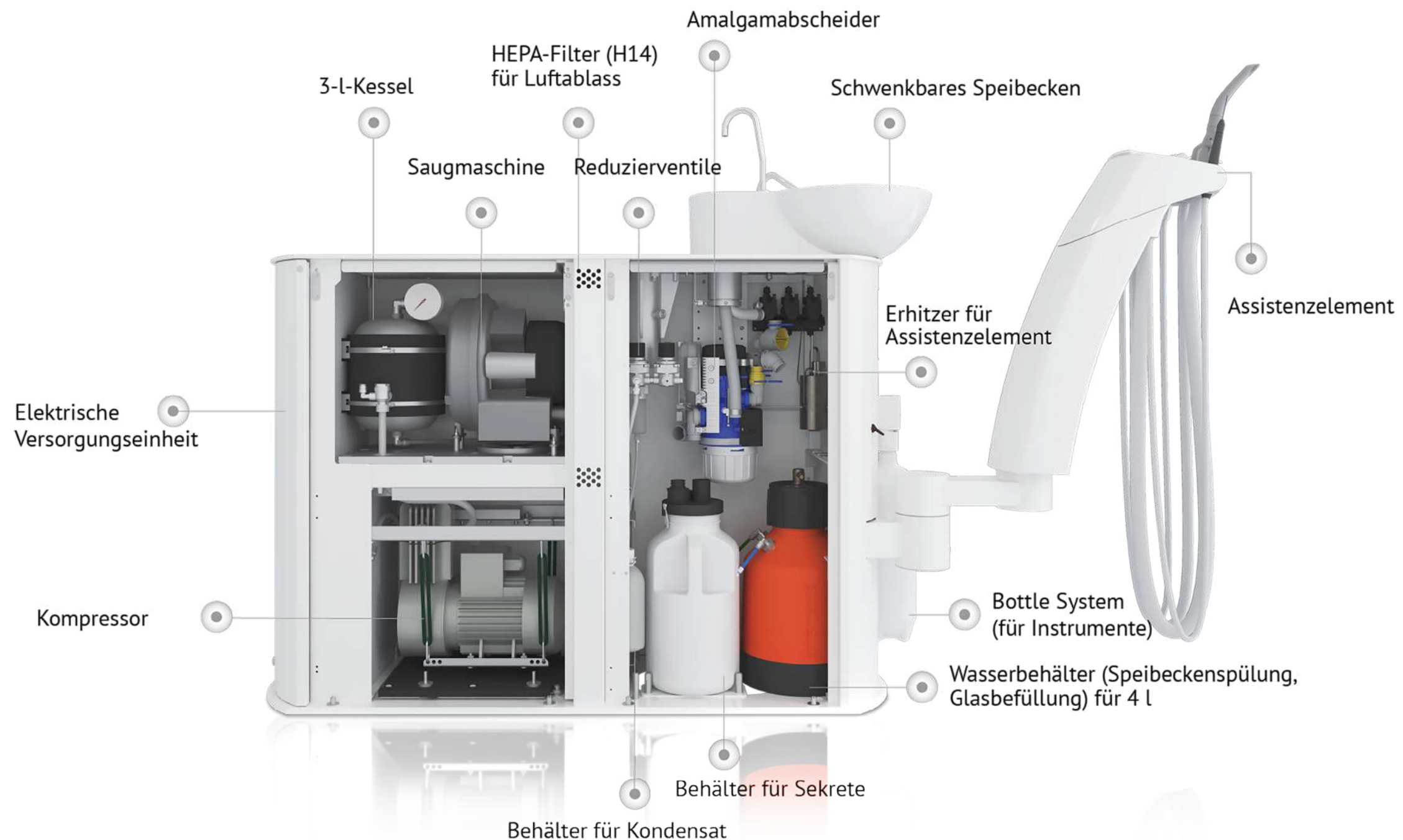



GALIT AUTONOME

Maximaler Komfort, minimaler Kraftaufwand

Wir bei GALIT haben dafür gesorgt, dass sich der Patient in jeder Phase der Behandlung so wohl wie möglich fühlt und der Arzt sich voll auf seine Arbeit konzentrieren kann.

Alle GALIT Behandlungseinheiten werden mit ergonomischen Stühlen der Premiumklasse vom italienischen Hersteller Tecnodent ausgestattet. Sie zeichnen sich durch ihr smartes Design, hohe Zuverlässigkeit und Komfort, der durch europäische Standards belegt ist, aus.



Polsterfarbe individuell aus einer Palette von über 25 Varianten wählbar. Für noch höheren Komfort sind neben der Standardpolsterung auch Versionen mit Soft Foam oder Memory Foam erhältlich.




Der Stuhl kann auch mit einer Armlehne links oder rechts ausgestattet werden, was den höchsten Patientenkomfort bietet.



Die zusätzliche Trendelenburg-Funktion (die Patientenfüße werden um 15° angehoben, wobei gleichzeitig die Armlehne um 90° gesenkt wird) für den regelrechten Kreislauf.



Der hochpräzise Joystick ermöglicht es, den Stuhl einfach und effizient ohne Hände zu bedienen.


			
9002 Weiß	300 40 20 Fliederblau	3012 Beigerot	5003* Dunkelblau
			
5011 Stahlblau	6001 Beigegrau	7502 Anthrazit	4009* Fliederfarben
			
3493 Türkis	3016 Korallenrot	6033 Minzgrün	8017 UM33** Braun sämisch
			
1300T Zinkgelb	1011 Hellgrau	3491 Immergrünblau	7021** Schwarzgrau Satin
			
1414 Rot	5515 Apfelgrün	1604T Bordeauxrot	15141*** Metallic Sparkle Blau
			
3494 Seidengrau	5023 Pastellblau	1007 Schwarz	14966*** Metallic Sparkle Grün
			
1009 D Electric blue	5510 Purpurrot		21366*** Platin

* Die Farbdarstellung kann von der Realität abweichen



GALIT AUTONOME CONSOLE

Dank der durchdachten Bauweise der GALIT-Behandlungseinheiten kann der Zahnarzt die Aufstellung des Patientenstuhls nach seinen Bedürfnissen gestalten.

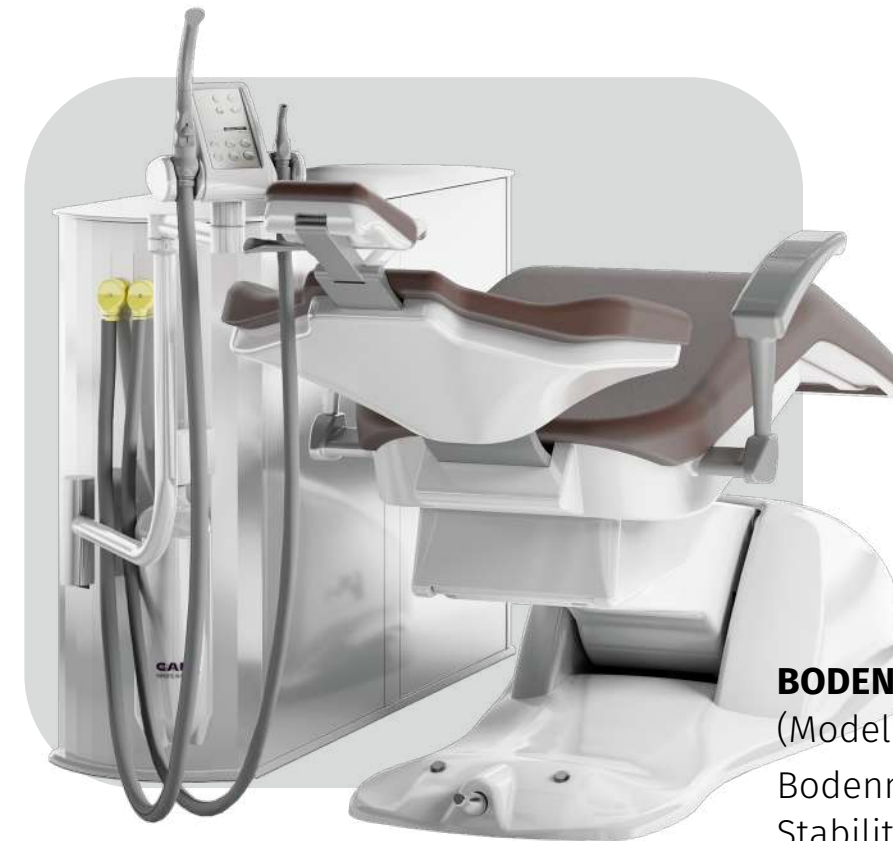

BODENMONTIERTER STUHL
(Modell Autonome)
Bodenmontage für maximale Stabilität und zuverlässige Sicherheit.



HÄNGEND MONTIERTER STUHL
(Modell Autonome Console)
Die Montage des Stuhls an der Wassereinheit schafft zusätzlichen Raum unter dem Stuhl und sorgt für mehr Beinfreiheit.



GALIT AUTONOME CONSOLE

SPEIBECKEN

Das um 180° schwenkbare Keramik-Speibecken erleichtert die Arbeit der Assistenten und garantiert maximalen Komfort für den Patienten.




ASSISTENZELEMENT

Assistenzelement DÜRR Comfort

Stellt eine effiziente Interaktion zwischen dem Zahnarzt und dem Assistenten sicher — ein Schlüsselfaktor für eine hochwertige und komfortable Behandlung.

Hauptvorteile:

- Neigung des Instrumentenhalters einstellbar.
- Einfache Horizontalbewegung des Elements.
- Kann mit 2 bis 5 Instrumenten ausgestattet werden.

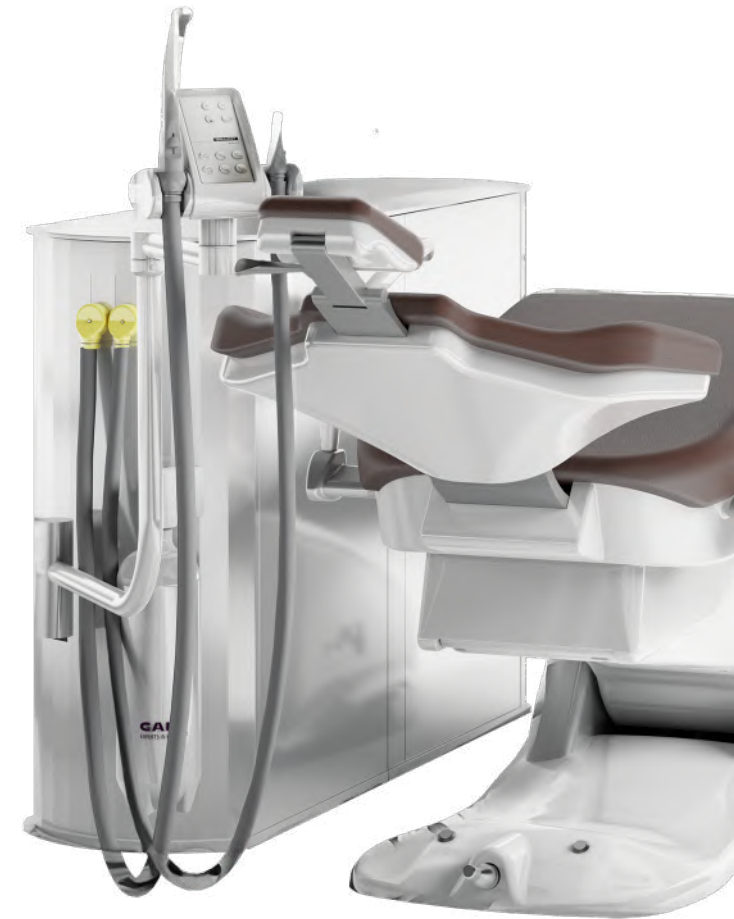

Assistenzelement PRO

Durch die smarte ergonomische Bauweise können Instrumente bequem positioniert werden und der Patientenstuhl ist einfach zu bedienen.

Hauptvorteile:

- Kann mit bis zu 4 Instrumenten ausgestattet werden.
- Selektivablage für die Sauger.
- Einfache Horizontalbewegung des Elements.



Ergonomie nach jahrelanger Praxiserfahrung



ARZTELEMENT MIT SCHWINGBÜGEL

Sanfte Ausgleichsfedern sorgen für eine leichte und komfortable Handhabung der Instrumente. Die Hand des Arztes wird auch bei längeren Behandlungen nicht überlastet.



ARZTELEMENT MIT HÄNGENDEN SCHLÄUCHEN

Einfache Kontrolle der Positionierung und des Neigungswinkels der Instrumente stellt maximalen Komfort und Ergonomie während der Arbeit sicher.

BEDIENFELD

Für das Arztelement sind zwei Bedienfeldvarianten vorgesehen: Standard-Bedienfeld oder das moderne mit Touch-Bedienung.

Standard-Bedienfeld

Lässt die Leistung aller Instrumente einfach regeln und die Position des Patientenstuhls verstellen. Alles in Griffnähe für eine vollständige Kontrolle des Behandlungsprozesses.



Touch-Bedienfeld

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche, erweiterten Funktionen und Echtzeitanzeige aller Parameter kann der Arzt blitzschnell auf sich ändernde Umstände reagieren sowie genauer und effizienter arbeiten.



Volle Kontrolle über den Arbeitsprozess: leicht und einfach.

INSTRUMENTE

Das Arztelement der Behandlungseinheit GALIT kann mit fünf Instrumenten ausgestattet werden, die nach den Wünschen des Arztes und den Standards der modernen Zahnmedizin individuell gewählt werden können. Alle Instrumente sind so angeordnet, wie es für den Arzt bequem und üblich ist, was den Komfort während der Arbeit sicherstellt und die Behandlungseffizienz erhöht.

Eine breite Auswahl von Instrumenten ermöglicht es, den Arbeitsplatz unter Beachtung der individuellen Vorlieben des Arztes sowie der Behandlungsart – von der Zahnvorsorgeuntersuchung bis zu chirurgische Eingriffe – anzupassen. So gewährleistet GALIT Ihre Flexibilität bei der Wahl sowie die Ergonomie der Anlagen.





GALIT AUTONOME PRO

LAMPE

Alle Behandlungseinheiten von GALIT werden mit Lampen vom Marktführer — der italienischen Firma FARO — ausgestattet. Jedes Modell bietet eine präzise, gleichmäßige Ausleuchtung, komfortable Bedienung und abnehmbare Griffe zum Autoklavieren.

Farbtemperatur:

5 700 K

Präzise
Zahnfarben für
Prothetik und
Therapie

5 000 K

Für Kieferorthopädie
und
Kinderzahnmedizin

4 000 K

Für
chirurgische
Eingriffe

2 700 K

Composave:
ohne vorzeitiges
Härten



MAIA LED

Leuchtfeld: 170 X 95 mm.

Beleuchtungsstärke:
3000 bis 45.000 LUX bei 700 mm
Abstand

5 000 K

EVA LED TUNABLE WHITE

Leuchtfeld: 190 X 100 mm.

Beleuchtungsstärke:
3000 bis 50.000 LUX bei 700 mm
Abstand.

5 700 K

5 000 K

4 000 K

2 700 K



B75. DUAL-MODE-LAMPE

ZAHNÄRZTLICHER MODUS

Leuchtfeld: 200 X 100 mm.

Beleuchtungsstärke:
bis zu 50.000 LUX bei 700 mm Abstand.

5 700 K

5 000 K

4 000 K

2 700 K



CHIRURGISCHER MODUS

Leuchtfeld: 250 mm in 1 m Entfernung.

Beleuchtungsstärke:
bis zu 110.000 LUX bei 1 m Abstand.
Maximale Beleuchtungsstärke
160.000 LUX bei 800 mm.

5 000 K

2 700 K



FUßANLASSER

Zuverlässige Kontrolle, präzise Ausführung

GALIT bietet Fußanlasser mit vielfältigen Funktionen, die eine präzise und komfortable Steuerung der Behandlungseinheit ermöglichen.



FUßANLASSER MIT KABEL

Stufenloser Betrieb über Druck- und Schieberegler.



KABELLOSER FUßANLASSER


Kabelloser Fußanlasser mit Bluetooth-Verbindung und Hochleistungsakku. Er bietet eine stabile Verbindung und garantiert eine lange Betriebsdauer von bis zu 6 Monaten.




PNEUMATIK-FUßANLASSER

Einfache Regulierung über Drucktaster.

ABMESSUNGEN DER BEHANDLUNGSEINHEIT

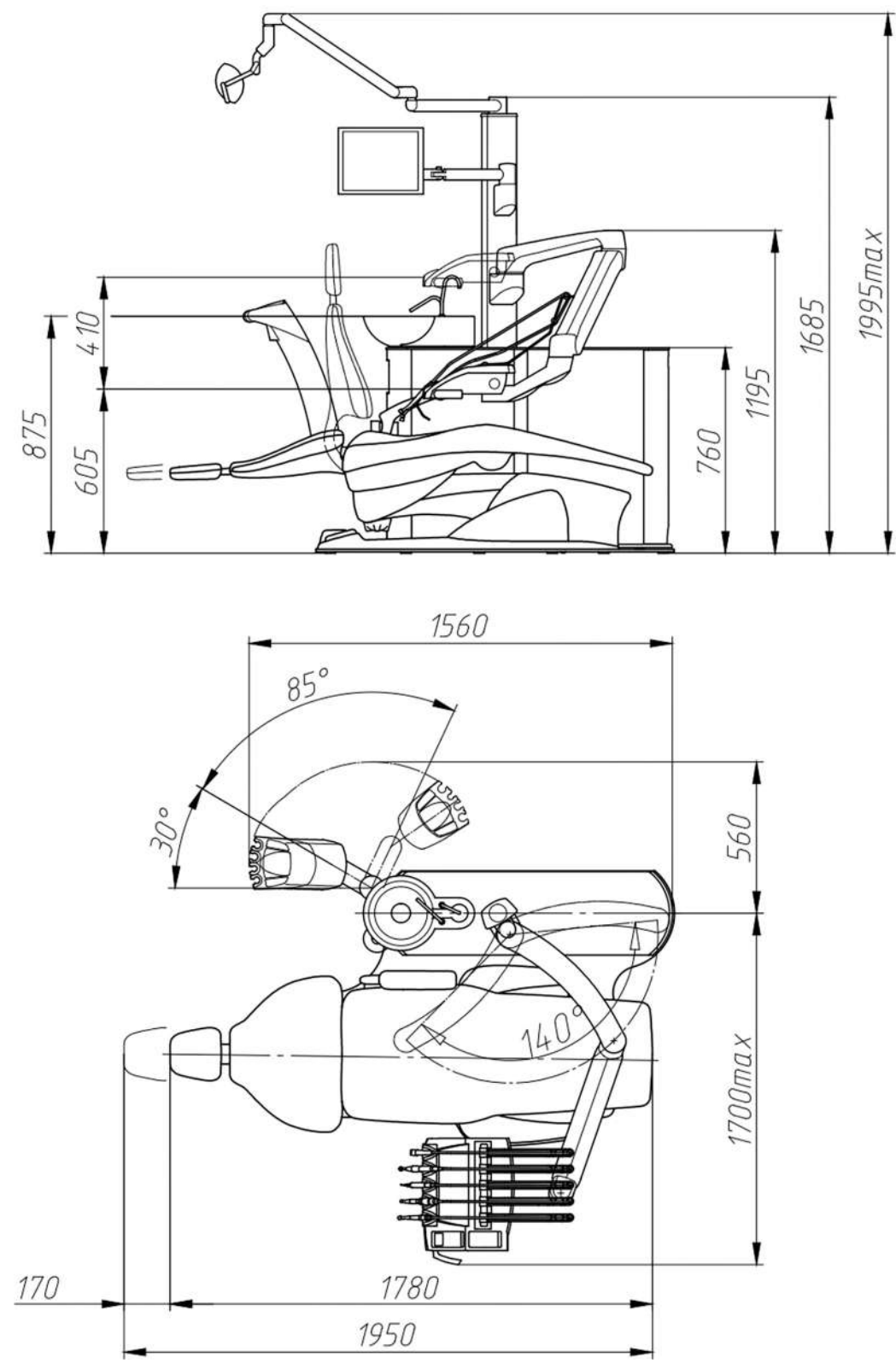

Abmessungen der GALIT Autonome Behandlungseinheit mit Arztelement mit Schwingbügel und ECO NEXT Patientenstuhl, angegeben in Millimetern (mm)

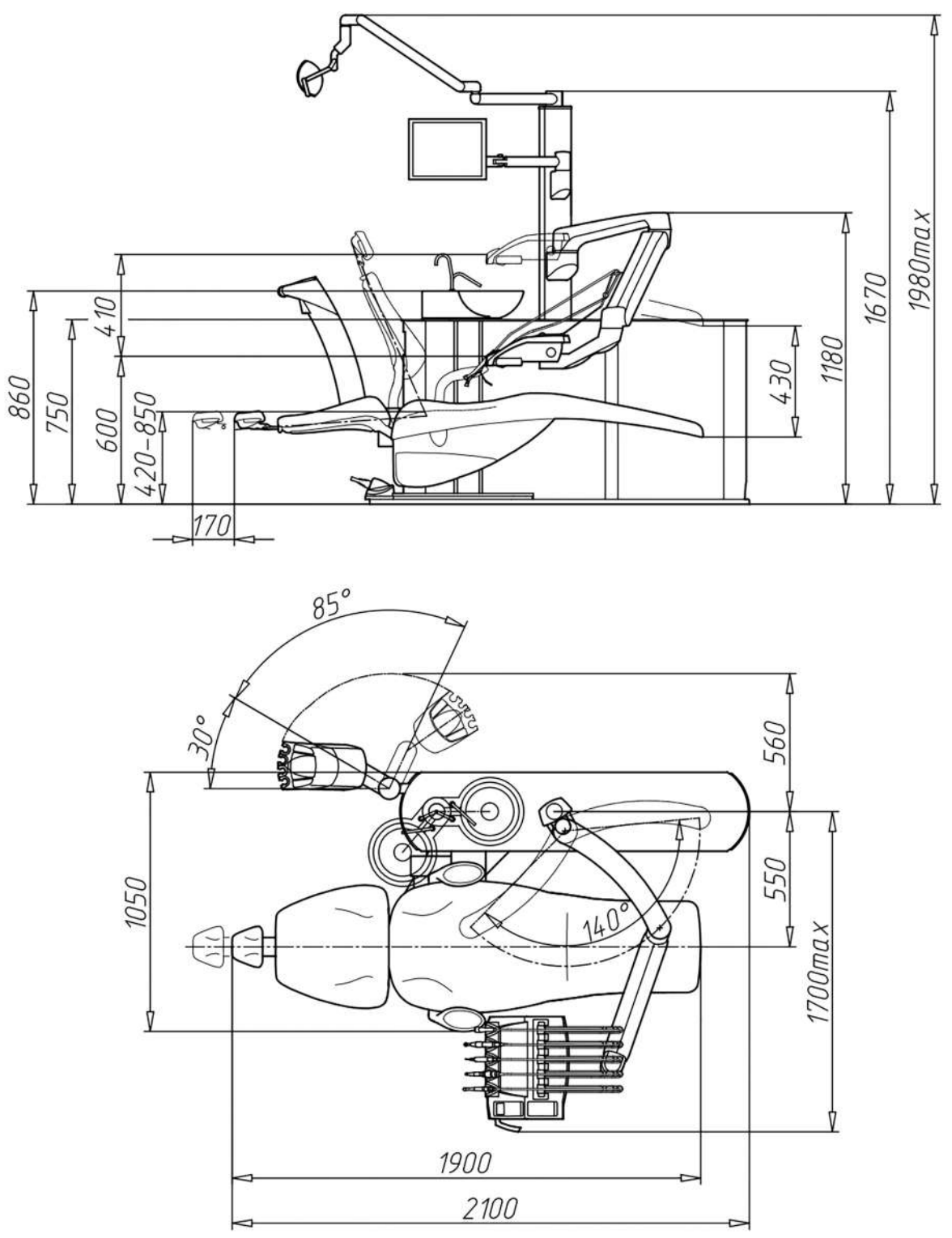

Abmessungen der GALIT Autonome Behandlungseinheit mit Arztelement mit Schwingbügel und STING Patientenstuhl, angegeben in Millimetern (mm)

Qualität, die beeindruckt. Innovationen, die inspirieren



Vom Entwurf bis zur Umsetzung, das GALIT Team begleitet jede Arbeitsphase. Bei einer Bestellung kundenspezifischer Optionen ist der erste Schritt deren Abwicklung eine konstruktionstechnische Lösung, daher erhält der Kunde ein Produkt mit Qualitätsgarantie vom Herstellers.

Die Produktionsflächen von GALIT betragen 5000 m2. Dank der verfügbaren modernen Produktionskapazitäten können die höchste Präzision und Qualität der Produkte sowie kurze Lieferzeiten sichergestellt werden.



Mit unserer professionellen Konstruktionsabteilung, modernen Fertigungsanlagen, den besten Spezialisten in der Produktion und über 30 bekannten Marken für dentale Geräte unter den Partnern, schafft GALIT Expertenlösungen, die den Bedürfnissen und Wünschen selbst der anspruchsvollsten Kunden gerecht sind.

Wir legen Wert auf die Langlebigkeit unserer Behandlungseinheiten, da wir die Langlebigkeit unserer Kundenbeziehungen zu schätzen wissen!

GALIT – EXPERTS IN DENTISTRY





Hersteller

GALIT PC
6E, 15 Kvitnya Str., v. Baikivtsi, Ternopil
region, 47711, UKRAINE

+380-800-502-998

office@galit.te.ua
service@galit.te.ua

Europäische Vertretung

Galdent CZ s.r.o.
K.Vapence 448, 41503 Teplice, Czech Republic

+420-775-471-378

export@galit.te.ua
galdentcz@gmail.com



Version: 20250808

Wir behalten uns vor, technische Spezifikation bzw. Aussehen der Anlagen ohne vorherige Absprache zu ändern.