

Мийно-дезінфікуючі машини MELAG

Для оптимізації робочого процесу

Очищення та дезінфекція за допомогою термодезінфектора MELAG є найбезпечнішим і найефективнішим способом забезпечення надійної знезараження інструментів. Скористайтесь перевагами та захистіть своїх пацієнтів і команду:



Ефективність:

Зменшення робочого навантаження та економія часу та грошей



Безпека:

Підвищення безпеки за рахунок мінімізації контакту персоналу з інструментами



Відповідність законодавству:


Ведення протоколів процесу знезараження забезпечує можливість відтворення



Оптимізація процесу:

Відразу ж доступність не хірургічних інструментів після автоматичного очищення та дезінфекції (відповідно до національних стандартів)

Окупність лише через 25 місяців з MELatherm®

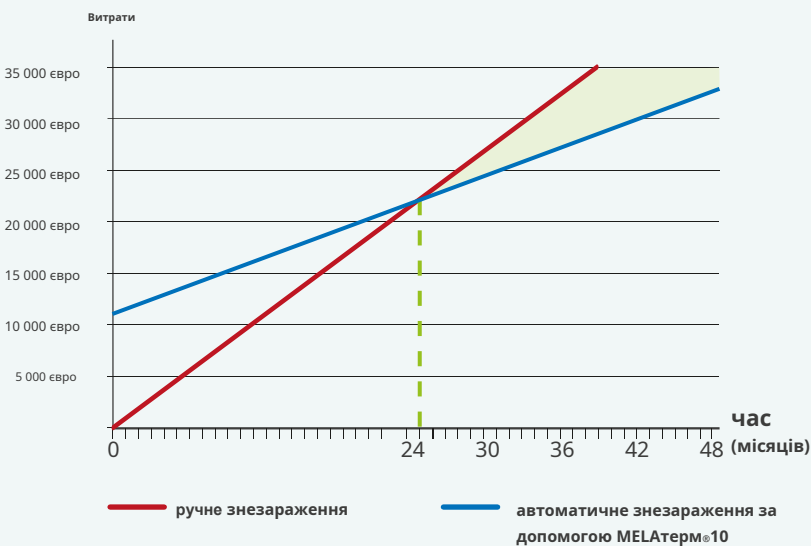

Кількість робочих днів на місяць - 22
Циклів на день - 2
Погодинна оплата асистента - 18,5 євро
Вартість дезінфекційної ванни - 1,8 євро
Витрати на засоби, електроенергію, воду - 2 євро
Час роботи на ручну дезінфекцію (год) - 1
Час роботи на автоматичну дезактивацію (год) - 0,25
Вартість циклу дезінфекції (вручну) - 20,3 євро
Вартість циклу дезінфекції (автоматично) - 6,63 євро

Витрати на місяць (вручну) 893,20 євро
Витрати на місяць (автоматично) 437,33 євро

Контрольний список для термодезінфекторів

Порівняйте нас з іншими виробниками

Ми переконані в якості, надійності та інноваційних перевагах наших мийно-дезінфікуючих машин. У наступному контрольному списку підсумовано основні характеристики продукту, щоб полегшити порівняння наших мийно-дезінфікуючих машин із пристроями інших виробників на ринку.

Особливості продукту	Ваші переваги	MELatherm®10 Evolution			
Активне сушіння	➔ Активна внутрішня та зовнішня сушка захищає ваші інструменти від корозії та пошкоджень, а також збільшує термін їхньої експлуатації	✓			
Інтуїтивно зрозуміле керування	➔ Сенсорний дисплей із вбудованими відеоуроками забезпечує безпечну роботу пристрою.	✓			
Інтеграція	➔ Інтегровані технологічні інгредієнти та дозатор економлять цінний простір в приміщенні для стерилізації	✓			
Рідкі технологічні засоби	➔ Автоматичне дозування рідких технологічних засобів гарантує ідеальні результати очищення та сушіння.	✓	✓		
Документація	➔ За допомогою CF-карти та двох мережевих адаптерів передача файлів журналу виконується простим і законодавчо сумісним способом без необхідності додаткових програмних рішень.	✓			
Підтвердження партії на пристрої	➔ Аутентифікація користувача та затвердження партії дають змогу негайно використовувати нехірургічні інструменти (будь ласка, дотримуйтеся національних стандартів).	✓			
Оптимізована мийна камера	➔ Камера забезпечує ефективне завантаження, швидкий час циклу та низькі витрати на споживання лише близько 1 євро/цикл.	✓			
Центральний фільтр, який очищається	➔ Інноваційний контрольний індикатор інжекторної рампи надійно перевіряє роботу фільтра. Якщо індикатор не спрацьовує, фільтр може бути швидко та легко очищений	✓			
Обробка наконечників скалера	➔ Знезараження наконечників ультразвукового скалера за допомогою динамометричного ключа гарантує максимальну безпеку користувача.	✓			
Контроль тиску ополіскування і ополіскувачів	➔ Моніторинг цих параметрів забезпечує абсолютну надійність процесу.	✓	✓		
Розширені цикли обслуговування	➔ Цикл технічного обслуговування тривалістю 24 місяці або 1000 циклів зменшують витрати на поточне обслуговування	✓			
Відгуки клієнтів	➔ Надихайтесь іншими MELatherm®10 клієнтів на www.melag.com/en/references	✓			



Ви вже задоволені нашими паровими стерилізаторами MELAG? Купуючи термодезінфектор MELAG, скористайтесь перевагами економії, досягнутої завдяки скоординованому технічному обслуговуванню та перевірці!

MELAtherm®10 Evolution

Комфорт і продуктивність доведені до досконалості

MELAtherm®10 Evolution поєднує в собі випробувані функції MELAtherm®10 із рядом інноваційних технологій. З максимальною продуктивністю та максимальним комфортом MELAtherm®10 Evolution забезпечує ще більш ефективний процес дезінфекції інструментів.

80 різних кошиків та інших аксесуарів доступні для MELAtherm® 10 Evolution дозволяє підібрати індивідуальну конфігурацію відповідно до індивідуальних потреб клініки, що забезпечує найкращий робочий процес. Підвищений тиск промивання у MELAtherm®10 Evolution дозволяє одночасно дезінфікувати значно більше інструментів ніж у MELAtherm®10 при майже однаковому споживанні електроенергії, води та технологічних агентів.

Таким чином, можлива чистка та дезінфекція інструментів для 45 пацієнтів лише за один цикл із рекордною швидкістю!

MELAtherm®10 Evolution доступний у версії змінного струму (230 В) або трифазного струму (400 В).

MELAtherm®10 Evolution DTA

Вбудоване рішення - трифазний струм

Розміри пристрою (ШхВхГ): 60 x 82 x 68 см,

підходить під стільницю 60 см

Електричне підключення: 3N AC 400V, 50 Hz, 3 x 16A

вкл. CF-карта

№ замовлення ME20020

690 270 грн

(з урахуванням базової корзини)

MELAtherm®10 Evolution DTB

Вбудоване рішення - змінний струм

Розміри пристрою (ШхВхГ): 60 x 82 x 68 см,

підходить під стільницю 60 см

Електричне підключення: 230 В, 50 Гц, 16 А

вкл. CF-карта

№ замовлення ME20021

690 270 грн

(з урахуванням базової корзини)



Підлоговий блок

забезпечує додатковий простір для зберігання, гарантує ергономічне завантаження та роботу.

Розміри (ШхВхГ): 60 x 40 x 60 см

№ замовлення ME11021

52 270 грн



Кришка з нержавіючої сталі

у випадку, якщо пристрій не закритий наскрізною поверхнею

№ замовлення ME65310

11 000 грн



Сенсорний дисплей:

Управління та вибір програми такі прості, як ніколи раніше, завдяки великому сенсорному дисплею Smart. Інтегровані відеоінструкції з усіх відповідних питань експлуатації гарантують зрозумілу концепцію експлуатації.



ProControl:

Виконання автентифікації користувача та пакетного затвердження безпосередньо на пристрої економить час і забезпечує юридичну впевненість



AquaBoost:

Новий високопродуктивний насос забезпечує на 44 % кращий результат очищення та більшу продуктивність: дезінфікує до 23 наконечників і турбін за цикл.



Більше засобів для миття та

дезінфекції, ніж будь-коли раніше:

Відкрийте для себе унікальну концепцію пристрою MELAtherm®10 Evolution

Відскануйте QR-код і дізнайтеся більше.



Кошики та адаптери для всіх сфер медицини

Досконалість у найменших деталях

Оптимізована для всіх медичних практик камера мийно-дезінфікуючих машин MELAG забезпечує короткий час роботи, ергономіку, низьке споживання технологічних засобів і оптимальні результати очищення. Використовуйте понад 80 різних корзин і адаптерів, щоб налаштувати прилад відповідно до своїх потреб – незалежно від розміру та спеціалізації вашої клініки. Широкий асортимент контейнерів MELAstore® забезпечує найкращі рішення для дезінфекції великої кількості інструментів.

Базова конфігурація для стоматологічної клініки

Інструменти для понад 45 пацієнтів і до 33 порожнистих інструментів можна дезінфікувати за один цикл за рекордно короткий час:

- 1x ME84610: Базова корзина з інжекторною рейкою та фільтром Cleanfinity
- 1x ME80135: Універсальний тримач Flex 2
- 3x ME01181: Контейнер MELAstore® 100
- 1x ME80020: Корзина Flex 2
- 2xME80110: Тримач для ножиць, затискачів і відбиткових ложок
- 1x ME00184: Стандартна корзина для приладів **Standard**
- 1x ME00133: Корзина для дрібних деталей **Small-parts**

Як опція: адаптери для інжекторної рейки, корзина інжектора Flex 1 і 6 вставок для насадок скалера



Базова конфігурація для операційних щеплено - лицьової хірургії

Інструменти повторно обробляються як набір у MELA зберігати®мити лотки в рекордні терміни:

- 1x ME84610: Базова корзина з інжекторною рейкою та фільтром Cleanfinity
- 1x ME80136: Універсальний тримач Flex 3
- 6x ME01181: Контейнер MELAstore® 100
- 1x ME80135: Універсальний тримач Flex 2
- 3x ME01182: Контейнер MELAstore® 200
- 1x ME00195: Корзина для інструментів **Compact**

Як опція: адаптери для інжекторної рейки



Базова конфігурація для ортодонтів

Наступна конфігурація завантаження ідеально підходить для дезінфекції інструментів ортодонтичної клініки:

- 1x ME84610: Базова корзина з інжекторною рейкою та фільтром Cleanfinity
- 2x ME80020: Корзина Flex 2
- 4x ME80110: Тримач для ножиць, затискачів і відбиткових ложок
- 1x ME00184: Стандартний кошик для приладів

Як опція: адаптери для інжекторної рейки, корзина інжектора Flex 1



Базова конфігурація для офтальмологічної клініки

MELAtherm® з новими контейнерами MELAstore® Ophthalmology дозволяє очищати та дезінфікувати до шести наборів для лікування катаракти лише за 42 хвилини (плюс сушіння):

- 1x ME80440: Базова корзина з інжекторною рейкою та пластиковим центральним фільтром
- 2x ME80136: Універсальний тримач Flex 3
- 6x ME01189: Контейнер MELAstore® Ophthalmology

Як опція: адаптери та заглушки



Базова конфігурація для гінекологічної клініки

Після автоматизованого очищення, дезінфекції та сушіння для лікування пацієнтів доступні до 32 дзеркал. Корзина Flex 6 забезпечує додатковий простір для інших інструментів:

- 1x ME00188: Базова корзина без інжекторної рампи
- 1x ME80255: Корзина Flex 6
- 2x ME80410: Корзина Flex specula



Базова конфігурація для оториноларингологічної клініки

192 вушних дзеркала та багато інших інструментів можна очистити, продезінфікувати та висушити лише за 60 хвилин:

- 1x ME00200: Базова корзина з інжекторною рейкою (з 11 глухими гвинтами)
- 1x ME80020: Корзина Flex 2
- 1x ME80030: Корзина Flex 3
- 1x ME00195: Корзина для інструментів Compact
- 1x ME80090: Верхня рамка для вушних дзеркал Flex 2, розмір сітки 20 мм
- 1x ME80435: Верхня рамка для носових дзеркал Flex 1 (вкл. 2 фіксуючі затискачі)

Як опція: адаптери для інжекторної рейки



Базова конфігурація для медичної клініки

MELAG має низку корзин, шлангових з'єднань і адаптерів для 33 інструментів із порожнистим корпусом. Термодезінфектор відповідає потребам хірургічних, ортопедичних, урологічних, дерматологічних і загальних практик і клінік.

- 1x ME00200: Базова корзина з інжекторною рейкою (з 11 глухими гвинтами)
- 1x ME80255: Корзина Flex 6
- 2x ME80030: Корзина Flex 3

Як опція: адаптери для інжекторної рейки



MEtherm®

Найкращі технологічні засоби для MELAtherm® серії

MEtherm® технологічні засоби оптимально адаптовані до автоматизованої дезінфекції інструментів за допомогою термодезінфекторів MELAG. MEtherm® асортимент складається з слаболужного миючого засобу MEtherm®51, нейтралізатора на основі лимонної кислоти MEtherm®55 і ополіскувача MEtherm®61. MEtherm® технологічні засоби були оптимально узгоджені для досягнення найкращих результатів очищення та сушіння, підвищеної безпеки, ще більшого скорочення споживання та, отже, економії коштів.

MEtherm®51

Тепер ще краще: слаболужний миючий засіб, ємність 5 літрів

MEtherm® 51 з новою формулою - це ще більш потужний м'який лужний миючий засіб для автоматизованої обробки інструментів для автоматизованої обробки інструментів в MELAtherm®. Особливо високі показники очищення досягаються завдяки використанню комбінації ферментів і поверхнево-активних речовин. MEtherm® 51 не містить силікатів, зводить до мінімуму утворення нальоту на інструментах і мийній камері і підтримує їх збереження завдяки оптимальній сумісності з матеріалами.



4 740 грн

№ замовлення ME11630



Ми наполегливо рекомендуємо використовувати MEtherm®51 для нових установок. Для існуючих приладів важливо перейти з MEtherm®50 до MEtherm®51 перед наступним сервісом, щоб повною мірою скористатися перевагами нової формули. MEtherm®50 буде доступний лише на короткий час протягом перехідного періоду.

4 740 грн

№ замовлення ME11620

MEtherm®55 C

Нейтралізатор на основі лимонної кислоти, ємність 5 літрів

MEtherm®55 призначений для автоматизованої дезінфекції інструментів після їх лужного очищення у MEтерм®51. MEtherm®55 запобігає утворенню відкладень на інструментах і камері термодезінфектора, одночасно оптимізуючи результати очищення. MEtherm®55 — нейтралізатор, який надзвичайно безпечний для матеріалів, спеціально розроблений для обробки стоматологічних наконечників та інструментів, що використовуються в офтальмології.



3 580 грн

№ замовлення ME11621

MEtherm®61

Ополіскувач, флакон 940 мл

MEtherm®61 — рідкий ополіскувач з нейтральним pH для автоматизованої дезінфекції інструментів у термодезінфекторі. MEtherm®61 гарантує сушіння інструментів без плям і сприяє оптимізації процедури сушіння. Використання MEtherm®61 запобігає утворенню плівки на інструментах і в мийній камері.



1 170 грн

№ замовлення ME11627

Регенеруюча сіль

Спеціально гранульована та високоочищена регенеруюча сіль для вбудованої системи пом'якшення води MELAtherm® серії.







№ замовлення ME80000

Базові корзини та інжекторні рейки

База для індивідуального навантаження

Базові кошики з інжекторною рейкою оснащені інжекторними форсунками, фіксуючі гвинти або 11 глухих гвинтів та можуть бути оснащені різними адаптерами. Залежно від сфери доступні різні базові кошики (Розміри (ДхШхВ): 43 x 42 x 9 см):

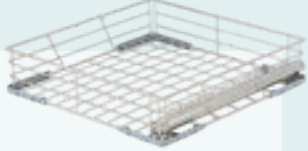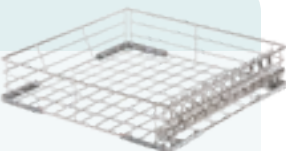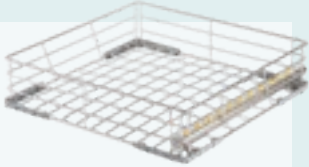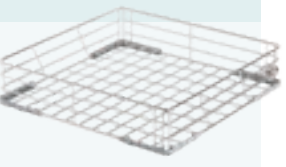Базова корзина з інжекторною рейкою та фільтром Cleanfinity з 11 глухими гвинтами з нержавіючої сталі та щіткою для очищення (не підходить для використання в офтальмології) № замовлення ME84610	 47 510 грн	Базова корзина з інжекторною рейкою з 11 інжекторними форсунками і пружинними затискачами № замовлення ME00197	 35 770 грн
Базова корзина з інжекторною рейкою з 11 пластиковими глухими гвинтами № замовлення ME00200	 31 230 грн	Базова корзина без інжекторної рейки Якщо вам не потрібно дезінфікувати інструменти з порожнистим корпусом № замовлення ME00188	 27 760 грн
Базова корзина з інжекторною рейкою та одноразовим центральним фільтром (2 шт.) для офтальмологічних кабінетів і клінік № замовлення ME80440		47 230 грн	

Комплект оновлення та аксесуари для інжекторної рейки з центральним фільтром

У вас уже є базовий кошик з інжекторною рейкою і ви хочете перейти на очищення з центральним фільтром? Тоді скористайтеся перевагами нашого комплекту оновлення та аксесуарів.

Комплект оновлень інжекторної рейки з фільтром Cleanfinity і щіткою для очищення для заміни інжекторної рампи без центрального фільтра (не підходить для використання в офтальмології) № замовлення ME84620	 26 750 грн	Фільтр Cleanfinity з щіткою для чищення для заміни одноразового центрального фільтра та фільтра Cleanfinity (не підходить для використання в офтальмології) № замовлення ME84630	 14 340 грн
Щітка для очищення фільтра Cleanfinity входить в комплект поставки фільтра Cleanfinity № замовлення ME84640	 1060 грн	Одноразовий центральний фільтр для заміни використаного фільтра в рейці інжектора № замовлення ME80490	 3 410 грн

MELAcontrol® Перевірка очищення

Слідкуйте за результатом очищення: за допомогою тестової системи, що складається з індикатора очищення та тримача, ви можете контролювати ефективність очищення інструментів у базовій корзині або на рейці інжектора відповідно до DIN EN ISO 15883-5.


Незабаром

MELAcontrol® Перевірка очищення Індикатори очищення, 100 шт № замовлення ME01072		MELAcontrol® Перевірка очищення Тримач для перевірки зовнішнього очищення в базовій корзині № замовлення ME01073		MELAcontrol® Перевірка очищення Тримач для перевірки внутрішнього очищення на рейці інжектора № замовлення ME01074	
---	---	---	---	---	---

Корзини та адаптери

Оптимальне використання базової корзини

Усі компоненти ідеально вирівняні, щоб можна було обладнати основний кошик іншими кошиками або вставними полицями. Адаптуйте шість сегментів основного кошика до ваших індивідуальних потреб:

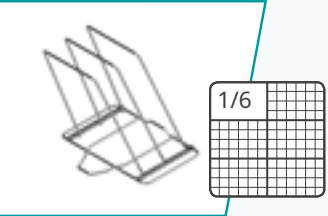


Універсальний тримач Flex 1

Для зручного завантаження з довільно обраною відстанню до:
4х контейнер MELAstore® 50,
2х контейнер MELAstore® 100,
1х контейнер MELAstore® 200 або 1х Сітчаста касета (№ замовлення ME80185)
Додатковий кронштейн (№ замовлення ME80133)

№ замовлення
ME80134

5 570 грн

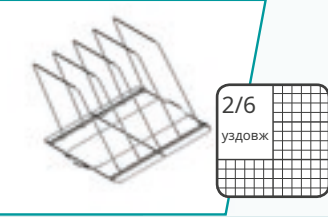


Універсальний тримач Flex 2

Для зручного завантаження з довільно обраною відстанню до:
8х контейнер MELAstore® 50,
4х контейнер MELAstore® 100,
3х контейнер MELAstore® 200 або 3х Сітчаста касета (№ замовлення ME80185)
Додатковий кронштейн (№ замовлення ME80133)

№ замовлення
ME80135

7 970 грн

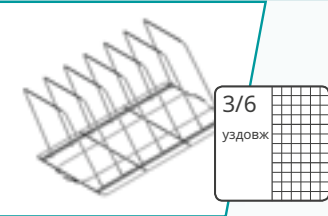


Універсальний тримач Flex 3

Для зручного завантаження з довільно обраною відстанню до:
12х контейнер MELAstore® 50,
6х контейнер MELAstore® 100,
5х контейнер MELAstore® 200 або 5х Сітчаста касета (№ замовлення ME80185)
Додатковий кронштейн (№ замовлення ME80133)

№ замовлення
ME80136

10 360 грн

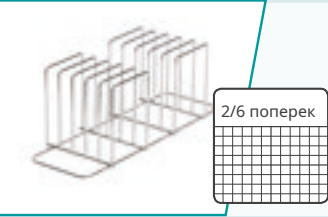


Тримач для 5 контейнерів або 10 половинок

Для прийому до 5 контейнерів або 10 половинок

№ замовлення
ME80590

6 410 грн

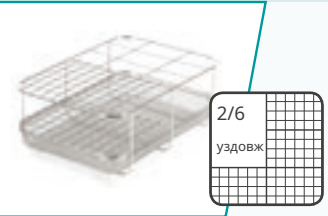


Корзина для інструментів G

Для вертикально стоячих інструментів, таких як ножиці, пінцети, затискачі, зонди, дзеркала та насадки стоматологічних відсмоктувачів діаметром від 11 до 16 мм
Можна комбінувати з пластиною для голчастих наконечників (№ замовлення ME00186)

№ замовлення
ME00131

9 800 грн

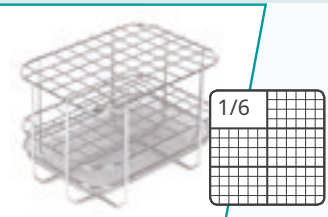


Корзина для інструментів compact

Для вертикально стоячих інструментів, таких як пінцети, зонди, дзеркала, носові дзеркала та насадки стоматологічних відсмоктувачів діаметром від 11 до 16 мм
Можна комбінувати з пластиною для голчастих наконечників (№ замовлення ME00186)

№ замовлення
ME00195

8 670 грн

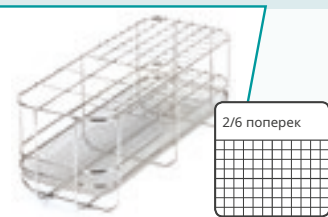

Корзина для приладів standard

Для вертикально стоячих інструментів, таких як пінцети, зонди, дзеркала, ножиці, затискачі та насадки стоматологічних відсмоктувачів діаметром від 11 до 16 мм
Можна комбінувати з пластиною для голчастих наконечників (№ замовлення ME00186)

№ замовлення
ME00184

9 090 грн



Контейнер MELAstore® Ophthalmology

Контейнер для безпечної та дбайливої обробки всіх інструментів для хірургії катаракти (макс. 6 комплектів за цикл MELAtherm®)
Контейнер MELAstore® Ophthalmology упаковують і стерилізують у контейнері MELAstore® 200 (Набір вкл. адаптер і трубки)
Ідеально поєднується з базовою корзиною з інжекторною рейкою та пластиковим центральним фільтром (№ замовлення ME80440) і 2х універсальним тримачем Flex 3 (№ замовлення ME80136)

№ замовлення
ME01189

21 750 грн

НОВИЙ




Контейнер MELAstore® 50

Контейнер MELAstore® 50 (ШхВхД): 11,8 x 3 x 18 см
Для безпечної та ефективної обробки окремих інструментів і наборів інструментів (наприклад, для профілактики або в ортопедії) в MELAtherm®

№ замовлення
ME01177

9 970 грн

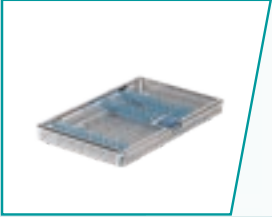


Контейнер MELAstore® 100

Контейнер MELAstore® 100 (ШхВхД): 17,6 x 3 x 27,5 см
Для безпечної та ефективної обробки окремих інструментів і наборів інструментів (наприклад, для лікування пародонтиту, консервативного лікування або невеликих хірургічних процедур) у MELAtherm®

№ замовлення
ME01178

13 410 грн

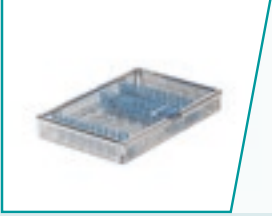

Контейнер MELAstore® 200

Контейнер MELAstore® 200 (ШхВхД): 17,6 x 4,3 x 27,5 см
Для безпечної та ефективної обробки окремих інструментів та наборів інструментів (наприклад, для оральної хірургії) у MELAtherm®

№ замовлення
ME01179

15 350 грн



Захист наконечників для корзини для інструментів

Запобігає проникненню гострих інструментів у корзину
Можна розмістити в корзині для інструментів standart (№ замовлення ME00184), корзина G (№ замовлення ME00131) і корзині для інструментів compact (№ замовлення ME00195)

№ замовлення
ME00186

1 200 грн




Корзина для дрібних інструментів Small-parts comfort

Для безпечної дезінфекції дрібних інструментів і дрібних деталей
Зручну корзину для дрібних інструментів можна розмістити в корзинах Flex
Розміри (ШхВхГ): 8,4 x 7,15 x 7 см

№ замовлення
ME80001

4 440 грн

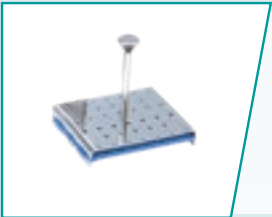

Тримач борів

Для безпечної обробки обертових інструментів (наприклад, борів) з діаметром 1,6 мм і 2,35 мм (до 19 штук кожен)
Тільки в поєднанні з корзиною для дрібних речей Small-parts comfort

№ замовлення
ME80002

2 110 грн



Корзина для дрібних інструментів Small-parts

Для безпечної обробки найменших інструментів
Корзину Small-parts можна розмістити в корзинах Flex або корзинах для інструментів
Розміри: ø 7,6 см x довжина: 18 см


№ замовлення
ME00133

1 160 грн

Корзини Flex

Система корзин Flex надає багато можливостей

Розробка компанії MELAG включає варіативну систему Flex, яка забезпечує численні комбінації завантаження інструментів, що дозволяє оптимально використовувати мийну камеру. Використовуючи корзину Flex 6 як основу, можна в неї вкладати різні корзини Flex 1, 2 і 3, Specula або тримач для відбиткових ложок або навісних інструментів на двох рівнях. На малюнку праворуч показано верхня рамка Flex 2 для вушних дзеркал, вкладає у корзину Flex 3, у поєднанні з корзиною Flex 1 і верхньою рамкою Flex 1 для вушних дзеркал.

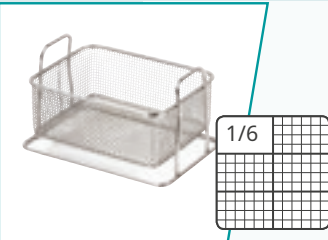


Корзина Flex 1

Для рівних інструментів, наприклад, ножиць, пінцетів, дзеркал
Можна складати в стійку з корзинами Flex 1, 2, 3 і 6
Внутрішні розміри (ШхВхГ): 14,5 x 6 x 11 см

№ замовлення
ME80010

7 440 грн

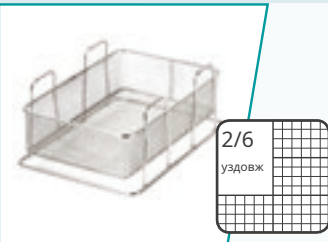


Корзина Flex 2

Для рівних інструментів, наприклад, ножиць, пінцетів, дзеркал, елеваторів
Можна складати в стійку з корзинами Flex 1, 2, 3 і 6
Внутрішні розміри (ШхВхГ): 14,5 x 6 x 24 см

№ замовлення
ME80020

8 880 грн

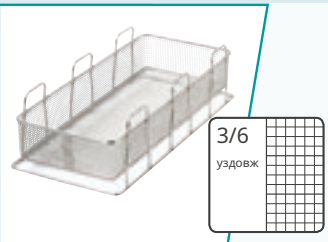


Корзина Flex 3

Для рівних інструментів, наприклад, ножиць, пінцетів, елеваторів
Можна складати в стійку з корзинами Flex 1, 2, 3 і 6
Внутрішні розміри (ШхВхГ): 14,5 x 6 x 37,5 см

№ замовлення
ME80030

10 330 грн

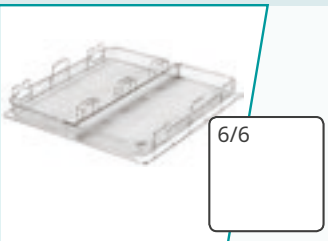


Корзина Flex 6

Для довгих рівних інструментів довжиною до 40 см, наприклад, ножиць, пінцетів, дзеркал
Використовується в якості основи під корзини Flex 1, 2, 3 і корзину Flex specula
Внутрішні розміри (ШхВхГ): 34 x 3 x 38 см

№ замовлення
ME80255

14 270 грн

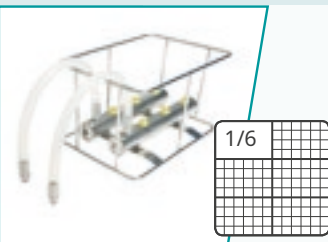


Корзина інжектора Flex 1

До 6 адаптерів (MELAtherm®: лише адаптери для наконечників, MELAtherm® Evolution: усі адаптери)
Потрібен або базовий кошик з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME84610 або ME80440), або два додаткові одинарні корпуси фільтра (№ ME73905) у поєднанні з базовою корзиною інжекторною рейкою (№ ME00197)
У комплект поставки входять необхідні шланги та шлангові з'єднання

№ замовлення
ME80740

15 230 грн

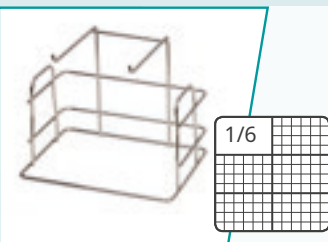


Тримач для відбиткових ложок, ножиць і затискачів

До 8 відбиткових ложок, а також ножиць і затискачів
Ножиці та затискачі необхідно відкрити та повісити на кільця (вічка)
Можна складати в стійку з корзинами Flex 1, 2, 3 і 6

№ замовлення
ME80110

7 750 грн

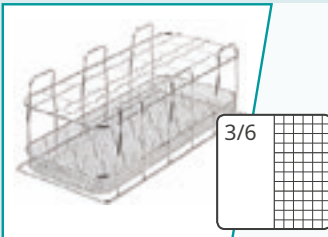


Корзина Flex specula

Для гінекологічних дзеркал: вміщує до 8 комплектів дзеркал Kristell / 16 дзеркал Cusco / Semm

Можна вкласти у корзину Flex 6

№ замовлення
ME80410

11 000 грн

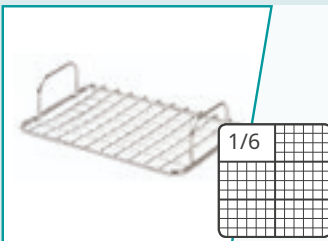


Верхня рамка Flex 1 для вушних дзеркал, розмір сітки 14 мм

До 50 вушних дзеркал
Для вставки у корзини Flex 1, 2 і 3. Також можна використовувати як кришку
Корзини можуть бути частково заповнені цими рамками або повністю (наприклад, 3 верхні рамки на корзині Flex 3)

№ замовлення
ME80070

3 590 грн

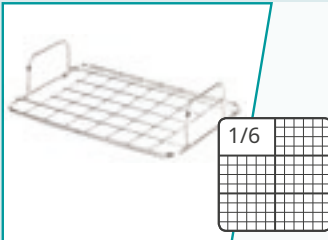


Верхня рамка для вушних дзеркал Flex 1, розмір сітки 20 мм

До 24 вушних дзеркал
Для вставки у корзини Flex 1, 2 і 3. Також можна використовувати як кришку
Корзини можуть бути частково заповнені цими рамками або повністю (наприклад, 2 верхні рамки на корзині Flex 2)

№ замовлення
ME80080

3 590 грн

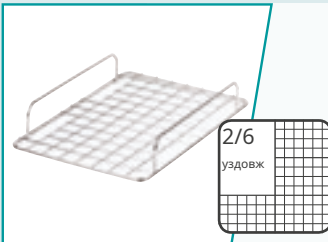


Верхня рамка для вушних дзеркал Flex 2, розмір сітки 20 мм

До 60 вушних дзеркал
Для вставки у корзини Flex 1, 2 і 3. Також можна використовувати як кришку
Корзини можуть бути частково заповнені цими рамками або повністю (наприклад, 1 верхня рама на 2 корзини Flex 1)

№ замовлення
ME80090

4 580 грн

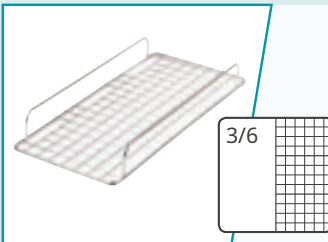


Верхня рамка для вушних дзеркал Flex 3, розмір сітки 20 мм

До 96 вушних дзеркал
Для вставки у корзини Flex 1, 2 і 3. Також можна використовувати як кришку
Корзини можуть бути частково заповнені цими рамками або повністю (наприклад, 1 верхня рама на корзині Flex 3)

№ замовлення
ME80100

5 740 грн

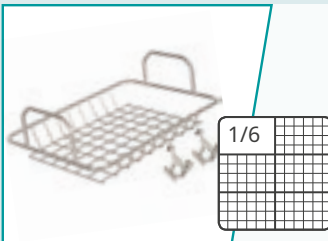

Верхня рамка для носових дзеркал Flex 1 (включаючи 2 фіксуючі затискачі)

Для самофіксуєючих інструментів, наприклад, дзеркал носа
Можна використовувати з корзинами Flex 1, 2 і 3

№ замовлення
ME80435

5 820 грн



Фіксатор для верхньої рами

Входить в комплект верхньої рамки для носових дзеркал (№ замовлення ME80435)
Також можна використовувати для всіх верхніх рамок для вушних дзеркал
Для кріплення однієї верхньої рамки потрібно два фіксатори

№ замовлення
ME80420

880 грн



Тримач інструментів для корзин Flex (60 шт.)

Для безпечної фіксації інструментів у корзині

№ замовлення
ME80395

4 970 грн

	Універсальний адаптер (включаючи 3 вставки та фільтрувальний диск) Для обробки трансферів, скалерів, піскоструминних апаратів тощо. У комплекті 3 силіконові вставки: зелена (ø 16 мм), синя (ø 20 мм) і біла (ø 22 мм) Можна прикрутити до інжекторної рейки базової корзини Фільтрувальний диск, що входить до комплекту постачання, потрібен лише для інжекторної рейки без центрального фільтра	№ замовлення ME73904 6 840 грн
	Тримач інструментів для універсального адаптера Для додаткової фіксації інструментів в універсальному адаптері У комплекті тримаюче кільце і 3 силіконові ремінці	№ замовлення ME22968 1060 грн новий
	Потрійний розподільувач (включаючи керамічний фільтрувальний диск) Для трьох інжекторних форсунок, адаптерів Luer/Luer-Lock або з'єднувачів для шлангів Фільтруючий диск, що входить до комплекту, потрібен лише для інжекторної рейки без центрального фільтра	№ замовлення ME73903 6 840 грн
	Потрійний розподільувач (без фільтрувального диска) Для трьох інжекторних форсунок із пружиною для затискання, адаптерами Luer/Luer-Lock або шланговими з'єднаннями Для обробки інструментів з порожнистим корпусом, використовується з інжекторною рейкою з центральним фільтром	№ замовлення ME22611 5 360 грн
	Корпус фільтрувального диска (включаючи керамічний фільтрувальний диск) Перехідники для порожнистих інструментів можна вкрутити в корпус диска, якщо інструменти потрібно промити фільтрованою водою Використовуйте два окремих корпуси фільтра, щоб підключити корзину інжектора Flex 1 (ME80740) до інжекторної рейки без центрального фільтра Фільтрувальний диск, що входить до комплекту, потрібен лише для інжекторної рейки без центрального фільтра	№ замовлення ME73905 5 360 грн
	Розпірна трубка Для максимального використання інжекторної рейки з універсальними адаптерами, потрійними і подвійними розподільувачами та корпусами фільтрувальних дисків При використанні більш ніж 6 універсальних адаптерів, розподільників або корпусів фільтрувальних дисків потрібна дистанційна трубка для кожного додаткового адаптера на інжекторній рейці	№ замовлення ME55120 880 грн
	Керамічний фільтрувальний диск (10 шт.) Для використання з універсальним адаптером, потрійним розподільувачем або з корпусом дискового фільтра Можна використовувати в MELAtherm® макс. 20 циклів	№ замовлення ME64375 3 750 грн
	Металевий фільтрувальний диск Для використання з універсальним адаптером, потрійним розподільником або з корпусом фільтрувального диска Після 20 циклів у MELAtherm®, диск необхідно очистити в ультразвуковій ванні Диск можна очищати до 20 разів в ультразвуковій ванні Металевий фільтрувальний диск не схвалений для офтальмології	№ замовлення ME80350 2 750 грн
	Трубка для полоскання вкл. подовжувач Для порожнистих інструментів із діаметром від 2 до 11 мм і нестандартним з'єднанням Якщо трубка для полоскання вкручена в інжекторну рейку, можна очищати інструменти довжиною до 22 см. У комплекті є подовжувач трубки для промивання та 5 силіконових вставок різного діаметру	№ замовлення ME80260 6 840 грн

	Адаптер для ISO-з'єднання (INTRA) Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)	№ замовлення ME80610 2 780 грн
	Адаптер для Sirona T1 Classic Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)	№ замовлення ME80620 3 950 грн
	Адаптер для кутових наконечників KaVo / BienAir Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)	№ замовлення ME80630 2 780 грн
	Адаптер для турбін W&H-з'єднання (Roto Quick) Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)	№ замовлення ME80640 3 950 грн
	Адаптер для турбін Sirona-з'єднання Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)	№ замовлення ME80650 2 780 грн
	Адаптер для турбін KaVo-з'єднання (MULTiflex) Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)	№ замовлення ME80660 2 780 грн
	Адаптер для турбін NSK-з'єднання (Phatelus) Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)	№ замовлення ME80612 5 250 грн новий
	Адаптер для зовнішніх каналів розпилення Для обробки, наприклад, хірургічних турбін із зовнішніми розпилювальними каналами Для внутрішнього очищення та дезінфекції потрібен універсальний адаптер або додатковий адаптер для наконечників Адаптер вкручується безпосередньо в інжекторну рейку із центральним фільтром (№ замовлення ME84610 або ME80440) або в корпус фільтрувального диска (№ замовлення ME73905)	№ замовлення ME74135 2 190 грн
	Форсунка інжектора Для порожнистих інструментів, наприклад хірургічних аспіраційних канюль Може вкручуватися в інжекторну рейку, подвійний розподільник або потрійний розподільник Зовнішній діаметр: 4 мм Додаткова пружина для затискання (№ для замовлення ME00196)	№ замовлення ME73860 1 020 грн

Найбезпечніше знезараження наконечників зубного ультразвукового скейлера

Дезінфекція інструментів з порожнистим корпусом, що відповідає стандартам, стає все більш важливою. Корзина інжектора Flex 1 — це найбезпечніше рішення для автоматичної обробки наконечників ультразвукового скалера. Корзина дозволяє прикріпити 6 наконечників за допомогою динамометричного ключа та вимагає лише двох з’єднань на інжекторній рейці. Використовуйте три корзини інжектора Flex 1 для дезінфекції до 18 наконечників за цикл.



Адаптер для наконечників M3,0 x 0,5 мм, зовнішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення ME80750

2 080 грн

Наприклад для KaVo SONOsoft, Piezo LUX; EMS Piezon / Piezon LED; W&H Piezo Scaler; Tigon, Tigon+, Pyon 2 surgery, Piezomed; Komets PiezoLine EM1, KA1, KA2; NSK Varios EMS; Mectron Multipiezo

Адаптер для наконечників M3,0 x 0,35 мм, зовнішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення ME80752

2 080 грн

наприклад для KaVoPiezoLED, PiezoSoft

Адаптер для наконечників M3,0 x 0,6 мм, зовнішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення ME80756

2 080 грн

Наприклад для Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; Ultradent Newtron; Hu-Friedy Piezo S-Serie; NSK Varios

Адаптер для наконечників M3,5 x 0,35 мм, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення ME80755

2 080 грн

Наприклад для Planmeca LM-ProPowe

Адаптер для наконечників M3,5 x 0,6 мм, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення ME80760

2 080 грн

Наприклад для Sirona SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; Komets PiezoLine SI1; Dürr Vector Scaler; Morita Softy / Softy LED

Адаптер для наконечників M3,6 x RH1,5 P0,5, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення ME80751

2 080 грн

Наприклад для KaVo SONICflex quick 2008

Адаптер для наконечників M3,0 x 0,5 мм, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення ME80790

2 080 грн

Наприклад для KaVo SONICflex 2000, 2003; Sirona SIROAIR L; W&H Luftscaler, Proxeo, Synea, Alegria; Komets SonicLine SF1LM; NSK Luftscaler Ti-Max S970, AS2000; EMS Piezon (LED)

Адаптер для наконечників ультразвукового скалера M3,0 x 0,35 мм, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення ME80753

2 080 грн

Наприклад, для ультразвукового скалера KaVo PiezoLED, PIEZOsof

Адаптер для наконечників ультразвукового скалера M3,0 x 0,6 мм, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення ME80757

2 080 грн

Наприклад, для ультразвукового скалера Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson, NSK Varios

Адаптер для наконечників ультразвукового скалера M3,5 x 0,6 мм, зовнішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення ME80771

2 080 грн

Наприклад, для SSirona Siroson, Sirosonic, PerioSonic

Адаптер для EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення ME80614

5 960 грн

Наприклад, для EMS EL-308 (Prophylaxis Master)

НОВИЙ

Адаптер для EMS AIR-FLOW Handy 3.0



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення ME80613

5 960 грн

Наприклад, для EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS)

НОВИЙ

Маркувальні диски для адаптерів



Кольорове маркування адаптерів дозволяє уникнути встановлення інструментів на невідповідні адаптери, тим самим запобігаючи пошкодженню різьби

№ замовлення ME80769

1 160 грн

Набір складається з 6 зелених, 6 синіх і 6 жовтих маркувальних дисків

Гвинтова пробка для інжекторної рейки та розподільвача



Для ущільнення непотрібних отворів в інжекторній рейці, у подвійному або потрійному розподільвачах

№ замовлення ME80140

780 грн



Адаптер (штекер) для Luer

- Для обробки інструментів / порожнистих голок з Luer з'єднанням (гніздо)
- Можна прикріпити до інжекторної рейки, потрійного чи подвійного розподілювача або корпусу фільтрувального диску

№ замовлення
ME73880

1 730 грн



Адаптер (штекер) для Luer-Lock

- Для обробки інструментів / порожнистих голок із Luer-Lock з'єднанням (гніздо)
- Можна прикріпити до інжекторної рейки, потрійного чи подвійного розподілювача або корпусу фільтрувального диску

№ замовлення
ME74130

2 080 грн



Ущільнювач (гніздо) для Luer / Luer-Lock

- Для ущільнення адаптерів Luer (№ замовлення ME73880) або Luer-Lock (№ замовлення ME74130)

№ замовлення
ME80180

1 730 грн



Адаптер (гніздо) для Luer / Luer-Lock

- Для обробки інструментів/порожнистих голок із з'єднанням Luer (штекер) або Luer-Lock (штекер)
- Можна прикріпити до інжекторної рейки, потрійного чи подвійного розподілювача або корпусу фільтрувального диску

№ замовлення
ME67250

2 080 грн



Ущільнювач (штекер) для Luer-Lock

- Для герметизації адаптерів Luer-Lock (№ замовлення ME67250)

№ замовлення
ME80170

1 730 грн



З'єднання шланга із зовнішньою різьбою

- Для шлангів із внутрішнім діаметром 6 мм, наприклад силіконового шланга (№ замовлення ME80190)
- Можна прикріпити до інжекторної рейки, потрійного чи подвійного розподілювача або корпусу фільтрувального диску

№ замовлення
ME80150

1 730 грн



З'єднання шланга з внутрішньою різьбою

- Для шлангів із внутрішнім діаметром 6 мм, наприклад силіконового шланга (№ замовлення ME80190)
- Можна поєднувати з адаптерами для Luer / Luer-Lock, потрійного або подвійного розподілювача

№ замовлення
ME80160

1 730 грн



Подовжувач шланга з підключеннями

- Для підключення мийних систем або перенесення кріплення інструментів на корзини flex
- Довжина шланга 0,5 м із з'єднаннями з внутрішньою або зовнішньою різьбою
- Можна поєднувати з адаптерами для Luer / Luer-Lock, потрійного або подвійного розподілювача

№ замовлення
ME80195

2 400 грн



Силіконовий шланг 10/6 мм

- Дуже гнучкий силіконовий шланг без перегинів для підключення інструментів
- Інструменти також можуть бути вставлені в шланг
- Довжина шланга 2м

№ замовлення
ME80190

1 990 грн

Відеоуроки для MELAtherm®:



Підготовка інструментів:

Дізнайтеся більше про оптимізацію якості результатів і збереження інструментів шляхом належної підготовки їх до автоматизованого очищення та дезінфекції.

Відскануйте QR-код і перегляньте підручник.



Функціонування MELAtherm®:

Ознайомтеся з інтуїтивно зрозумілою концепцією керування для безпечного використання та вибору програм на MELAtherm®

Відскануйте QR-код і перегляньте підручник.



Регулярні перевірки:

Підтримуйте значення MELAtherm® з регулярними перевітками в повсякденному робочому житті.

Відскануйте QR-код і перегляньте підручник.



Обмін технологічних засобів:

MEtherm забезпечує оптимальні результати повторної обробки. Дізнайтеся, як замінити технологічні агенти, коли це необхідно.

Відскануйте QR-код і перегляньте підручник.

