



LABOMED®
ideas for vision

PRIMA
lite

**СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
МІКРОСКОП**

ВАШЕ БАЧЕННЯ, НАШІ ІННОВАЦІЇ, КРАЩА СТОМАТОЛОГІЯ



Ласкаво просимо до вершини стоматологічної точності з мікроскопом Labomed PRIMA lite. Відкрийте для себе світ опцій, що забезпечують оптичну точність і механічну досконалість за допомогою стоматологічних рішень Labomed. Завдяки винятковій оптичній роздільній здатності і чіткості, холодному і наближеному до денного світла освітленню, і рідинній механіці, PRIMA lite є поєднанням гармонії продуктивності.

Завдяки оптичній технології Labomed MaxLite Ви можете бачити анатомію зубів з максимальною точністю та достовірністю. Оптичний блок з вбудованим світлодіодним джерелом освітлення забезпечує компактний і витончений дизайн. PRIMA lite з легкістю маневрує навіть у клінічних умовах з обмеженим простором, займаючи одну з найменших і найлегших площ в індустрії в різних форматах кріплення.



ЯСКРАВИШИЙ, ЧИСТІШИЙ, РОЗУМНІШИЙ: ВАШ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МІКРОСКОП


Відчуйте оптичну перевагу та механічну універсальність стоматологічного мікроскопа Labomed PRIMA lite. Ця компактна, але багатофункціональна система може похизуватися винятковою продуктивністю завдяки апохроматичній оптичній конструкції і оптичним покриттям Labomed MaxLite, які в поєднанні забезпечують неперевершену чіткість зображення і однорідність поля в стоматологічних процедурах.

Автоматичний балансуєчий важіль забезпечує точну стабільність при встановленні камер та аксесуарів, гарантуючи бездоганну фотодокументацію та роботу без зсувів і вібрацій. Завдяки сучасному та оптимізованому дизайну, PRIMA lite покращує естетику будь-якої практики.



Чудова оптика

Відчуйте неперевершену візуальну чіткість і комфорт для очей із стоматологічним мікроскопом Labomed PRIMA lite. Його апохроматична оптична конструкція в поєднанні з високоякісним покриттям забезпечує довговічну, стійку до подряпин оптику з мінімальним рівнем відблисків. Плавно регульований перемикач збільшення пропонує безліч параметрів, які легко налаштовуються за допомогою звичайних оптичних аксесуарів. Крім того, завдяки найкращому у світі склу, PRIMA lite забезпечує більше світла там, де воно найбільше потрібне - вашим очам.

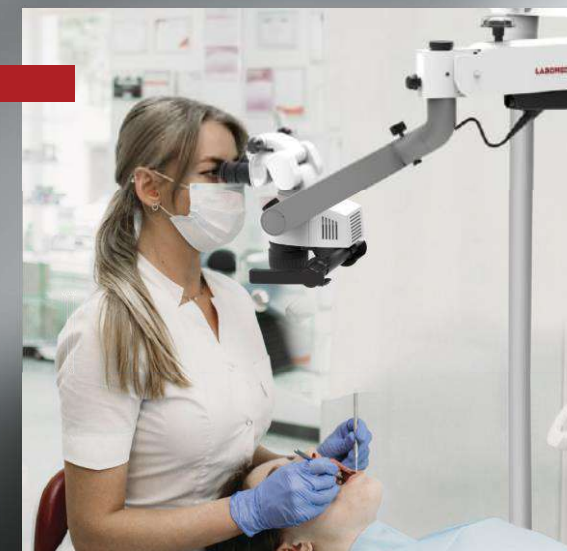

Ергономіка

Стоматологи очікують від мікроскопа максимальної ергономічності - PRIMA lite відповідає цим вимогам. Починаючи з гнучкої системи важелів, яка розроблена з регулюванням сили тяги відповідно до уподобань користувача і містить підвісний важіль, який регулюється по вертикалі без зміщення. Тримач мікроскопа має передові технології врівноваження, які дозволяють мікроскопу плавно переміщатися, незалежно від того, які аксесуари встановлені на ньому.




Яскраве освітлення

Яскраве та рівномірне освітлення забезпечується завдяки вбудованій системі світлодіодного освітлення потужністю 27 Вт. Особливу увагу було приділено конструкції оптичного з'єднання, щоб мінімізувати внутрішні втрати світла. Висококаліберне скло разом з високими стандартами дизайну дозволяють світильнику PRIMA lite забезпечувати найвищу ефективність - 100 000 люкс при дуже низькому енергоспоживанні з терміном служби діодів 50 000 годин.





Labomed PRIMA lite має сучасний дизайн, який ідеально підходить для тих користувачів, яким потрібен універсальний мікроскоп, здатний адаптуватися до обмежень кабінету, а також до майбутніх розширень. Завдяки модульному кріпленню та аксесуарам для тримачів, PRIMA lite витончено підкреслить практично будь-яке середовище. Системи також можна переміщувати з одного кріплення на інше за допомогою комплектів адаптерів.

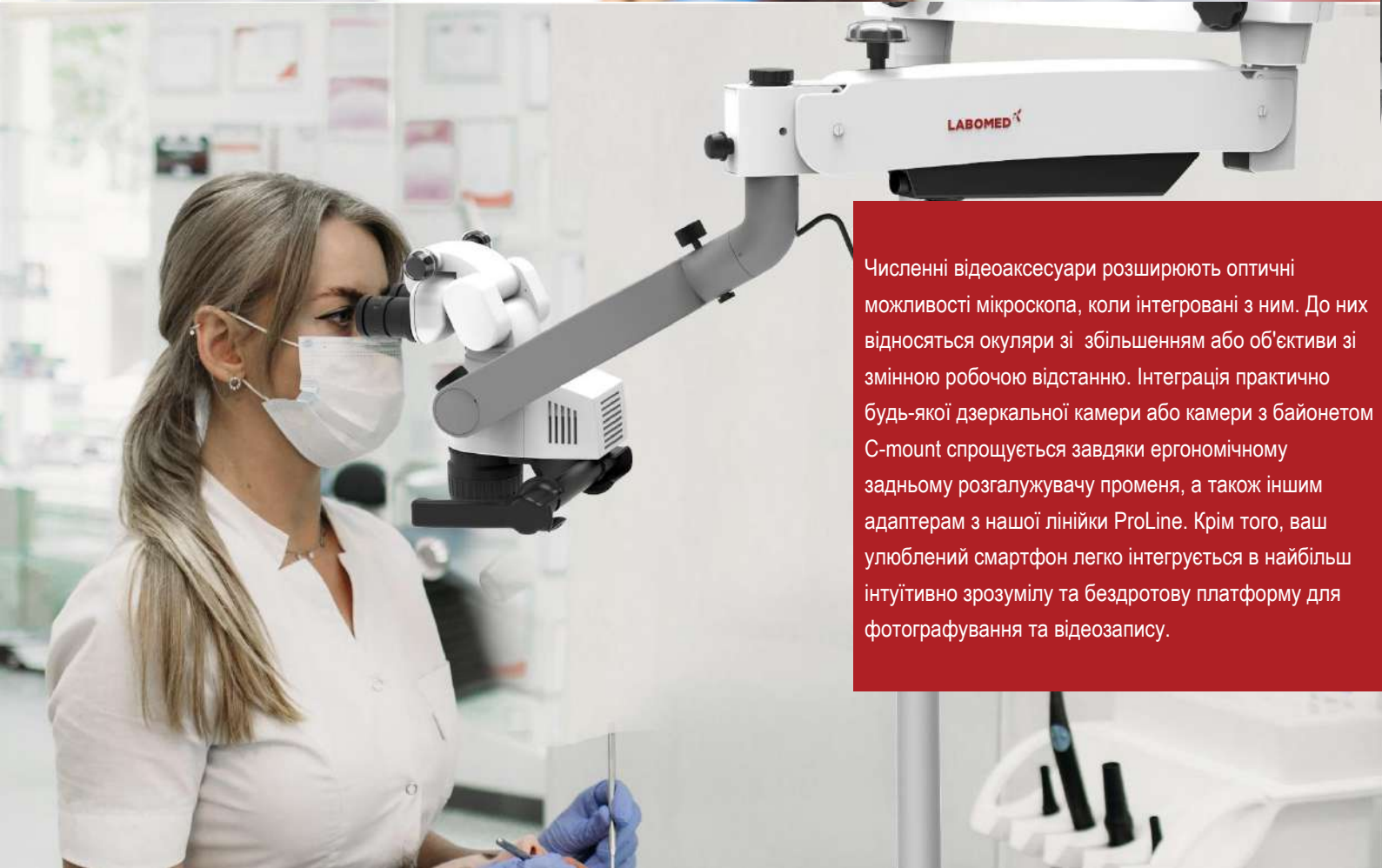


Численні відеоаксесуари розширюють оптичні можливості мікроскопа, коли інтегровані з ним. До них відносяться окуляри зі збільшенням або об'єктиви зі змінною робочою відстанню. Інтеграція практично будь-якої дзеркальної камери або камери з байонетом C-mount спрощується завдяки ергономічному задньому розгалужувачу променя, а також іншим адаптерам з нашої лінійки ProLine. Крім того, ваш улюблений смартфон легко інтегрується в найбільш інтуїтивно зрозумілу та бездротову платформу для фотографування та відеозапису.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Оглядові тубуси	0-210° поворотний бінокулярний тубус
IPD	49-78 мм
Окуляри	Стандартний: WF 10X/18 мм з захистами для очей і блокуванням діоптрій. Опція: WF 12.5X/18 мм з захистами для очей і блокуванням діоптрій
Корекція діоптрій	± 7
Магнічейнджер	Апохроматичний 5 кроків: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x і 2,5x покриття MaxLite
Об'єктив	Стандартний: f= 250 мм з можливістю фокусування Опція: f=300 мм фокусується і f= 400 мм з можливістю фокусування <i>NuVar™</i> 7: f =290-360 мм WD: 200-270 мм з можливістю фокусування <i>NuVar™</i> 10: f =300-400 мм WD: 220-320 мм з можливістю фокусування
FOV (поле огляду)	10.6-66.2 мм
Підстроювання фокусування	Ручне, регулювання обертовим кільцем
Джерело світла	Світлодіод 27 Вт , 100-240 В
Lux	100 K
Максимальна потужність	60 Вт
Вбудовані фільтри	Зелений і жовтий
Носій для мікроскопа	Носій 120°
Додаткові аксесуари	Подвійний розсіювач променя нахилений, поворотна пластина, подовжувач, подвійна діафрагма, одиночний розгалужувач, діапазон ProLine адаптерів камери та адаптерів для смартфонів




МОНТАЖ НА ПІДЛОЗІ

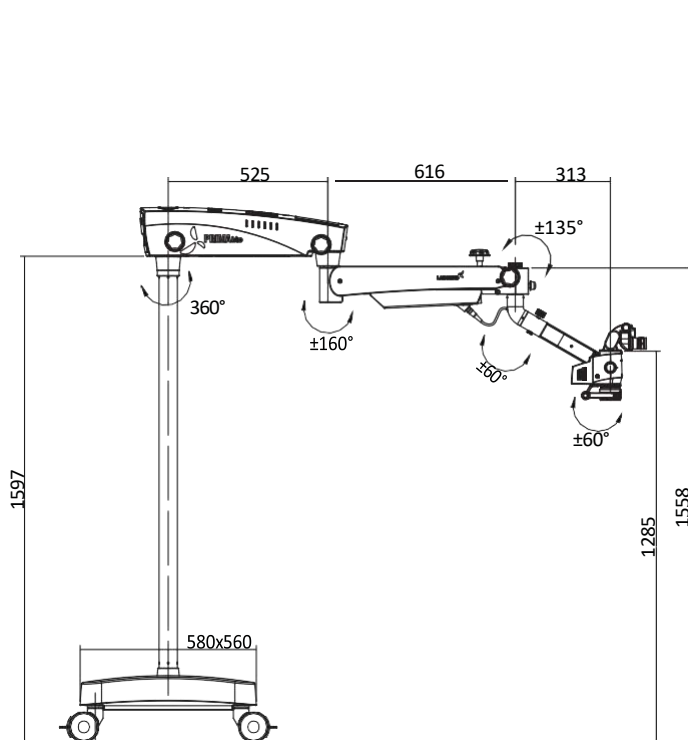

МОНТАЖ НА СТЕЛІ

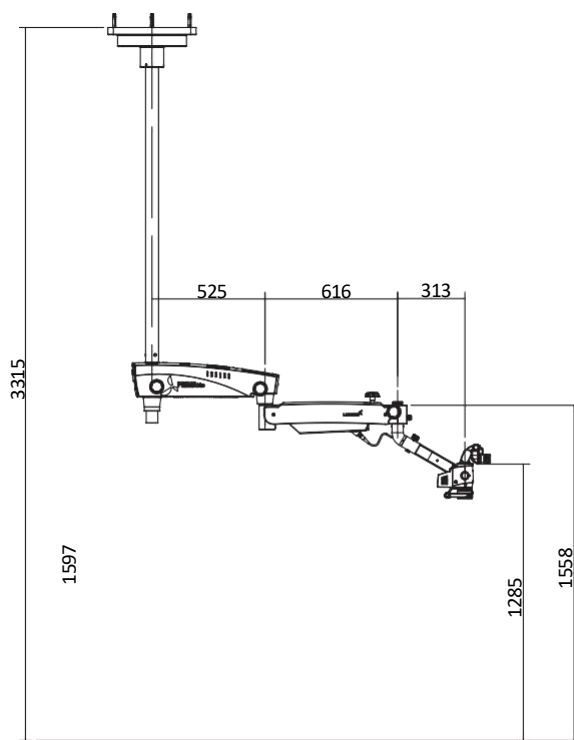

МОНТАЖ НА СТІНІ

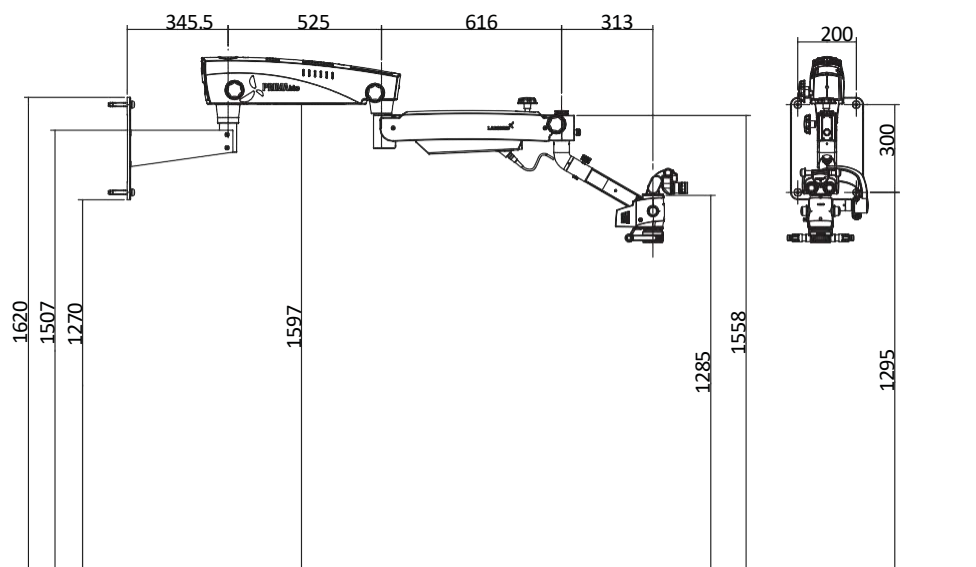

НАЗВА

PRIMA lite
PRIMA lite
PRIMA lite

КОНФІГУРАЦІЯ

Монтаж на підлозі
Монтаж на стіні
Монтаж на стелі

КАТАЛОЖНИЙ №

6181501
6181502
6181503

GALIT
EXPERTS IN DENTISTRY

вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці,
Тернопільський р-н, 47711, Україна
0 800 502 998
office@galit.te.ua, service@galit.te.ua

www.galit-dental.com



DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10009565



LABOMED

Labomed Europe b.v.
Essebaan 50
2908 LK, Capelle aan den IJssel Netherlands
Tel: +31 (0)10 45 842 22
E-mail: sales@labomedeurop.com

www.labomedeurop.com