



LABOMED
ideas for vision

PRIMA
pro

**СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
МІКРОСКОП**

ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ВИСОКОТОЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ



Ласкаво просимо в майбутнє високоточної стоматології! Відкрийте для себе неперевершену чіткість і точність з нашим ультрасучасним стоматологічним мікроскопом PRIMA pro. Цей надсучасний прилад, створений для революції у вашій практиці, пропонує неперевершену чіткість збільшення та освітлення, що дозволяє вам виконувати складні процедури з упевненістю та точністю.

Незалежно від того, чи займаєтеся ви ендодонтією, реставраційною стоматологією або щелепно-лицевою хірургією, наш стоматологічний мікроскоп PRIMA pro розширить ваші клінічні можливості. Отримайте більш чітке уявлення про здоров'я порожнини рота і відкрийте для себе нові рівні досконалості в стоматологічних процедурах. Приєднуйтеся до нас у формуванні майбутньої стоматології за допомогою нашої інноваційної технології.

БАЧИТИ БІЛЬШЕ, РОБИТИ БІЛЬШЕ - ЛІКУВАТИ З ЯСНІСТЮ

Завдяки вдосконаленій оптиці з покриттям MaxLite та апохроматичною корекцією ви зможете насолоджуватися чіткістю та деталізацією зображення з найвищою точністю, забезпечуючи ретельне, невимушене обстеження та планування лікування. PRIMA pro переосмислює стандарти досконалості і може похизуватися безліччю функцій, орієнтованих на користувача.

Наш кронштейн автоматичного балансування (ABA) надає унікальну можливість позиціонування мікроскопа завдяки вбудованій електромагнітній системі зчеплення, яка ковзає при натисканні кнопки. Завдяки зручно розташованим елементам керування, PRIMA pro зберігає стабільність незалежно від того, які аксесуари або камери додаються. Ця спрощена конструкція підвищує ефективність робочого процесу і забезпечує стабільну і надійну роботу.

Чудова оптика

Ми використовуємо високоякісне, надзвичайно чисте скло, яке обробляється на передових технологічних системах під керівництвом команди з міжнародним досвідом, щоб кожного разу забезпечувати чітке зображення.



Ергономічний дизайн

Наш ергономічний дизайн надає перевагу вашому комфорту, забезпечуючи використання без втоми та мінімізуючи навантаження під час делікатних процедур. Завдяки ергономічно розташованим елементам керування, компонентам і плавній артикуляції плеча й оптичного тримача PRIMA pro забезпечує роботу без втоми день за днем у вашій стоматологічній клініці.




Справжнє світло

Насолоджуйтесь яскравим, однорідним освітленням у PRIMA pro завдяки ефективній світлодіодній системі потужністю 50 Вт, яка забезпечує 200 000 люкс яскравого світла без відблисків. Завдяки номінальному терміну служби світлодіодів 50 000 годин, оптична конструкція PRIMA pro забезпечує безтіньове освітлення з температурою світла, близькою до природного денного світла.





PRIMA pro пропонує гнучкі варіанти монтажу. Завдяки різноманітним конфігураціям від підлогових підставок до кріплень на стелі та багатофункціональної колони Axius забезпечує бездоганну інтеграцію в будь-який робочий простір.

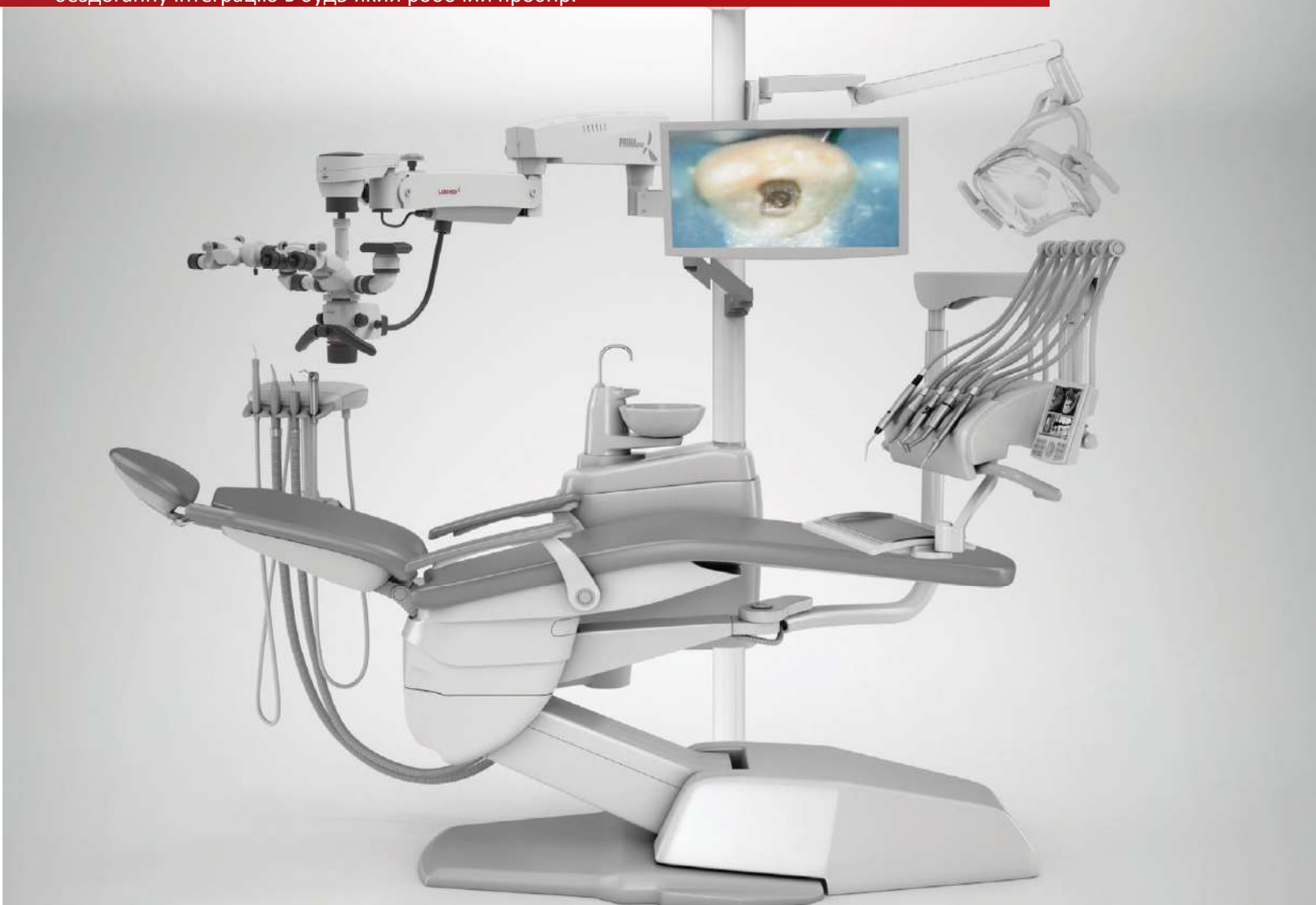

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оглядові тубуси	0-210° поворотний бінокулярний тубус
IPD	49-78 мм
Окуляри	Стандартний: WF 10X/18 мм з захистами для очей і блокуванням діоптрій Опція: WF 12.5X/18 мм з захистами для очей і блокуванням діоптрій
Корекція діоптрій	± 7
Магнічейнджер	Апохроматичний 6 кроків: 0.3x, 0.5x, 0.8x 1.3x, 2.0x і 3.0x з покриттям MaxLite
Об'єктив	Стандартний: <i>NuVar™</i> 10: f =300-400 мм, WD: 220-320 мм Опції: f =200 мм з фокусуванням; f= 250 мм з фокусуванням; f =300 мм з фокусуванням і f= 400 мм з фокусуванням <i>NuVar™</i> 20: f= 295-495 мм, WD: 200-400 мм
FOV (поле огляду)	128.3-10.6 мм
Джерело світла	Світлодіод 50 Вт, 100-240В
LUX	200 К при 200 мм СМО
Максимальна потужність	200 Вт
Вбудовані фільтри	Зелений, жовтий і TrueLux Halo
Носій для мікроскопа	360° ABA
Стандартний аксесуар	Подвійний розщеплювач променя, нахилений
Опційні аксесуари	Подвійна діафрагма, ротопластина, однопроменевий розщеплювач, кріплення бінокуляра асистента, асортимент ProLine адаптерів для камер і адаптерів для смартфонів





Аксесуари ProLine розширюють можливості PRIMA Pro з 1 до 1000-го дня роботи. Набір аксесуарів ProLine включає об'єктив зі змінною фокусною відстанню Nuvar, діафрагму з подвійною ірисовою діафрагмою та адаптери для камер, які значно покращують модульність Prima Pro:

- СМО Nuvar забезпечує регульоване збільшення в діапазоні від f 200 мм до f 450 мм, покращене оптичним покриттям MaxLite. Ця функція полегшує роботу в багатокористувацькому середовищі, зменшуючи потребу в частому переміщенні мікроскопа під час процедур.
- Подвійна ірисова діафрагма покращує контрастність і глибину фокусування для чіткого фотодокументування стоматологічних процедур.
- Адаптери для фотоапаратів і смартфонів спрощують інтеграцію цифрового робочого процесу, дозволяючи отримувати високоякісні зображення і відео для записів пацієнтів, презентацій і досліджень.



Ці аксесуари не тільки підвищують точність лікування, але й спрощують робочий процес, підтримуючи високі стандарти лікування та документування.

МОНТАЖ НА СТЕЛІ

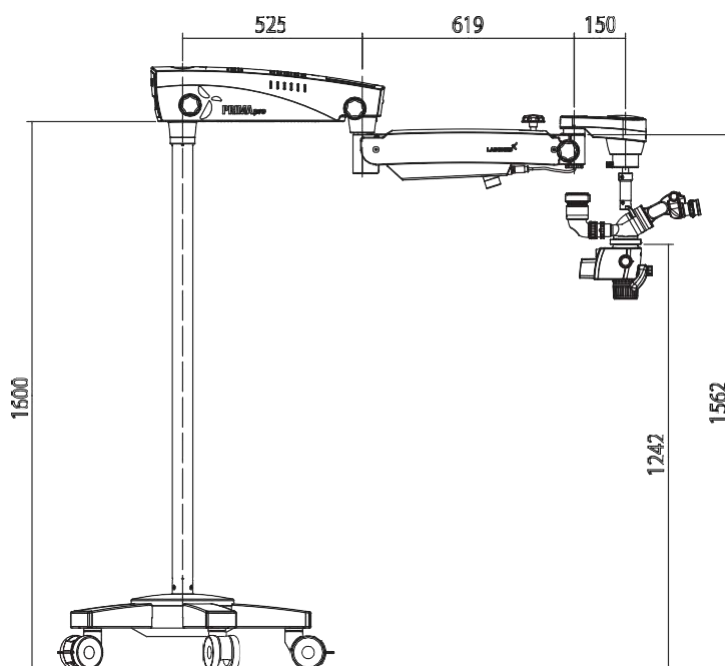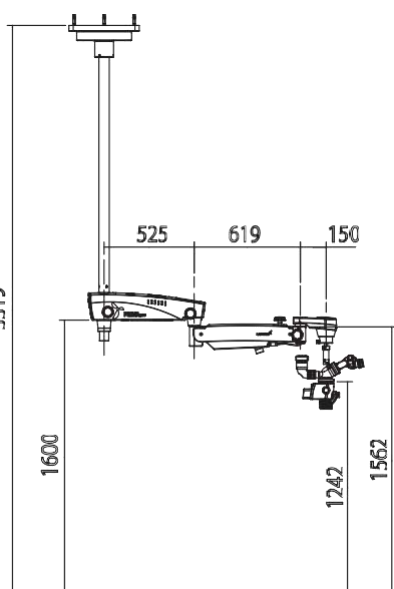

МОНТАЖ НА ПІДЛОЗІ

МОНТАЖ НА СТІНІ

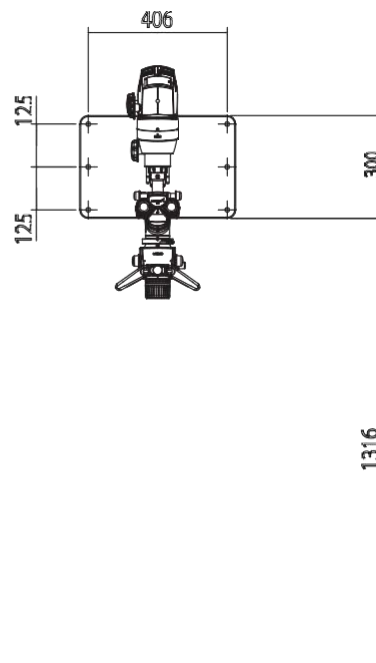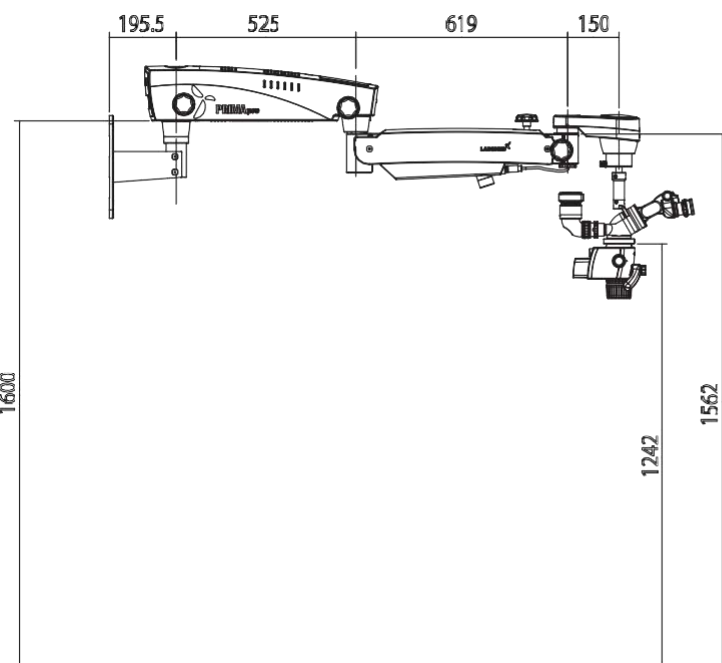

НАЗВА

PRIMA pro
PRIMA pro
PRIMA pro

КОНФІГУРАЦІЯ

Монтаж на підлозі
Монтаж на стіні
Монтаж на стелі

КАТАЛОЖНИЙ №

6183601
6183602
6183603

GALIT
EXPERTS IN DENTISTRY

вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці,
Тернопільський р-н, 47711, Україна
0 800 502 998
office@galit.te.ua, service@galit.te.ua

www.galit-dental.com



DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565



LABOMED

Labomed Europe b.v.
Essebaan 50
2908 LK, Capelle aan den IJssel Netherlands
Tel: +31 (0)10 45 842 22
E-mail: sales@labomedeurop.com

www.labomedeurop.com