

ONE

РІШЕННЯ ДЛЯ ПОНАД 15
РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ



на базі

**Німецької
Інженерії**

rapidshape

ONE



Артикул: A.RS.ONE_RS2

Розширте можливості делегування

- Жодних здогадок завдяки інтелектуальній взаємодії між програмним забезпеченням, 3D-принтером, системами WASH та CURE
- Компактні розміри, розроблені для стоматологічних кабінетів
- Просте та чисте використання завдяки інтуїтивно зрозумілим інструментам для зняття готових конструкцій

Оперативна підтримка

Річний план CARE Plus включений у вартість при купівлі 3D - принтера ONE

Послуга включає:


- 90-денний супровід з фахівцем з цифрових робочих процесів Rapid Shape
- Постійну підтримку та доступ до посібників з робочих процесів і інструментів усунення несправностей
- Щорічну відправку датчика на перевірку
- Негайний ремонт або заміну пристрою, якщо це необхідно

Лікування в день звернення

- Прецизійний DLP 3D-принтер із точністю +/-34 мкм та джерелом світла з довжиною хвилі 385 нм
- Доступні 2 варіанти розміру друку: стандартна платформа для друку декількох повних дуг та комплект для швидкого друку 3 окремих коронок або однієї шини

Швидкісний друк за допомогою набору Rapid Print Kit

Мінімізує витрату смоли та забезпечує друк у рекордні терміни

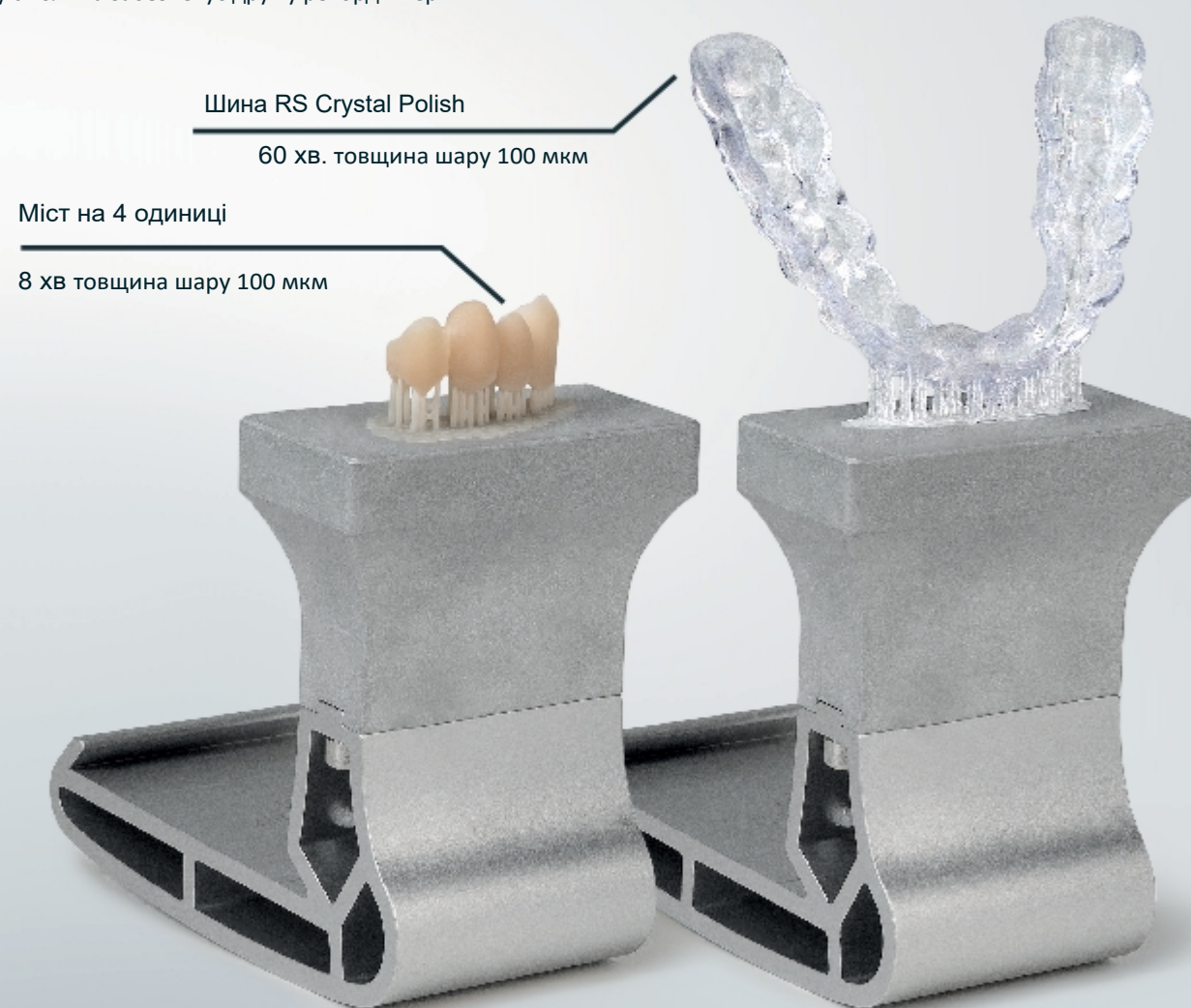

ВІДСКАНУЙТЕ, ЩОБ
ПЕРЕГЛЯНУТИ
ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВІДСКАНУЙТЕ, ЩОБ
ПЕРЕГЛЯНУТИ
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ONE

Принтер ONE для понад 15 стоматологічних протоколів



Повна дуга на імплантатах
до 4 повних дуг на імплантатах

40 хвилин
Товщина шару 50 мкм



Шини
до 3 шин

35 хвилин
Товщина шару 100 мкм
Резервуар RS Crystal Polish



Робочі моделі
до 2 моделей

50 хвилин
Товщина шару 50 мкм

ONE

Комплект для швидкого друку



Комплект Rapid Print

Артикул: RS006170

- Невеликі резервуари для смоли з кришками, що не пропускають УФ-випромінювання, для зручного зберігання – 3 шт.
- Включає 1 невеликий резервуар RS Crystal Polish для друку поодиноких шин із високим рівнем блиску
- Мала робоча платформа та інструмент для зняття конструкцій входять до комплекту

Рішення для постобробки

Повністю оптимізована взаємодія між 3D-принтерами Rapid Shape, WASH та CURE, що виключає необхідність вгадувати та вручну вводити параметри від початку до кінця



Мийка WASH


Артикул: A.RS.PROWASH_RS2

- Максимальна місткість камери: 6 надрукованих повних дуг
- 2-етапний цикл промивання та механізм сушіння
- Зменшення запаху завдяки фільтрації з використанням активованого вугілля
- Перевірені та попередньо встановлені параметри промивання для понад 200 типів смол
- Можливість встановлення в стек із пристроєм CURE

Полімеризатор CURE

Артикул: A.RS.PROCURE_RS2

- Максимальна місткість камери: 6 надрукованих повних дуг
- Вбудована вакуумна система, що усуває необхідність у баках або генераторах азоту
- Досягнення максимальної якості 3D-друку завдяки 360° полімеризації в контрольованому вакуумному середовищі
- Вбудований вхід для азоту
- Можливість встановлення на модуль WASH для мінімізації займаної площі на столі

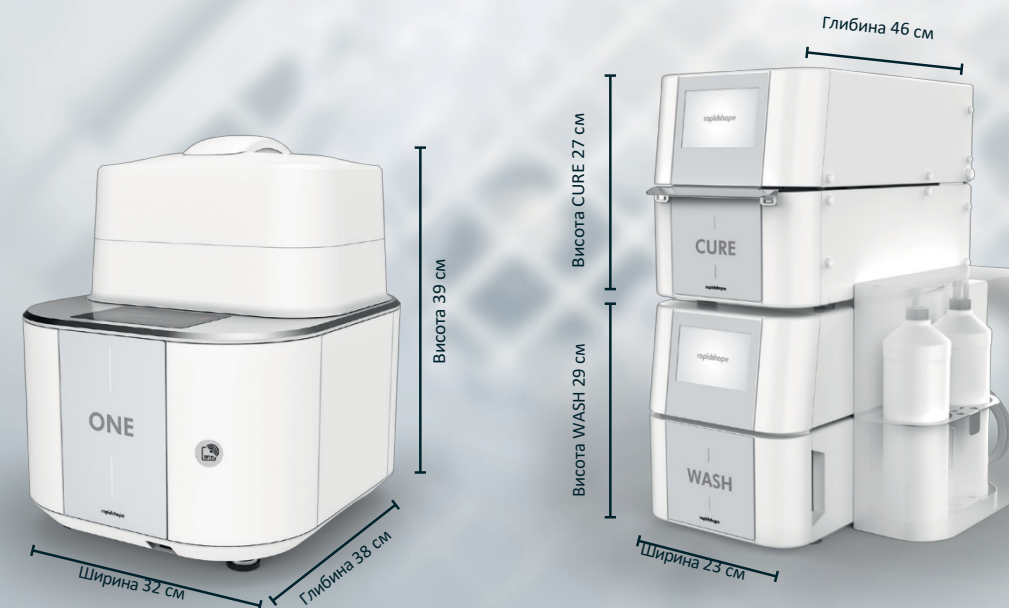

ВІДСКАНУЙТЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ПРИСТРОЮ WASH



ВІДСКАНУЙТЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ПРИСТРОЮ CURE



rs VIVO



RS VIVO Model

Модельна смола преміум-класу, що ідеально підходить для естетичних і високоточних стоматологічних моделей, включаючи штампи та моделі для імплантатів. Доступні кольори: Слонова кістка (Ivory) та Пісочний (Sand).

RS VIVO Model Natural Pink

Високоякісна смола для 3D - друку, розроблена для візуального відтворення природного вигляду м'яких тканин ротової порожнини. Ідеально підходить для підбору відтінку вінірів, коронок та інших протезів.

Доступний колір: Природній Рожевий



RS VIVO Gingiva

RS VIVO Gingiva — це гнучка високоточна смола, призначена для реалістичного відтворення ясенної тканини на стоматологічних моделях.

- Проста у використанні
- Міцна та стійка до розривів



RS VIVO Tray

RS VIVO Tray — це міцна смола для 3D-друку, розроблена спеціально для виготовлення індивідуальних відбиткових ложок. Завдяки своїй стійкості до ударів та стабільності, вона забезпечує надійну основу для точних відбитків імплантатів у межах повністю цифрового робочого процесу.



надруковано з використанням
RS VIVO Model Natural
Pink та Ivory

ПРОДУКТ	РОЗМІР	Артикул
RS VIVO Model Ivory (Слонова кістка)	1 кг	RS006190
RS VIVO Model Ivory (Слонова кістка)	5 кг	RS006216
RS VIVO Model Sand (Пісочний)	1 кг	RS006192
RS VIVO Model Natural Pink (Природній Рожевий)	1 кг	RS006191
RS VIVO Gingiva	1 кг	RS006201
RS VIVO Tray	1 кг	RS006198



Наші задоволені клієнти




Dr. Nitish Surathu

Викладач цифрової стоматології, директор Інституту ACE



Рішення Rapid Shape ONE забезпечує ефективний розподіл завдань між членами команди на етапах друку, промивання та полімеризації. Інтелектуальне з'єднання та технологія RFID гарантують безпечний автоматизований робочий процес, забезпечуючи при цьому високу швидкість і точність результатів завдяки простоті принципу «підключи та працюй».

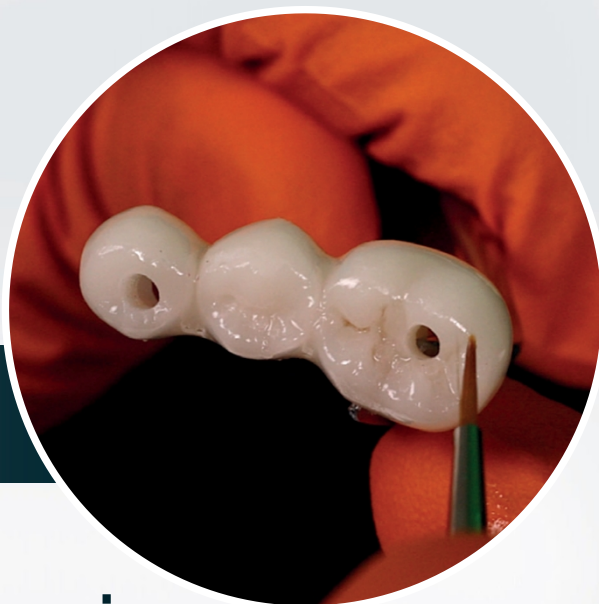

Замовити демонстрацію



Відскануйте, щоб запланувати 30-хвилинну дистанційну демонстрацію з фахівцями робочих процесів RS Digital

Контактна інформація служби підтримки клієнтів:
service@rapidshape.de

rapidshape

Виробник Rapid Shape GmbH
Römerstrasse 21
1296 Гаймсгайм

Телефон: +49 (0) 70 33 / 309 878 0
Факс: +49 (0) 70 33 / 309 878 40
Електронна пошта: info@rapidshape.de
rapidshape3d.com

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
ПП "ГАЛІТ"

вул. 15 Квітня, 6Е, Байківці, Тернопільська область, 47711,
УКРАЇНА

GALIT
EXPERTS IN DENTISTRY

Телефон: +380-800-502-998
Електронна пошта: office@galit.te.ua
service@galit.te.ua
www.galit-dental.com