

PRO 20

ПОТУЖНИЙ, НАДІЙНИЙ, ОПТИМІЗОВАНИЙ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 3D-ДРУКУ



rapidshape

PRO 20

PRO 20 – високоточний 3D-друк для стоматологічного застосування

- Перевірений 3D-принтер на базі технології DLP, що забезпечує надзвичайно деталізовану обробку поверхні з розміром пікселя +/- 34 мкм
- Висока швидкість друку завдяки запатентованим технологіям Force Feedback та RS Turbo
- Високоглянцеві поліровані шини прямо з принтера завдяки технології RS Crystal Polish
- Понад 200 сертифікованих смол, доступних для понад 15 стоматологічних застосувань




Модель C&B
надруковано за допомогою
RS Turbo

15 хвилин
Товщина шару 50 мкм




Коронки та мости
30 одиниць

15 хвилин
Товщина шару 50 мкм

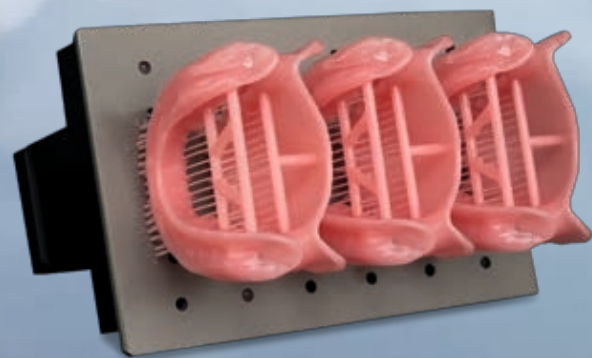

Базиси зубних протезів
до 6 базисів

90 хвилин
Товщина шару 100 мкм

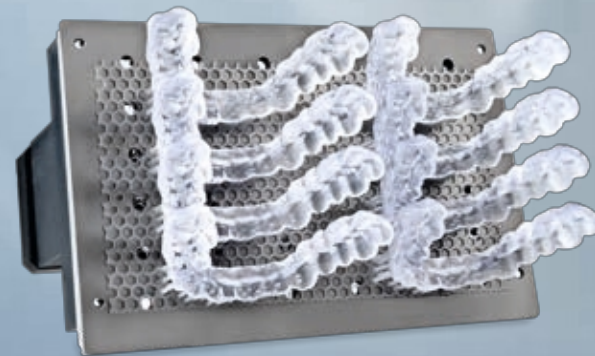

Шини
до 8 шин

90 хвилин
Товщина шару 100 мкм
Резервуар RS Crystal Polish

Надійність

- Створений для довговічності 3D-принтер DLP з високоякісними скляними резервуарами
- Вбудований нагрів
- Жодних здогадок завдяки інтелектуальній взаємодії з програмним забезпеченням, від програмного забезпечення до 3D-принтера, WASH та CURE
- Гарантована безпека процесу завдяки інтегрованій ідентифікації матеріалів за допомогою RFID

Оперативна підтримка

Річний план CARE Plus включений у вартість 3D-принтера PRO 20

Послуга включає:

- 90-денний супровід з фахівцем з цифрових робочих процесів Rapid Share
- Постійну підтримку та доступ до посібників з робочих процесів і інструментів усунення несправностей
- Щорічну відправку датчика на перевірку
- Негайний ремонт або заміну обладнання у разі необхідності, безкоштовно



Артикул: A.RS.PRO20_RS2

Відскануйте, щоб переглянути список сертифікованих матеріалів PRO 20



Відскануйте, щоб переглянути технічні характеристики




RS Crystal Polish

Високоглянцеві шини, що потребують мінімального полірування



Сумісні матеріали

detax keystone
INDUSTRIES

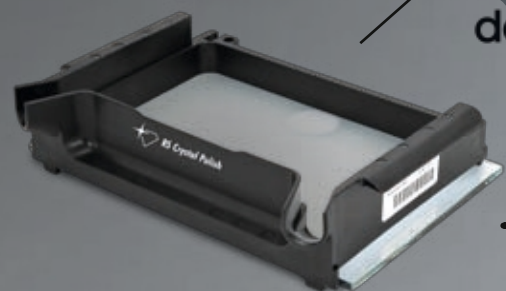

Резервуар RS Crystal Polish

Артикул: BGM182112

- Кришталеві чисті результати друку без ефекту пожовтіння після циклу миття та полімеризації
- Зменшує необхідність полірування після затвердіння на 90 %
- У поєднанні з PRO 20 дозволяє виготовити до 8 шин за менше ніж 90 хв

PRO 20 Аксесуари

Комплект аксесуарів

Артикул : RS001187



Резервуар PRO 20


Артикул: RS001185

Ваше робоче місце для безперервного та чистого друку

- Включає захищене від УФ-випромінювання сховище для 5 резервуарів
- 4 скляні резервуари з кришками
- Додаткові витратні матеріали

Міцний скляний резервуар

- Резервуари із загартованого скла без обмежень щодо витрати
- Вбудований RFID-чип для позначення типу смоли

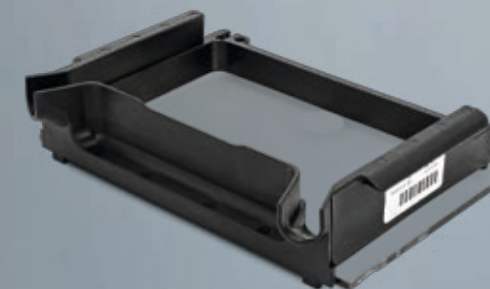

Платформа для друку хірургічних шаблонів

Артикул: RS001382

Шаблони підвищеної точності

- Розроблені для підвищення точності хірургічних напрямних за допомогою знімних D-подібних елементів, які переносяться з принту в WASH, а потім у CURE



Рішення для постобробки

Повністю оптимізоване з'єднання між 3D-принтерами Rapid Share, WASH та CURE, що усуває необхідність вгадувати та вручну вводити параметри від початку до кінця

rs VIVO



WASH

Артикул: A.RS.PROWASH_RS2

- Максимальна місткість камери: 6 надрукованих повних дуг
- 2-етапний цикл промивання та механізм сушіння
- Зменшення запаху завдяки фільтрації з активованим вугіллям
- Перевірені та попередньо встановлені параметри промивання для понад 200 смол
- Можливість встановлення в стек із пристроєм CURE

CURE

Артикул: A.RS.PROCURE_RS2

- Максимальна місткість камери: 6 надрукованих повних дуг зубного ряду
- Вбудована вакуумна система, що усуває необхідність у балонах або генераторах азоту
- Досягнення максимальної якості 3D-друку завдяки 360° полімеризації в контрольованому вакуумному середовищі
- Вбудований вхід для азоту



RS VIVO Model

Модельна смола преміум-класу, що ідеально підходить для естетичних і високоточних стоматологічних моделей, включаючи штампи та моделі для імплантатів. Доступні кольори: Слонова кістка (Ivory) та Пісочний (Sand).

RS VIVO Model Natural Pink

Високоякісна смола для 3D-друку, розроблена для візуального відтворення природного вигляду м'яких тканин ротової порожнини. Ідеально підходить для підбору відтінку вінірів, коронок та інших протезів. Доступний колір: природній рожевий



RS VIVO Gingiva

RS VIVO Gingiva — це гнучка високоточна смола, призначена для реалістичного відтворення ясенної тканини на стоматологічних моделях.


- Проста у використанні
- Міцна та стійка до розривів



ВІДСКАНУЙТЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ПРИСТРОЮ WASH



ВІДСКАНУЙТЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ПРИСТРОЮ CURE

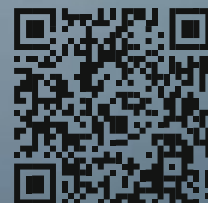

ПРОДУКТ	РОЗМІР	АРТИКУЛ
RS VIVO Model Ivory (Слонова кістка)	1 кг	RS006190
RS VIVO Model Ivory (Слонова кістка)	5 кг	RS006216
RS VIVO Model Sand (Пісочний)	1 кг	RS006192
RS VIVO Model Natural Pink (Природній Рожевий)	1 кг	RS006191
RS VIVO Gingiva	1 кг	RS006201



надруковано з використанням RS VIVO Model Natural Pink та Ivory

rsVIVO

Наші задоволені клієнти

“ Я дуже вражена Rapid Shape PRO 20. Він надійний, швидкий і бездоганно вписується в наш робочий процес. Якість друку незмінно висока, а автоматизовані модулі промивання та полімеризація економлять наш дорогоцінний час, забезпечуючи при цьому оптимальні результати.

“



Aleksandra Polchynska

CDT та власниця Visual Dental Arts, Беверлі-Шорс, Індіана

Замовити демонстрацію



Відскануйте, щоб запланувати 30-хвилинну дистанційну демонстрацію з фахівцями Digital-процесів RS та замовити зразки друку.

Контактна інформація служби підтримки клієнтів:
service@rapidshape.de

rapidshape

Виробник Rapid Shape GmbH
Römerstrasse 21
1296 Гаймсгайм

Телефон: +49 (0) 70 33 / 309 878 0
Факс: +49 (0) 70 33 / 309 878 40
Електронна пошта: info@rapidshape.de
rapidshape3d.com

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
ПП "ГАЛІТ"

вул. 15 Квітня, 6Е, Байківці, Тернопільська область, 47711,
УКРАЇНА

GALIT
EXPERTS IN DENTISTRY

Телефон: +380-800-502-998 Електронна пошта:
office@galit.te.ua service@galit.te.ua
www.galit-dental.com